

FUJIIRYōKI

CYBER-RELAX JP-1000

日本原裝進口

按摩諮商師 · 大力推薦

深感動

FUJIIRYōKI 按摩椅

按摩體驗選項

Massage Menu

敬請輕鬆
體驗看看



按摩諮商師



首先，先來嘗試

舒緩疲勞感

1



按下遙控器上的電源開關，椅背和腳部會自動調整至標準按摩角度。

2



從「選擇行程選項」的「全身」、「頸・肩」、「腰」選擇喜好按摩的部位。

3



從各行程中選擇「舒緩疲勞感」行程，就會讀取肩膀與 S 字型線條的位置，開始體驗！



諮商師的建議

自動行程


可依照自己喜好，
7 段調整按摩的強度

JP-1000 深感動按摩椅可以依照當天的身體狀況來調整按摩和氣壓的強度。請選擇適合自己的強度，體驗舒適的按摩。



可以確切檢測按摩「深度」與「按摩點」的最佳化
雙重檢測功能

S 字型線條檢測系統與肩位檢測系統兩種檢測技術搭配在一起，能夠細微檢測體型。能配合每個人不同體型的雙重偵測技術為業界首創！

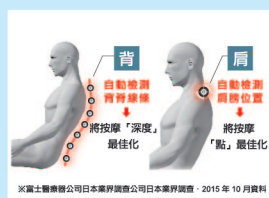

※富士醫療器公司日本康昇醫器公司日本康昇醫器・2015 年 10 月資料



再來可嘗試選擇不同強度的 「極度舒緩疲勞感」與「放鬆舒適」 兩種行程。

1



按下遙控器上的電源開關，椅背和腳部會自動調整至標準按摩角度。

2



從「選擇行程選項」的「全身」、「頸、肩」、「腰」選擇喜好的部位。

3



從各行程中選擇較強的「極度舒緩疲勞感」或較弱的「放鬆舒適」行程，就會讀取肩膀與 S 字型線條的位置，**開始體驗！**



諮商師的建議

三重模式氣壓系統

JP-1000 深感動按摩椅擁有進化的氣壓系統。宛若手掌包覆般的氣壓按摩，能夠幫助血液循環，紓解全身疲勞。從重視次數的「正常模式」、重視血液循環效果的「脈衝模式」、重視效果感受的「手揉模式」3 種模式當中，配合當天的身體狀況，選擇喜好的模式。





花少少的時間，做徹底的按摩，嘗試 7 分鐘的

「集中部位按摩」

1



按下遙控器上的電源開關，椅背和腳部會自動調整至標準按摩角度。

2



在「選擇行程選項」中選擇「集中部位」。

3



從 5 種「集中部位按摩」中選擇喜好的部位，就可以開始體驗！



諮商師的建議

集中部位按摩

這個模式可集中按摩頸部、肩部、肩胛骨、腰部、坐骨（臀部）。選擇適合您煩惱的部位，可以有效緩解肌肉僵硬與痠痛。諮商師特別推薦的部位是肩胛骨。長時間保持相同姿勢、從事文書工作或家事，姿勢難免會向前彎曲，使肩胛骨到背部的肌肉隨時保持緊張狀態。「肩胛骨集中」功能可以按摩舒緩這個部位的緊繃肌肉。





專業技

對付頑固的肌肉痠痛， 可有效直通

NEW

「深層按摩技巧」

1



按下遙控器上的電源開關，椅背和腳部會自動調整至標準按摩角度。

2




在「選擇行程清單」選擇「手動選擇。」

3



在選項中選擇「頸、肩專用」或「背、腰專用」。

4

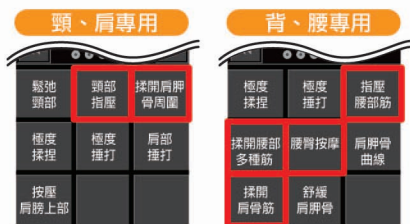

從各種選項中選擇「揉開肩胛骨周圍」、「揉開肩骨筋」、「頸部指壓」、「揉開腰部多種筋」、「指壓腰部筋」、「腰臀按摩」的按鍵，**開始體驗！**


7種深層按摩技法為：頸部指壓、舒緩脊背筋部、指壓腰部筋、腰臀按摩、揉開肩胛周圍、揉開肩骨筋、揉開腰部多種筋



諮商師的建議

直通深層肌肉

肌肉疲勞時就會變得僵硬。因疲勞而僵硬的肌肉會從表層肌肉到深層肌肉壓迫血管與末梢神經，導致血液循環不良。這就是深層肌肉痠痛的成因。在這裡介紹的按摩技巧，其目標就是要有效深入深層肌肉的痠痛。

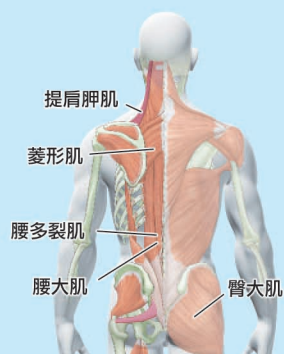



來嘗試舒展身體的 「伸展」功能

1



按下遙控器上的電源開關，椅背和腳部會自動調整至標準按摩角度。

2



在「選擇行程選項」選擇「伸展」。

3



從選項中選擇喜歡的行程，
開始體驗！



諮商師的建議

按摩前的伸展

這道按摩程序請您一定要嘗試看看：首先以「全身伸展行程」確實伸展全身肌肉。接著以「全身放鬆舒適行程」確實按摩放鬆肌肉。然後再以「集中部位」或手動行程的「深層按摩技巧」選擇適合自己的部位。透過這樣的流程，可減輕對肌肉的負擔，並有效緩和肌肉僵硬與痠痛。體感度也會提昇，得到更優質的按摩感受。

2



在「選擇行程選項」選擇「集中部位」。

3



按下切換頁面，選擇想要伸展的部位，就可以
開始體驗！



按摩類型功能表



手動手技功能表

獨立運作41種手法

【揉捏捶打】85 種類

(*7 種深層按摩技法為紅色框線)

JP-1000	調 整	向上揉捏	向下揉捏	向上緩慢揉開	向下緩慢揉開	捶打	小圈捶揉	指壓	向上推拉	向下推拉	鬆弛頸部	極度揉捏	極度捶打	肩胛骨曲線	按壓肩膀上部	環行向上揉捏	環行向下揉捏	環行捶打	環行小圈捶揉	指壓拉伸	舒緩肩胛骨	頸部指壓	
上下調節	移動調節	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
全 體	自動移動	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	
部 分	自動移動	○	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	
種 類		3	3	1	1	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	45

JP-1000	調整內容	波浪滾動按摩	肩部捶打	橫向揉捏	背脊拉伸	舒緩脊背筋部	指壓腰部筋	腰部極度揉捏	腰部極度捶打	伸展	伸展捶打	伸展小圈捶揉	伸展向上熟捏	3D向上揉捏	3D向下揉捏	3D捶打	3D小圈捶揉	腰臀按摩	揉開肩胛周圍	揉開肩骨筋	揉開腰部多種筋		
上下調節	移動調節	—	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—		
全 體	自動移動	○	—	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—		
部 分	自動移動	○	—	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○		
種 類		2	1	3	2	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	0	40

【氣壓部位】6 種類

部位	腳	臀	骨盤	腰	手	肩
有 無	○	○	○	○	○	○

【氣壓開關】8 種類

部位	脈衝	手感按摩	腳部同時	腰部同時	扭身	膝關節伸展	腿部伸展	雙重伸展	
有 無	○	○	○	○	○	○	○	○	

【腰臀複合】9 種類

部位	腳	臀	骨盆	腰	肩	手
有 無	○				○	○
開關	脈衝	手感按摩	膝關節伸展	腿部伸展	雙重伸展	扭身
有 無	○	○	○	○	○	○

【背部按摩及氣壓複合】

揉捏捶打	氣壓	
85	部位 開關	
	6 8	

× = 1190 種類

【腰臀複合】

腰 臀	氣壓	
1	部位 開關	
	3 6	

× = 9 種類

【腿部伸展強複合】

腿部伸展強	氣壓	
	部位 開關	

× = 0 種類

【按摩種類合計】複合種類 1190 + 揉捏捶打 85 + 氣壓 14 + 腰臀複合 9 + 臀部雙重複合 = 1298 種類

富士醫療器 世界首創！ 量產型按摩椅 獲認定為機械遺產！

存在按摩椅領域的象徵性、歷史意義上被認定『機械遺產』

機械遺產第68號・富士自動按摩椅 世界第一台量產按摩椅・1954年製造

【規格】

尺寸：W710×L870×H1300 mm

重量：約 64kg

程式：揉捏

外觀材料：木制

按摩球材質：橡膠

從公共澡堂或溫泉旅館起推廣按摩椅，而後被廣泛應用於家庭，繼續照顧人民群眾的身體健康。這台創業號是起源點。

【機械遺產】

1954 年，全球首款量產型按摩椅在大阪誕生。

2014 年，這台富士自動按摩機器獲日本機械學會認定為 [機械遺產] 之一。

日本機械學會作為給下一代傳達為目的，保存珍貴歷史性機械技術遺產，並將其視為文化遺產。而日本國內機械技術領域中，歷史上的意義被認定為機械遺產。

目前業界中，聲明為首座量產型按摩椅品牌僅 **FUJIIRYŌKI** 獲得實質第三方認證，以此為證。



開關



內部構造



機械遺產認定證



入選類別

(2) 電器・電子・精密機器製造
(37) 医療機器・健康機器

「Brand Japan 日經 BP Consulting」為日本具最大規模之品牌力調查，也是最具有公信力的調查。自 2001 年開始實施，從業界人士觀點到消費者觀點針對日本企業的品牌力所評價的結果。

調查內容分為 B to B (企業人士評價) 及 B to C (消費者評價) 兩部分。
在 B to C 區塊，富士醫療器 **FUJIIRYŌKI** 獲選入千大品牌之一。

在目前台灣市場的日本按摩椅品牌當中，僅喬山代理的 **FUJIIRYŌKI** 在此調查中榮獲消費者的青睞。

37. 医療機器・健康機器	
BtoC	
AsahiKASEI 旭化成	
OMRON オムロン	
OLYMPUS オリンパス	
Johnson & Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン	
TANITA タニタ	
TERUMO テルモ	
TEMPUR テンピュール	
PHILIPS フィリップス	
フジ医療器	FUJIIRYŌKI
FUJIFILM 富士フイルム	
HOYA	

CYBER-RELAX 深感動按摩椅JP-1000

〔規格 Specifications〕

- 本體尺寸(約):
收起腳墊時:寬760×深1,180×高1,220mm
手臂、腿部最大使用時:寬880×深2,000×高700mm
- 組合前最小寬度(約):680mm
- 後仰角度(約):110~157度
- 重量(約):74kg
- 電源:AC110V(60Hz)
- 消耗功率:90W(待機電力0.3W)
(電熱器功率:40W)
- 連續使用時間:30分鐘
- 日本醫療機器認證號碼:227ABBZX00084000(家庭用電氣按摩器、管理醫療機器)
- 安檢合格認證號碼:㊟ R53481 本商品通過經濟部標檢局—安全檢驗合格認證



黑色 (BC)



米白 (CS)



棕色 (BR)


〔配件 Accessories〕

可拆卸式襯墊與枕頭
可各自簡單拆卸,進行保養。




〔搬移・安裝 Mounting・Installation〕

- 搬移寬度
本體搬移寬度
需80cm以上(需拆除遙控器)。
- 安裝
需空出可讓椅背後仰的空間,安裝在水平地面。腿部方向需空出35cm以上,頭部方向需空出50cm以上。

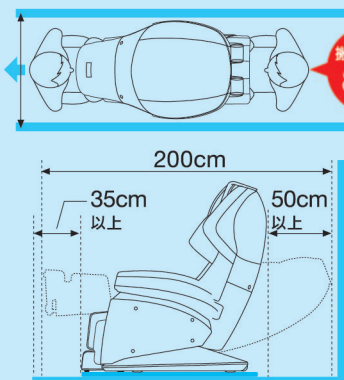

〔尺寸圖(mm) Dimension〕

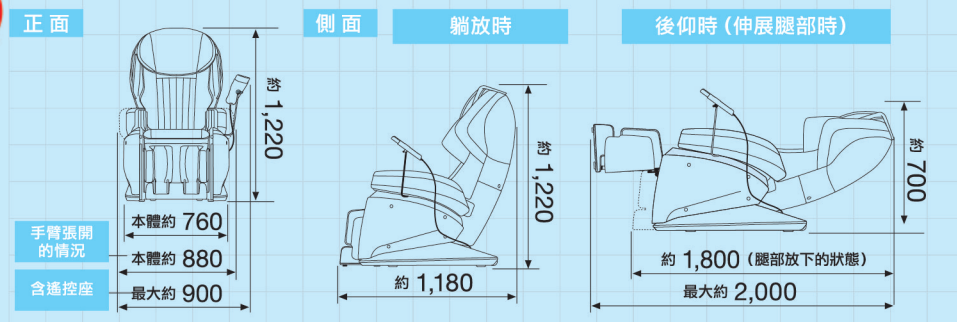

使用需求與目的

代替按摩。在一般家庭使用。

●舒緩疲勞感 ●舒緩肌肉疲勞感 ●舒緩神經痛・肌肉痠痛感 ●幫助血液循環 ●舒緩肌肉緊繃

安全注意事項



警告

- 有以下情況者,請勿使用。否則可能導致身體異常。
- 醫生禁止按摩(如:血栓症、重度動脈瘤、急性靜脈瘤、各種皮膚炎及皮膚感染〔含皮下組織炎症〕)
- 有以下情況者,請務必諮詢醫生後使用。否則可能導致身體異常。
- 使用心律調節器等易受電磁波影響的體內植入型醫療電子儀器 ●有惡性腫瘤 ●有心臟疾病 ●因糖尿病等引起高度末梢循環障礙,導致知覺障礙 ●皮膚有創傷 ●需保持身心安寧 ●體溫38℃以上(發燒)(例:急性炎症〔倦怠感、異常寒顫、血壓變化等〕症狀強烈時期。身體虛弱時。)
- 骨質疏鬆症、脊椎骨折、急性(疼痛性)疾病 ●骨質(脊椎)異常,或脊椎左右側彎 ●扭傷、拉傷等發炎症狀 ●椎間板突出 ●被認定喪失溫度感覺 ●其他身體出現特別異狀,或是在醫療機構治療中
- 請勿讓兒童獨自使用,或讓無法自行表達意志的人使用。請勿讓幼兒接近。



懷孕中或剛生產者,請和醫生討論後再使用。



注意

使用時間應限定1天30分鐘左右。另外,同一部位連續使用時間應限定5分鐘以內。
長時間使用有可能會傷害肌肉或神經。



美と健康の総合メーカー
株式 株式会社
フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

總代理

JOHNSON 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360

www.johnsonfitness.com.tw

428 台中市大雅區東大路二段999號