




喬山健康科技股份有限公司
428 台中市大雅區清泉路26號
電話：(04) 2566-7100
傳真：(04) 2566-3974
消費者免付費電話：0800 017 360
<http://www.johnsonfitness.com>

本公司保留對產品及說明書修改的權力，如有改動恕不另行通知
產品外觀以實物為準。

JOHNSON®

i-Puffy Massage Cushion

暖骨頭 紓壓按摩枕

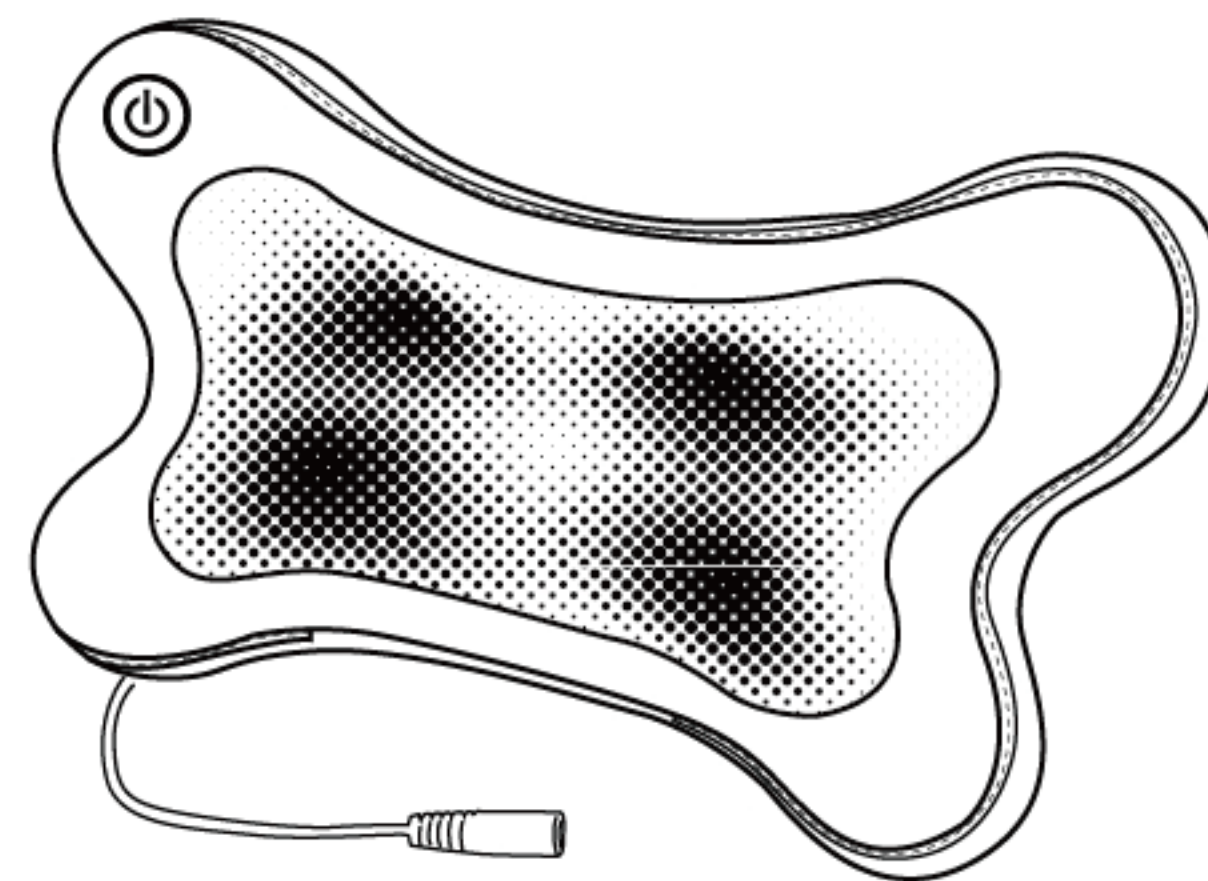

MC-JS160
使用說明書

感謝您購買本產品。使用前，請仔細閱讀本使用手冊，並特別注意安全事項，以確保正確操作及使用。請妥善保管本使用手冊，以便日後查詢。

目錄

● 安全事項	1
使用環境	
不適宜使用本產品的人士	
開關注意事項	
應停止使用產品的狀況	
產品的組裝與維修	
關於電源插頭和電源線	
● 機件名稱及功能	2
外觀結構	
● 使用方法	3
使用前	
操作說明	
按摩部位	
使用後	
● 常見問題及處理方式	4
● 產品的清潔、保養	4
● 產品技術參數	6

1、使用環境

- * 請勿在潮濕或過多灰塵的環境中使用產品，以免產品發生故障。
- * 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- * 若是在偏低室溫中使用，或由低溫處移至溫暖的環境中使用時，可能會因為機件內水氣聚集而影響機器正常運作，甚至造成機件故障。建議先放置於正常室溫一小時後再開始使用。
- * 請勿在使用噴霧產品或充滿氧氣的場所操作本產品。
- * 請勿將產品放置於戶外、電熱器旁、爐具附近、或陽光直射處。

2、不適宜使用本產品的人士

如果您有以下情形，使用前請先諮詢醫生：

- * 正在接受醫生治療者或身體感覺不適者。
- 高血壓、心臟病、腦動脈硬化、腦血栓患者。
- * 惡性腫瘤患者。
- * 孕婦或正處於經期者。
- * 骨質疏鬆症患者。
- * 使用心臟起搏器等植入體內的醫療電子儀器者。
- * 患有急性疾病者。
- * 未成年人。



注意

- ▶ 請勿在布套破損、機件外露的情況下使用本產品，以免絞入毛髮或衣物，造成危險；請勿將按摩頭貼近並用力按摩頭頸部、關節、胸部或腹部。
- ▶ 請務必謹慎使用溫熱功能；請勿使用於感覺遲鈍、敏感皮膚或血液循環不良部位；切勿讓兒童或身心功能障礙者自行使用溫熱功能。
- ▶ 請勿在進食前後1小時使用本產品。
- ▶ 請勿在產品使用時入睡。
- ▶ 請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
- ▶ 持續按摩身體同一部位超過5分鐘可能會造成刺激並導致反效果；建議使用時限為20分鐘。
- ▶ 請勿將本產品與電毯或其他具有療效之設備同時使用。
- ▶ 為避免過熱而導致走火、觸電或造成傷害，請勿將產品置於枕頭下或覆蓋毯子、棉被或其他物品下操作。
- ▶ 請勿將任何物品或易燃物品插入本產品內，這可能導致觸電、故障或是引發火患。
- ▶ 孩童、行動遲緩、身心功能或智能障礙者欲使用本產品，必須要有有人在旁指導且能負責其安全。
- ▶ 請務必督導及確認孩童未將產品是為遊樂器材使用，以確保其安全。

3、開關注意事項

- * 雙手或身體潮濕時，請勿操作或使用本產品。
- * 切勿使控制開關接觸到水等液體。

4、應停止使用產品的狀況

下列情形應立即停止使用產品，關閉開關並將電源插頭拔離插座。

- * 意外將水濺到產品或控制開關上時。
- * 相關配件破損或內部機件暴露出來。
- * 在按摩期間感受到異常或嚴重的疼痛。
- * 在產品工作時發現任何異常的狀況如冒煙、異味等。
- * 突然斷電時。
- * 雷電發生時。
- * 高速駕駛時。

關於電源插頭和電源線

- * 請檢查電壓確實符合產品規格需求。本產品僅使用交流電（AC）。
- * 雙手潮濕時切勿安插或拔除電源插頭。
- * 拔除電源插頭時，請握住插頭本身，切勿拉扯電源線。
- * 產品設定20分鐘自動定時，但每次使用完畢後，仍請拔除電源線。
- * 請勿將電源線置於任何物體之下；請勿將電線纏繞於物體之上，以免電源線受損。
- * 電源線損壞或電源插座有鬆脫的狀況時，請勿使用本產品。
- * 電源線損壞時，必須由維修中心專職人員更換。


機件名稱與功能（外觀結構）



車用轉接器



電源轉換器

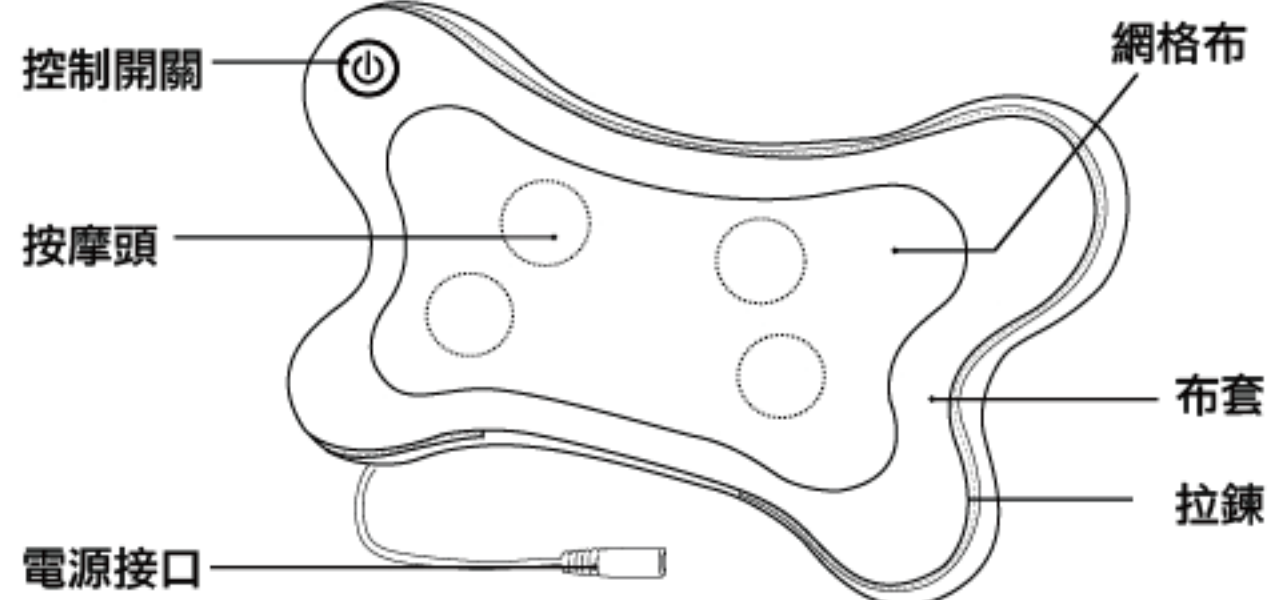

使用前準備

- * 檢查產品有無破損。

操作說明

- 1、將電源插頭插入110V/60Hz的電源插座上。
- 2、按  鍵一次，開啟按摩及加熱功能；且開始20分鐘定時。
- 3、再按  鍵一次，加熱功能關閉，再按一次，加熱功能打開，如此循環。
- 4、長按  三秒鐘，即可隨時停止按摩。

按摩部位



頸 部




腹 部



小 腿



腰 部

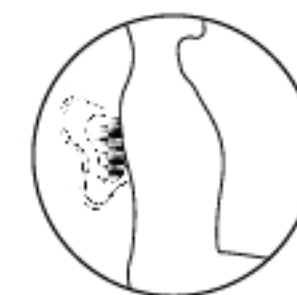

背 部



大 腿

使用後

- * 產品無人在旁看管時、閒置不用時，請務必將電源由插座中拔除。

使用本產品時，如遇以下問題，請參考下列提示及可能解決方式。
如持續故障無法使用，請拔除插頭，並和維修及服務中心聯絡。

狀況	可能原因及處理方式
無法啟動產品	* 請確認電源插頭正確插入插座。 * 請確認開啟插座電源。
按摩在進行中忽然停止	* 請檢查電源插頭是否被拔離，或電源轉接頭處脫落。 * 請確認是否不小心壓到控制面板上的按鈕。 * 自動設定20分鐘定時裝置時間已到。 * 產品按摩過久，啟動過熱自動保護裝置，請關閉產品主電源至少1小時，等待機器降溫。 * 如問題無法解決，請與維修服務中心聯絡。

產品的清潔、保養

1、清潔

- * 清潔之前，請確認開關已經關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- * 請使用乾布清潔產品表面。

2、保養

- * 確認開關關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- * 保持產品清潔並遠離高濕度的場所。
- * 如果長時間不使用本產品，請用防塵罩（請自行購買）套住產品，防止灰塵落入。



注意

- ▶ 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色。

- * 請勿嘗試自行拆卸或維修本產品。碰觸內部機件可能導致產品故障或觸電意外。
- * 請務必依照使用手冊中所敘述的用途使用本產品；請勿使用非製造商所推薦之零配件。
- * 本產品僅能由本公司授權之專業維修單位或人員進行維修。
- * 下列狀況發生時，切勿使用本產品：
電源線或電源插頭損壞、操作不正常、曾掉落地面損傷、曾掉落水中。
- * 如有上述情形，請將產品送回維修中心進行檢查或維修。

產品技術參數

產品名稱：暖骨頭 舒壓按摩枕

型 號：MC-JS160

輸入電壓：DC12V 2.5A

額定功率：30W

使用時間：20分鐘

商檢字號：



R51537

注意事項：12.5公斤以上重壓按摩枕會停止轉動或即自動斷電，

請勿坐或站立於按摩枕之上。