

富士醫療器 最新 最高峰機型

CYBER-RELAX JP-2000

日本製

按摩諮商師・大力推薦

FUJIIRYŌKI

5D-AI

按摩椅

按摩體驗選項

JP-2000操作手冊



FUJIIRYŌKI

首先介紹

按摩椅諮商師

按摩椅諮商師

中井 唯仁

傳達按摩椅魅力的專家。

1999年加入富士醫療器，負責按摩椅相關諮詢和接待業務。
傑出的表現在按摩椅魅力的傳達和專業的知識、對健康的社會有所貢獻。除了身體力行地進行產品知識介紹以外，也努力教育培育人才，培訓銷售員和培訓師超過370名。

另外，也以個人魅力和出色演講能力活躍在媒體新聞上，
朝日放送，BS電視，雜誌，周刊等等。



體驗新款按摩椅

思考一下“AI技術”



1. 操作所需的必要信息 ■ 使用語音導覽功能



2. 精確檢測用戶體型 ■ 調整適合按摩方式



3. 溫柔深層細緻 ■ 穩定運行按摩



您的疲勞

21種自動行程可以選擇對應



在行程選擇畫面可以選擇按摩部位，
自動行程有21種可供用戶選擇。

行程程式選擇




※溫馨小提醒

自動行程按摩強度是從高到低排序，請根據自身狀況選擇按摩強度。


有效按摩 準備步驟




1. 掀開頭枕

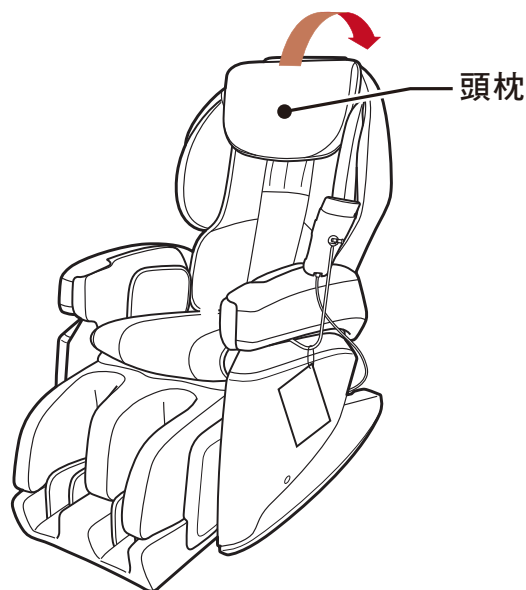

2. 啟動開關 自動調節位置

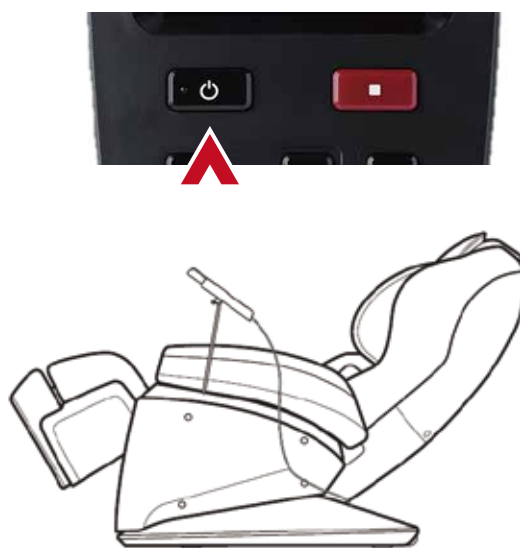

3. 調節腳部位置

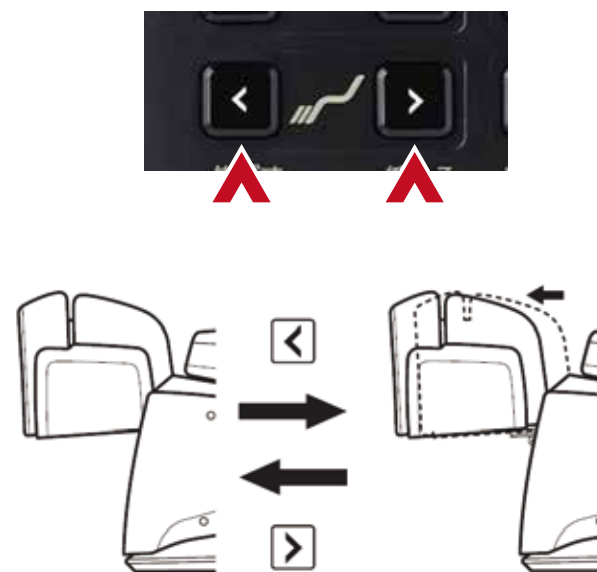


※溫馨小提醒

為了按摩更有效，需要做好準備工作
尤其掀開頭枕是為了讓按摩球能更服貼的接觸頭、肩部位，腳部藉由電動式與彈簧式
兩種滑軌機制，可調整適應不同用戶的腿長。

如果時間較短

7分鐘快速行程

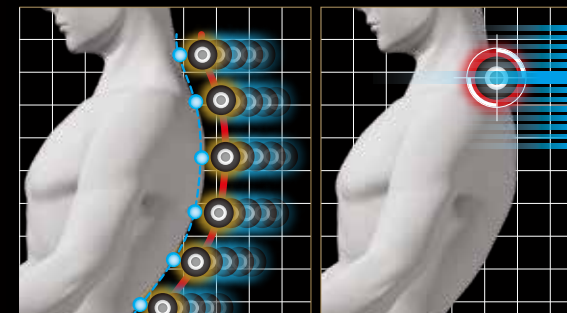

1. 選擇7分鐘快速行程



2. 自動檢測背部和肩部位置， 確認按摩球位置後按下開始



自動檢測



※溫馨小提醒


能夠在短時間內體驗新按摩技術。通過AI雙重檢測系統測定位置後開始適合用戶的行程。

全身伸展舒壓

全身伸展程式



1. 將背部和腳部
調節位置至平躺狀態

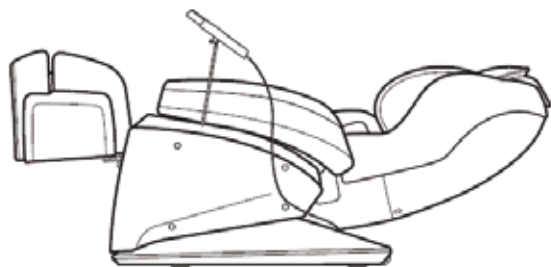

2. 選擇伸展-全身伸展行程



3. 通過AI雙重檢測系統
測定位置後開始適合用戶的行程



※溫馨小提醒

如果時間充裕的話，選擇全身伸展程式將身體充分拉伸，幫助促進血液循環，將背部放平，平躺姿勢下伸展效果更佳。

用戶煩惱之處

豐富行程可選



1. 從行程選單畫面可以選擇全身，肩頸，腰部



2. 通過AI雙重檢測系統，測定位置後開始適合用戶的行程



※溫馨小提醒

富士醫療器的按摩椅可以做細微調節。
按摩的強度(7檔)，足底滾輪的強度(3檔)，氣壓強度(5檔)
可按照自己喜好調節。
为了更好的體驗按摩，請事先調整背部和腳部位置。



酸痛點集中舒解

7分鐘部位集中



1. 從行程選單畫面可以選擇部位集中，頸，肩，肩胛骨，腰，臀部，腳等12種行程。



6種部位集中技巧



3種部位集中伸展



3種軀幹放鬆技法



※溫馨小提醒

選擇集中部位，如果感覺按摩強度大的話，
可以在部位集中內的選擇部位伸展開始，先柔緩適應後再按摩。
對於身體轉動的軀幹和骨盆位置，可以選擇軀幹放鬆技法。




全身筋膜肌肉舒緩放鬆

極度全身伸展行程



1. 將背部和腳部
調節位置至平躺狀態

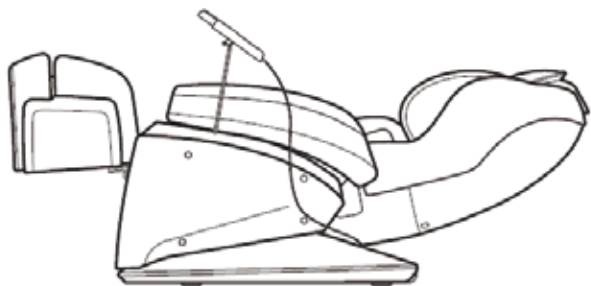

2. 選擇極度全身伸展程式



3. 通過AI雙重檢測系統
測定位置後開始適合用戶的行程



※溫馨小提醒

經過一定強度按摩的身體，可以選擇極度全身伸展程式來進行緩和，調整身體狀態。

更多舒適體驗

雙重溫熱功能



作為按摩椅，為了達到更好的按摩效果，JP-2000搭載雙重溫熱功能（即熱溫熱背墊和足底溫熱）

1. 按下溫熱按鈕



即熱溫熱背墊



當置於背部時，可以溫熱背部和腰部，
當拉開拉鍊放置胸前時，可溫熱胸腹部。

足底溫熱



溫熱容易冰冷的腳部。


※溫馨小提醒

頭・肩 對策



一般認為頸部、肩膀僵硬酸痛造成的原因之一是前傾姿勢(頸前伸)，容易導致腹部周圍容易變涼變硬。通過放在前面可以溫暖冰冷的胸腹部周圍並進行按摩來緩解肌肉緊張。

腰部 對策

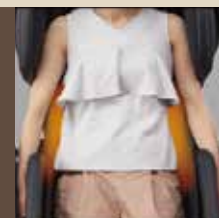

腰部肌肉緊張和冰冷是引起腰痛的重要原因。溫熱背墊可以直接溫暖腰部。

富士醫療器

世界首創！
量產型按摩椅

獲認定為機械遺產！

機械遺產第68號・富士自動按摩椅
世界第一台量產按摩椅・1954年製造

【規格】

尺寸：W710×L870×H1300 mm

重量：約 64kg

程式：揉捏

外觀材料：木制

按摩球材質：橡膠

從公共澡堂或溫泉旅館起推廣按摩椅，而後被廣泛應用於家庭，繼續照顧人民群眾的身體健康。這台創業號是起源點。



開關



內部構造



【機械遺產】

1954年，全球首款量產型按摩椅在大阪誕生。

2014年，這台富士自動按摩機器獲日本機械學會認定為「機械遺產」之一。

日本機械學會作為給下一代傳達為目的，保存珍貴歷史性機械技術遺產，並將其視為文化遺產。而日本國內機械技術領域中，歷史上的意義被認定為機械遺產。

目前業界中，聲明為首座量產型按摩椅品牌僅 **FUJIIRYOKI** 獲得實質第三方認證，以此為證。



機械遺產認定證



FUJIIRYōKI



「Brand Japan 日經 BP Consulting」為日本具最大規模之品牌力調查，也是最具有公信力的調查。自 2001 年開始實施，從業界人士觀點到消費者觀點針對日本企業的品牌力所評價的結果。

調查內容分為 B to B（企業人士評價）及 B to C（消費者評價）兩部分。
在消費者評價中，富士醫療器 **FUJIIRYōKI** 獲選入千大品牌之一。

在目前台灣市場的日系按摩椅品牌當中，僅喬山的 **FUJIIRYōKI** 在此調查中榮獲消費者的青睞。

37. 医療機器・健康機器

BtoC

AsahiKASEI 旭化成

OMRON オムロン

OLYMPUS オリンパス

Johnson & Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン

TANITA タニタ

TERUMO テルモ

TEMPUR テンピュール

PHILIPS フィリップス

フジ医療器

FUJIIRYōKI

FUJIFILM 富士フイルム

HOYA

日本最大的品牌價值評估研究

FUJIIRYōKI 入選類別

(2) 電器・電子・精密機器製造

(37) 医療機器・健康機器

〔規格 Specifications〕

- 本體尺寸（約）：

收起腳墊時：寬760 × 深1,380 × 高1,250 mm

手臂、腿部最大使用時：寬880 × 深2,000 × 高740 mm

- 組合前最小寬度（約）：680 mm

- 後仰角度（約）：110 ～ 157度

- 重量（約）：78 kg

- 電源：AC110V（50/60Hz）

- 消耗功率：115W（待機電力：0.3W）

（電熱器功率：25W）

- 連續使用時間：30分鐘

- 日本醫療機器認證號碼：230ABBZX00123000（家庭用電氣按摩器、管理醫療機器）

- 安檢合格認證號碼：R53481 本商品通過經濟部標檢局—安全檢驗合格認證



黑色(BK)



米白色(CS)



棕色(SB)



〔配件 Accessories〕

可拆卸式腳墊與枕頭

可各自簡單拆卸，進行保養。

※使用需求與目的


代替按摩。在一般家庭使用。

● 紓緩疲勞感 ● 紓緩肌肉疲勞感 ● 紓緩神經痛・肌肉痠痛感 ● 幫助促進血液循環 ● 紓緩肌肉緊繃


〔搬移・安裝 Moving・Installation〕

- 搬移寬度
本體搬移寬度
需80cm以上（需拆除遙控器）。


搬入寬度約
約80cm

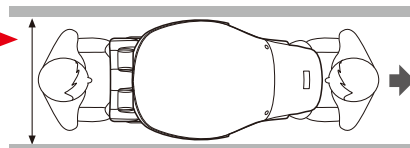

- 安裝
需空出可讓椅背後仰的空間，
安裝在水平地面。腿部方向需
空出35cm以上，頭部方向需空
出50cm以上。

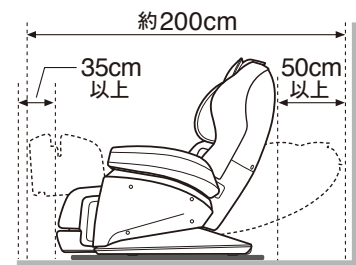

〔尺寸圖(mm) Dimension〕

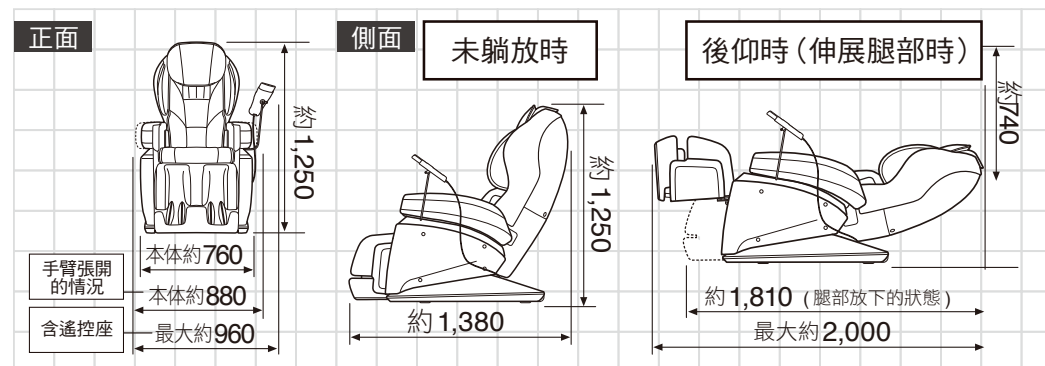

⚠ 安全注意事項

使用前請詳閱「使用說明書」，並正確使用。

- 有以下情況者請勿使用。否則可能導致身體異常。
- 醫生禁止按摩者（例：血栓、重度動脈瘤、急性靜脈瘤、各種皮膚炎及皮膚感染〔含皮下組織炎症〕）
- 有以下情況者，請務必諮詢醫生後使用，否則可能導致身體異常。
- 使用心律調節器等易受電磁波影響的體內植入型醫療電子儀器 ● 有惡性腫瘤 ● 有心臟疾病 ● 因糖尿病等引起高度末梢循環障礙而導致知覺障礙 ● 皮膚有創傷 ● 需保持身心安靜
- 體溫38℃以上（發燒）（例如：急性炎症（倦怠感、寒顫、血壓變化等）症狀強烈時期。身體虛弱時。） ● 患有骨質疏鬆症、脊椎骨折、急性（疼痛性）疾病 ● 背骨（脊椎）異常，或脊椎左右側彎
- 扭傷、拉傷等發炎症狀 ● 椎間盤突出症 ● 被認定喪失溫度感覺 ● 其他身體出現特別異狀，或是在醫療機構治療中。
- 請勿讓兒童獨自使用，或讓無法自行表達意志的人使用，此外也請勿讓幼兒接近。

👶 懷孕中或剛生產者，請和醫生討論後再使用。

使用前注意事項

- ◎ 本商品附保證書。保證書是在通路銷售用印後開始有效。請確認記載內容並確實保管。
- ◎ 本商品保證僅限台灣區內有效。◎ 遙控座可設置在左右任一邊。



FUJIIRYŌKI

FUJIIRYŌKI

5D-AI

按摩椅



美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

JOHNSON 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw
428 台中市大雅區東大路二段999號