

FUJIIRYŌKI

CYBER-RELAX JP-1100

日本原裝進口

按摩諮商師 · 大力推薦

境界按摩椅

按摩體驗選項

Massage Menu

敬請輕鬆
體驗看看



按摩諮商師



首先從 伸展行程 開始體驗吧 !!

按摩前的準備


1. 按下電源開關



椅背和腳部會自動調整至待機角度。



2. 調整腳部

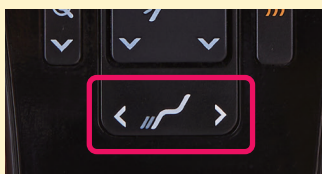

藉由電動式與彈簧式 2 種滑軌機制適應每一個人的腿長。



3. 椅背完全傾躺



將椅背傾躺至平躺姿勢。




伸展行程操作方法

1



從「選擇行程選項」，選擇「伸展」行程。

2

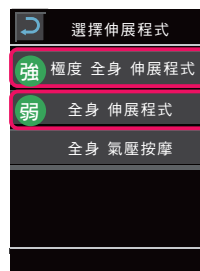

從行程中選擇喜好的伸展行程，按下。
體驗開始！



諮詢師的建議

為了從有效的按摩考量，
首先建議選擇 全身伸展行程。

為了讓按摩椅達到更好的效果，推薦您作為暖身，首先體驗全身伸展行程。伸展運動可以讓容易疲勞的全身肌肉恰當好處的舒展。之後，請切換至喜好的行程。另外，椅背傾倒後可以得到更好的放鬆體驗。





嘗試一下根據

症狀和喜好

選擇自動行程吧！

按摩前的準備


1. 按下電源開關



椅背和腳部會自動調整至待機角度。



2. 調整腳部

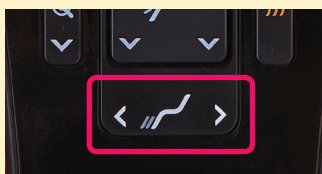

藉由電動式與彈簧式 2 種滑軌機制適應每一個人的腿長。



3. 調整喜歡的角度



調整椅背。越向後傾躺可以得到越強烈的按摩體驗。



自動行程的操作方法

1




從「選擇行程選項」的「全身」、「頸、肩」、「腰」選擇喜好的部位

2



根據喜好調整強度，按下開關，體驗開始！

3

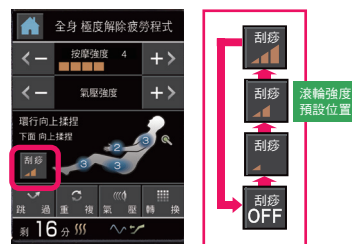


選擇滾輪選項，調整喜歡的強度。

諮商師的建議



根據部位，強弱選擇，共有 21 種自動行程

請根據當天的身體情況選擇「全身」、「頸、肩」、「腰」選項的行程。根據選擇的行程，按摩和氣壓強度的組合會自動改變。

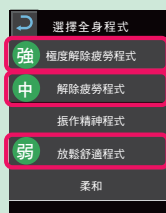

JP-1100 的新功能 腳底滾輪指壓

NEW

選擇「全身」、「頸、肩」或「腰」的選項後，腳底滾輪指壓會同時開始。可以幫助腳底以及小腿的血液循環，幫助消除疲勞。將腳部調高可以得到更舒適的按摩體驗。





調理身體平衡的 7 分鐘行程
請嘗試

軀幹放鬆技法

按摩前的準備


1. 按下電源開關



椅背和腳部會自動調整至待機角度。



2. 調整腳部

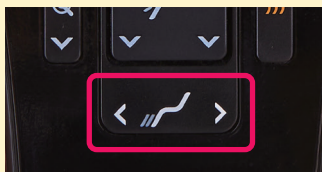

藉由電動式與彈簧式 2 種滑軌機制適應每一個人的腿長。



3. 調整喜歡的角度



調整椅背。越向後傾躺可以得到越強烈的按摩體驗。



軀幹放鬆技法的操作方法

1



在選擇行程選項選擇「部位集中」行程

2



按下 << 鍵

3



選擇喜歡的行程體驗開始！




諮商師的建議

追蹤現在熱門的話題
研發出更深層，更細膩的軀幹放鬆技法。

軀幹是支撐身體的重要部位。

背部放鬆技法，腰部放鬆技法是用氣壓來維持身體姿勢，按摩會緩慢並深層的進行，舒緩疲勞的肌肉。按摩與呼吸配合可以得到更好的效果。

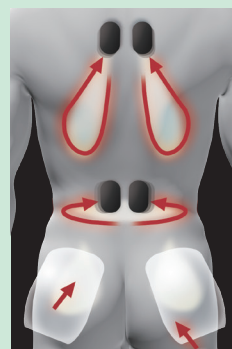



最後推薦您使用

部位集中伸展行程

完成您的按摩

按摩前的準備


1. 按下電源開關



椅背和腳部會自動調整至待機角度。



2. 調整腳部

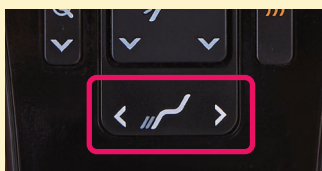

藉由電動式與彈簧式 2 種滑軌機制適應每一個人的腿長。



3. 椅背完全傾躺



調整椅背。越向後傾躺可以得到越強烈的按摩體驗。



部位集中伸展的操作方法

1



在選擇行程選項中選擇「部位集中」。

2



按下  鍵

3



選擇喜歡的行程
體驗開始！



諮商師的建議

最適合做為緩和運動
結尾也要伸展 - 集中部位伸展

推薦您在按摩之後使用部位集中伸展行程作為緩和。可以延展按摩之後變軟的肌肉。獲得爽快的體驗感受。背部被固定，腳部由氣囊拉伸猶如牽引般的按摩行程。



富士醫療器

世界首創！
量產型按摩椅

獲認定為機械遺產！

存在按摩椅領域的象徵性、歷史意義上被認定『機械遺產』

機械遺產第68號・富士自動按摩椅
世界第一台量產按摩椅・1954年製造

【規格】

尺寸：W710×L870×H1300 mm

重量：約 64kg

程式：揉捏

外觀材料：木制

按摩球材質：橡膠

從公共澡堂或溫泉旅館起推廣按摩椅，而後被廣泛應用於家庭，繼續照顧人民群眾的身體健康。這台創業號是起源點。



開關



內部構造



【機械遺產】

1954 年，全球首款量產型按摩椅在大阪誕生。

2014 年，這台富士自動按摩機器獲日本機械學會認定為「機械遺產」之一。

日本機械學會作為給下一代傳達為目的，保存珍貴歷史性機械技術遺產，並將其視為文化遺產。而日本國內機械技術領域中，歷史上的意義被認定為機械遺產。

目前業界中，聲明為首座量產型按摩椅品牌僅 **FUJIIRYOKI** 獲得實質第三方認證，以此為證。



機械遺產認定證



日本最大の
ブランド価値評価調査



入選類別

(2) 電器・電子・精密機器製造
(37) 医療機器・健康機器

「Brand Japan 日經 BP Consulting」為日本具最大規模之品牌力調查，也是最具有公信力的調查。自 2001 年開始實施，從業界人士觀點到消費者觀點針對日本企業的品牌力所評價的結果。

調查內容分為 B to B（企業人士評價）及 B to C（消費者評價）兩部分。在 B to C 區塊，富士醫療器 **FUJIIRYOKI** 獲選入千大品牌之一。

在目前台灣市場的日系按摩椅品牌當中，僅喬山代理的 **FUJIIRYOKI** 在此調查中榮獲消費者的青睞。

37. 医療機器・健康機器

BtoC

AsahiKASEI 旭化成
OMRON オムロン
OLYMPUS オリンパス
Johnson & Johnson ジョンソン・エンド・ジョンソン
TANITA タニタ
TERUMO テルモ
TEMPUR テンピュール
PHILIPS フィリップス
フジ医療器 FUJIIRYOKI
FUJIFILM 富士フイルム
HOYA

CYBER-RELAX 境界按摩椅JP-1100

- 本體尺寸(約):
收起腳墊時:寬760×深1,380×高1,220mm
手臂、腿部最大使用時:寬880×深2,000×高740mm
- 組合前最小寬度(約):680mm
- 後仰角度(約):110~157度
- 重量(約):78kg
- 電源:AC110V(50/60Hz)
- 消耗功率:90W(待機電力0.3W)(電熱器功率:40W)
- 連續使用時間:30分鐘
- 日本醫療機器認證號碼:229ABBZX00034000(家庭用電氣按摩器、管理醫療機器)
- 安檢合格認證號碼:R53481本商品通過經濟部標檢局一安全檢驗合格認證〔規格 Specifications〕



黑色 (BK)



米白 (CS)




棕色 (BR)

〔搬移・安裝 Mounting・Installation〕

- 搬移寬度
本體搬移寬度
需80cm以上(需拆除遙控器)。
- 安裝
需空出可讓椅背後仰的空間,安裝在水平地面。
腿部方向需空出35cm以上,頭部方向需空出50cm以上。

〔配件 Accessories〕

可拆卸式襯墊與枕頭
可各自簡單拆卸,進行保養。

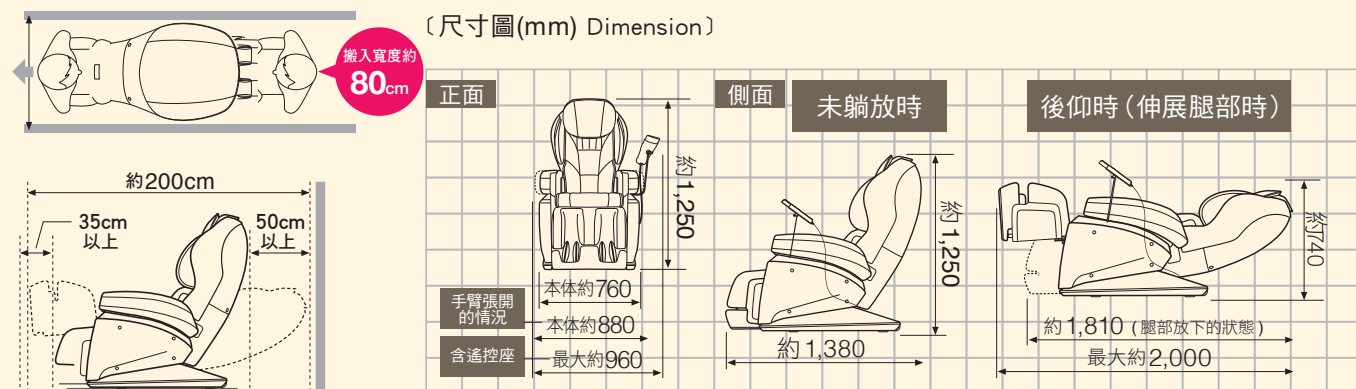

使用需求與目的

代替按摩。在一般家庭使用。

- 舒緩疲勞感 ●舒緩肌肉疲勞感 ●舒緩神經痛、肌肉痠痛感 ●幫助血液循環 ●舒緩肌肉緊繃

安全注意事項



- 有以下情況者,請勿使用。否則可能導致身體異常。
- 醫生禁止按摩(如:血栓症、重度動脈瘤、急性靜脈瘤、各種皮膚炎及皮膚感染〔含皮下組織炎症〕)
- 有以下情況者,請務必諮詢醫生後使用。否則可能導致身體異常。
- 使用心律調節器等易受電磁波影響的體內植入型醫療電子儀器 ●有惡性腫瘤 ●有心臟疾病 ●因糖尿病等引起高度末梢循環障礙,導致知覺障礙 ●皮膚有創傷 ●需保持身心安寧 ●體溫 38℃ 以上(發燒)(例:急性炎症(倦怠感、異常寒顫、血壓變化等)症狀強烈時期。身體虛弱時。)
- 骨質疏鬆症、脊椎骨折、急性(疼痛性)疾病 ●背骨(脊椎)異常,或脊椎左右側彎 ●扭傷、拉傷等發炎症狀 ●椎間板突出 ●被認定喪失溫度感覺 ●其他身體出現特別異狀,或是在醫療機構治療中
- 請勿讓兒童獨自使用,或讓無法自行表達意志的人使用。請勿讓幼兒接近。



懷孕中或剛生產者,請和醫生討論後再使用。



使用時間應限定 1 天 30 分鐘左右。另外,同一部位連續使用時間應限定 5 分鐘以內。
長時間使用有可能會傷害肌肉或神經。



美と健康の総合メーカー
株式會社 **フジ医療器**
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

總代理

JOHNSON 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw
428 台中市大雅區東大路二段999號