

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處理會造成對環境的污染


JOHNSON

喬山健康科技

TAK mE

TAKE MESSAGE EASY

帶著走·眼部舒摩器

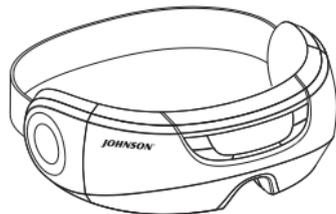

JOHNSON 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

TAK mE 帶著走·眼部舒摩器
TAKE MESSAGE EASY

Johnson C 26 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

感謝您

購買 **JOHNSON[®] TAK mE** 帶著走·眼部舒摩器，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目錄

● 重要注意事項	1
● 部件名稱與功能	3
● 產品結構	3
● 控制面板	4
● 使用方法	5
● 充電	6
● 保養與收藏	7
● 故障排除	7
● 產品規格	8
● 限用物質含有情況標示聲明書	9
● 保固書	10

備註: 本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通告，產品顏色以實物為準。

注意事項

- 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- 維修時請出示本保證卡。
- 保證期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- 保固區域以台灣（不含外島及國外）地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- 產品外觀因使用造成污舊者。
- 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

- 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期： _____

機器型號： _____

條形碼： _____

經銷商蓋章



安全注意事項

注意事項1

- ▶ 兒童或無自主能力者需要在特別監護下才能使用本產品。
- ▶ 使用過程中，身體出現或感到異常時，請立即停止使用，並諮詢醫生。
- ▶ 若本產品或充電器，充電線已經損壞，請勿使用。
- ▶ 充電前，請確保充電器及產品充電插孔處乾燥。
- ▶ 當產品或充電器嚴重浸入水中的情況下都不得充電使用。
- ▶ 請勿在使用本產品的同時使用其他醫療儀器。
- ▶ 請勿用於治療目的。
- ▶ 本產品僅限一人使用，請勿兩人或兩人以上同時使用。
- ▶ 請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
- ▶ 建議每次使用十五分鐘為宜。
- ▶ 請勿將產品在地面拖動，或拉住電源線移動產品，以免損壞產品。
- ▶ 有眼疾症狀者不能使用，曾做過眼部手術、青光眼、白內障、視網膜脫離等重大眼部疾病患者禁止使用。
- ▶ 眼部周圍有創傷的人，需安靜休養的人請勿使用。
- ▶ 使用心律調節器等植入體內的醫用電子儀器者，請勿使用。
- ▶ 患有惡性腫瘤、心臟病、嚴重高血壓等患者請謹慎使用。
(需正常人監護)

安全注意事項

注意事項2

- ▶ 體溫38度以上(發熱期)的人請勿使用。
- ▶ 產品有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- ▶ 使用時，頭部請稍微仰首，便於按摩器更好佩戴。
- ▶ 請勿私自拆卸產品內部組件，以避免導致商品故障的可能。
- ▶ 除了本公司指定的維修技術人員之外，絕對不得對產品進行分解和改裝、修理和改裝。如有問題請及時與喬山客服中心聯繫。
- ▶ 請勿使用額定電壓以外的電源，以免導致火災或損壞產品。
- ▶ 拔除電源線時，應握住電源線的插頭而非電線。
- ▶ 請勿損傷、損壞、過份彎曲、牽拉、扭轉、打結電源線。
- ▶ 充電器電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯繫喬山客服中心維修。
- ▶ 本電器不應提供給生理、感知或心智能力降低、或是經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用。
- ▶ 本電器報廢前請先取下鋰電池，請勿於電器運轉狀態下或充電中移除鋰電池，鋰電池應交由適當業者回收。
- ▶ 本電器僅適用 MP3 音樂格式之檔案。
- ▶ 請使用產品配套的充電器，如需更換請聯繫喬山客服中心。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	設備名稱 Equipment name						型號(型式) Type designation (Type)		Johnson C26																										
	鉛 Lead (Pb)						汞 Mercury (Hg)						鎘 Cadmium (Cd)						六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)						多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)						多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)				
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電路板	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
氣囊、氣管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
氣泵、電磁閥	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電源適配器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
內部電線	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺絲、轉軸、彈簧	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。
Note3: The "-" indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.

產品規格

產品名稱：TAK mE 帶著走·眼部舒摩器

產品型號：Johnson C26

額定電壓：5V ---

額定功率：5W

電源適配器型號：PS06H050K1000TU

電源適配器輸入：100-240 Vac, 50/60 Hz, 0.25 A

電源適配器輸出：5V ---, 1A

預定時間：15分鐘

安全設計：  R53481
RoHS

產品體積：約26.7X21.7X10公分

產品重量：毛重約1.4 公斤/ 淨重約0.35公斤

產品材質：外殼-塑膠、內裏-布質

製造產地：中國


委製/進口商：喬山健康科技(股)公司

地 址：台中市大雅區東大路二段999號

客服專線：0800-017360


部件名稱與功能

產品結構

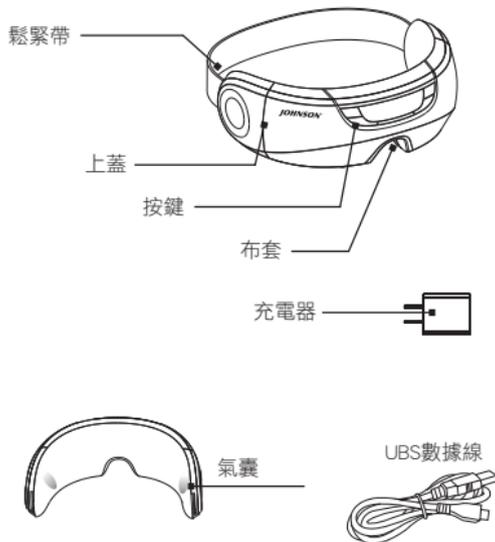

部件名稱與功能

控制面板

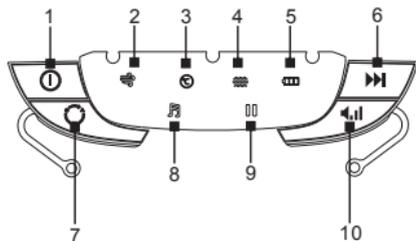

- | | |
|--------|---------|
| 1. 開關鍵 | 6. 音樂鍵 |
| 2. 氣壓燈 | 7. 模式鍵 |
| 3. 溫熱燈 | 8. 音樂燈 |
| 4. 震動燈 | 9. 暫停鍵 |
| 5. 電力燈 | 10. 音量鍵 |



注意

- ▶ 開機預設工作時間為15分鐘，時間到會自動關機，如需繼續使用再按開/關鍵即可。

保養與收藏

保養

- ▶ 產品如有髒污，請用乾的軟布進行擦拭。
- ▶ 如產品上特別髒，可用經過稀釋的酒精及棉布擦拭。



注意

- ▶ 禁止用水或腐蝕液體清洗本產品。當產品出現故障時應請轉維修人員修理，請勿自行拆卸產品。

收藏

- ▶ 使用後請將產品放置安全處，並用袋子套住放至包裝盒內。
- ▶ 請不要在產品上放置重物，避免產品防潮、防鼠、防汗措施。



注意

- ▶ 請勿將本產品暴露在高溫場所或熱源中。
- ▶ 請勿將此產品給兒童玩耍使用。

故障排除


現象	可能原因	處理方式
無法開機	開/關未開	開啟開/關
	電池電量用完	充電
	設定時間到	重新開啟開/關
無法充電	插頭未插好	插頭插好
指示燈亮度暗或閃爍	電池電量不足	請充電
氣壓強度太弱		

如還有其他異常現象，請與喬山客服中心聯繫，切勿自行拆卸。

使用方法

充電

- ▶ USB數據線插頭與充電器下方的插口相連接，然後再將DC插頭插入產品充電插孔內。
- ▶ 將充電器插頭插入100-240V 50/60Hz的電源插座上。
- ▶ 充電器電源接通後，充電指示燈一直閃爍。
- ▶ 電池充電需2-3小時充滿電，充滿後指示燈一直亮起。

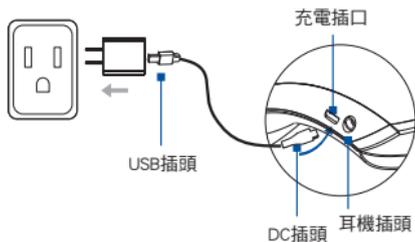

注意

- ▶ 充電過程中，產品不能工作。
- ▶ 請使用本機原廠的充電器。
- ▶ 電源線請勿擠壓，以免帶來損傷。

使用方法

操作方法

① 開關鍵

- ▶ 開關鍵：長按電源鍵2秒，關機。

⊗ 模式鍵

開機預設模式一：氣壓、溫熱開啟。(低頭族按摩)

短按一下切換模式二：氣壓、震動開啟。(學生族按摩)

短按一下切換模式三：氣壓、溫熱、震動開啟。(熬夜族按摩)

短按一下切換模式四：氣壓開啟。(養生族按摩)

短按一下切換模式五：溫熱開啟。(美目族按摩)

|| 音樂鍵

長按音樂鍵暫停播放音樂，短按切換下一曲。

|| 音量鍵

短按音量鍵切換音量，開機預設音量三，一共五段音量選擇。



注意

- ▶ 請將產品戴在眼睛上再開機，以免氣囊超壓損壞。
- ▶ 戴隱形眼鏡者與髮飾等頭部物品應取下後使用。