


好時光

按摩椅
Sweet Memories

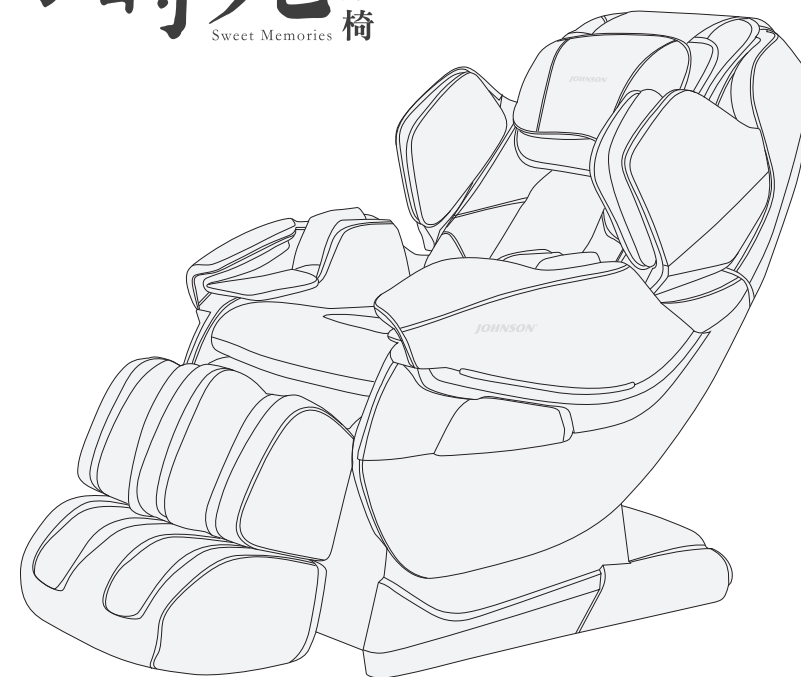

感謝您選購本產品，在您使用之前，請詳細閱讀此使用說明書，以便掌握本產品的正確使用方法，參閱時，請特別注意重要安全警告，同時妥善保管使用說明書，以備查閱。

備註:

本公司保留對產品的設計更改及解釋的權力，如有變動恕不另行通知，產品顏色以實物為準。

目錄

安全與保養事項	02
部件名稱與功能	04
功能	05
使用方法	06
產品規格與PU合成皮革的保養及清潔	13

安全與保養事項

1. 重要安全警告

- 勿使幼童接近此產品的可活動部分。
- 請使用接近此產品的良好接地電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 請按本手冊指示使用此產品。
- 不可使用未認可的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 請仔細參閱本操作手冊之後再開始使用。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其他用途。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 布套破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損情況下使用。
- 請勿以任何物品遮蓋此產品散熱孔時使用。
- 請勿以任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時，請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過度用力，以免受傷。

2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。

3. 不宜使用此產品者

- 骨質疏鬆症患者
- 具有心臟問題以及配戴電子醫療器如心律調節器者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或皮膚患病者。
- 無人監管時十四歲以下兒童及意識不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時禁止使用此產品。
- 本產品具有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。

4. 安全事項

- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。

安全與保養事項

- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使用水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉扯電源線。
- 切勿使電線受損或竄改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關，插頭等可帶電元件。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常，請立即停止使用，並致電客服人員。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常，請立即停止使用，並向保健醫生諮詢。
- 本產品不適合提供給身體、行動不方便或者缺乏經驗與常識的人士(包括兒童)使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員，關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由本公司的專業人員更換。


5. 產品保養和維修

- 本產品只能由本公司的服務人員維修，用戶不能自行拆卸或維修。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線收妥，並把此產品儲存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品儲存在高溫附近，勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品，不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 在不平整地面上勿使用此產品滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請間歇使用，不應使此產品長期連續運轉。

6. 常見現象處理

- 運行中發出機械聲:屬正常運作聲音。
- 控制器無法正常運作:檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止:額定時間到，此產品自動開啟關閉按鍵；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。

部件名稱與功能

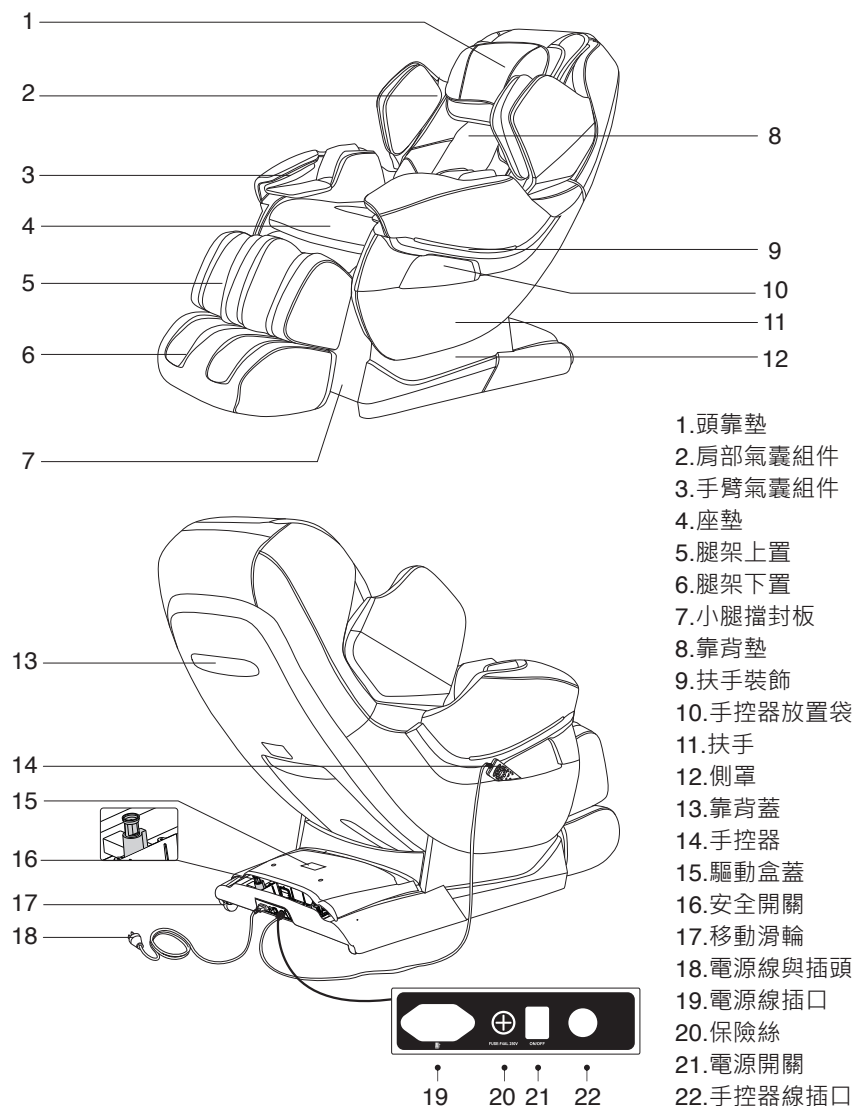

功能

功能

- 本產品設計了一組上下行走，四輪驅動，靜音設計的按摩輪。
- 設定指壓、揉捏、拍打、敲擊、揉捏拍打同步，五種仿真按摩手法。
- 設定肩部自動檢測定位。
- 設定特性自動按摩功能:體驗按摩、智能按摩、頸部指壓、舒適揉按、氣壓舒揉及全背按摩等六種自動模式。
- 設定手動按摩功能(全程、局部、定點三種按摩部位選擇，有指壓、揉拍、拍打、揉捏、敲擊五種同步按摩手法:各按摩手法速度均有三段可調整，在定點狀態下，可上、下位置調整功能；在拍打、指壓、敲擊按摩時，按摩椅的寬度有寬、中、窄三段選擇)。
- 氣壓按摩功能:全身氣壓、手臂氣壓(上手臂內置4個氣囊、手臂內置8個氣囊)腿部(內置16個氣囊)氣壓三種模式選擇，三段強度。
- 小腿底部設置足底滾輪按摩功能，兩對突點對腳趾根部旋轉按摩；對足弓和腳跟處突出滾輪按摩。
- 肩部設有寬度調節功能，分兩段調節(當到最裡一段時，向裡推手臂器約一個段位距離放開手，手臂器會自動復位，以此類推)，適應不同寬度的人使用。
- 背部熱敷功能:採用碳纖維熱源。
- 小腿架採用雙節無級伸縮調節功能，適應不同人身高使用。
- 靠背架下躺採用滑軌技術，使靠背離牆始終保持零空間，最大限度節約空間。
- 小腿架升降調節、靠背架升降調節及自動躺臥模式調節功能。
- L型靠背軌道貼合人體曲線，靠背下躺時呈現無重力狀態。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱 Equipment name		好時光按摩椅 Type designation(Type)					Johnson A382
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
電源線組	○	○	○	○	○	○	
開關組	○	○	○	○	○	○	
內部電路板組	○	○	○	○	○	○	
馬達組	○	○	○	○	○	○	
手控器組	○	○	○	○	○	○	
內配線組	○	○	○	○	○	○	
金屬組件	○	○	○	○	○	○	
塑膠組件	○	○	○	○	○	○	
氣泵	○	○	○	○	○	○	
氣閥	○	○	○	○	○	○	
輸氣軟管	○	○	○	○	○	○	
溫熱片組	○	○	○	○	○	○	
皮革/布套/發泡	○	○	○	○	○	○	

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.

使用方法


一,打開產品總電源



二, 開始按摩

- 1). 按下電源開關鍵，自動躺臥，啟動按摩。
- 2). 自動進行人體肩部位置和按摩指壓點檢測，等待檢測完成。
- 3). 如果檢測到的肩位置與實際肩位有偏差，可透過肩位置調整上、下鍵調整到合適位置。肩位置共10段。在10秒內無肩位置調整，則自動進入按摩功能。

按鍵	描述	顯示
▼肩位調整▲	向上調整按摩球位置，使其到達合適肩位置。	↑
	向下調整按摩球位置，使其到達合適肩位置。	↓

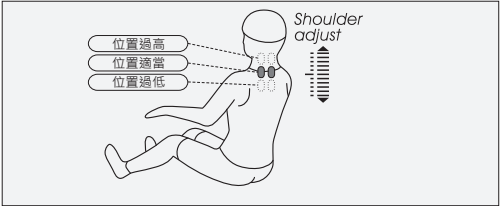

備註:手控器螢幕顯示，以實際為準。

使用方法

4). 選擇按摩功能，進行按摩。

· 自動按摩

功能	按鍵	按摩特點	顯示
自動按摩		體驗全部按摩功能	Auto F1
		深度頸部滑動按摩	Auto F2
		強力頸部按摩、上下快速行走指壓按摩	Auto F3
		舒適揉捏、刮痧按摩	Auto F0
		氣壓養生、刮痧按摩、腰部揉捏按摩	Auto F4
		獨特牽引按摩	Auto F5

· 手動按摩

功能	按鍵	按摩球的調整	顯示
手法:一鍵循環、揉捏、拍打、揉捏拍打、指壓、敲擊、停止。		揉捏:速度	
		拍打:速度、寬度	
		揉捏拍打:速度	
		指壓:速度、寬度	
		敲擊:速度、寬度	
速度		3段速度可調整	
寬度		3段寬度可調整	

使用方法

功能	按鍵	描述	顯示
背脊舒展		固定位置定點往返按摩	
		小範圍局部往返按摩	
		全程往返按摩	
		上半身往返按摩	
		下半身往返按摩	
		按摩位置調整(在定點、局部模式下，可調整按摩位置)	按摩輪向上 按摩輪向下

· 氣壓功能按摩

功能	按鍵	描述	顯示
氣壓模式		氣壓模式選擇(共3種模式:全身氣壓、手臂氣壓、腿部氣壓)	Arm Feet
強度		共三段可調整	Arm Feet

· 其他手動功能

功能	按鍵	描述	顯示
足底滾輪		足部滾輪按摩及速度調整，共三段速度可調整	
溫熱		背部熱敷，開啟3分鐘後有溫熱感	

· 其他手動功能


功能	按鍵	描述
腳部調整		小腿上升鍵，按住此鍵，小腿架緩緩上升，釋放則停止。
		小腿下降鍵，按住此鍵，小腿架緩緩下降，釋放則停止。
椅背調整		椅背上升鍵，按住此鍵，椅背緩緩上升，釋放則停止。
		椅背下降鍵，按住此鍵，椅背緩緩下降，釋放則停止。
零重力		每按一次鍵，切換一種躺臥模式，共三種模式，循環切換。

使用方法

三, 關閉電源·結束按摩



- 1). 在按摩過程中, 按下電源開關鍵, 立即關閉所有按摩功能, 椅背和腳墊復位。同時可儲存記憶功能, 按摩定時時間到, 立即關閉所有按摩功能, 同時可存儲記憶功能, 椅背和腳墊不復位。
- 2). 切斷整機電源。

附圖(整機電源切斷示意圖)


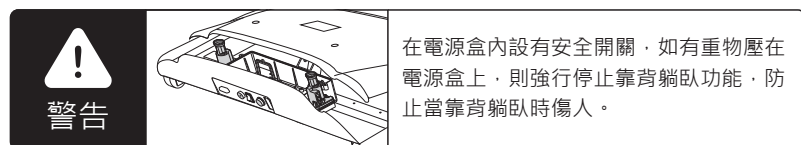


四, 小腿安裝說明

1. 先將轉動軸套裝在小腿固定軸上, 注意過孔要對齊, 以便R型銷拆裝(圖1)。
2. 將小腿的一端與固定軸對齊後插入(圖2)。

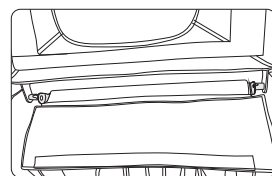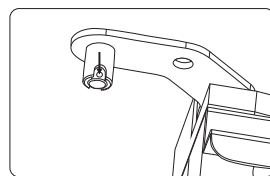



3. 插上R型銷, 再將小腿向另一邊移動, 並插上R型銷(圖3)。
4. 小腿安裝完成(圖4)。

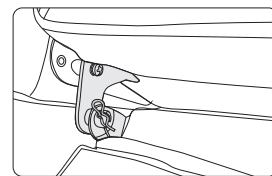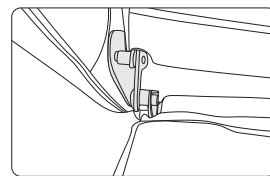

使用方法




注意

- 按摩椅躺倒小腿上升工作時, 不得對小腿施加重力, 防止按摩椅前倒對人造成傷害(圖1)。
- 在坐上按摩椅之前須確認按摩輪, 是否停留在坐墊位置, 以免人體重力下壓過程中對臀部造成不適(圖1)。

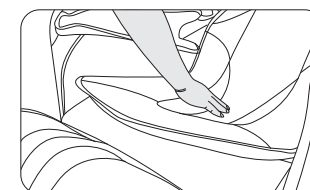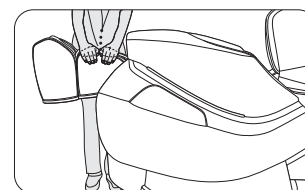


五, 頭靠墊、靠背墊的拆裝與使用

- 使用頭靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度, 可根據您的需要決定是否使用枕頭墊(推薦使用頭靠墊)。靠背墊與靠背通過拉鍊連結(1), 頭靠墊與靠背墊經由黏扣連結(2)。

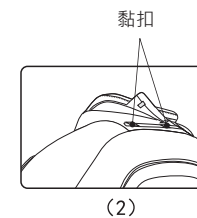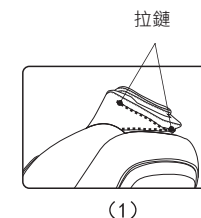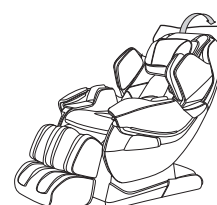

六, 雙頭靠墊及附加坐墊的使用


- 使用雙頭靠墊, 可以減少頸肩部按摩的力度, 可以根據您的需求決定是否使用。雙頭靠墊適合不同的人使用, 也可以自由選擇。
- 使用附加坐墊, 可以減少臀部按摩的力度, 可以根據您的需求決定是否使用。如果不需要, 可以拆掉。

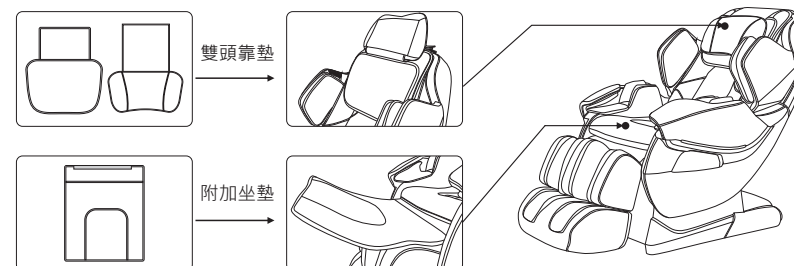

使用方法

七, 地板保護


按摩椅長時間的重壓，可能會造成地板刮痕，建議在其下方擺放地毯或專用墊，可避免這種情況。

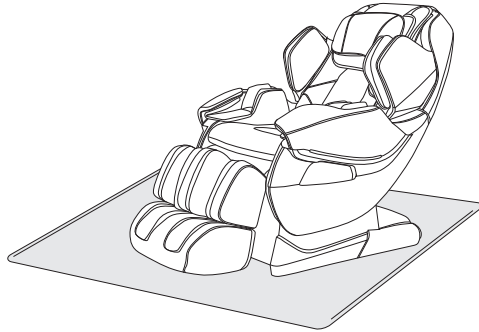

注意:在高低不平地面上及空間較小的地方，請勿使用滑輪移動本機，如要移動必須要兩人以上合作抬動，在抬動時以小腿擋封板及靠背蓋凹槽處為著力點(請勿直接抬動扶手)。

八, 移動方法

確定所有電線遠離地面後，靠背向後拉到一定角度(重心落在滑輪上時)，即可用手扶著按摩椅前後推動，之後將按摩椅輕扶放回正常角度。

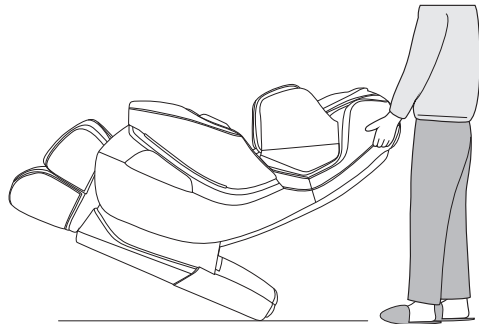

注意:在移動時務必先關閉電源開關，再拔掉電源線及手控器連接線。

產品規格

型號: Johnson A382
名稱: 好時光按摩椅 (Sweet Memories)
額定電壓: 110 VAC / 60 Hz
額定功率: 75 W
噪音: < 55dB
額定時間: 20分鐘
安全結構: Class I
材料說明: PVC、PA、鋼鐵以及電子元件

PU合成皮革的保養以及清潔

■ PU 合成皮革的清潔方法與注意事項：

- 1, 不可使用有機試劑和油脂溶液及化合物，特別是強溶劑。如酒精、松香水、去漬油等清潔PU表面，否則易腐蝕PU表面。
- 2, 不可使用洗衣粉擦洗PU表面，易產生裂紋。
- 3, 應選用中性，不污染環境的清潔劑清潔PU表面。
- 4, 對於污穢的PU表面，可以軟布沾蛋白擦拭污垢，避免用刷子清潔。

■ PU 合成皮革的保養方法與注意事項：

- 1, 要室內能通風，過於乾燥或潮濕都會加速皮革的老化
- 2, 皮革不要放在陽光能直射到的地方，也不要放在空調直接吹到的地方，否則會使皮面變硬，陽光直射會使有色的皮面褪色。
- 3, 夏季人體多汗，皮革的孔隙會吸收汗水，高溫潮濕會使汗中的有機物與皮革發生化學反應，易產生異味，對此要勤用帶微濕的柔布擦拭。
- 4, 在擦皮革時，不能用鹼性清洗液，因鹼性會使皮革柔軟性下降，長期使用會發生皺紋。

JOHNSON[®]

保 證 卡

JOHNSON[®]

安裝日期: _____ 年 月 日

機器型號: _____

機器序號: _____

保證期限

本產品自安裝日起整機保證二年，免費維修。

喬山健康科技股份有限公司

顧客注意事項

1. 本保證卡未加蓋公司章或填寫內容不完整者，視同失去保證效力(如提出原始發票或經銷商文件足以證明購買日期者，不在此限)。
2. 維修時請出示本保證卡。
3. 保證期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
4. 保證卡僅此一份，請妥善保存。
5. 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

保證期限內，因下列情況發生將收取相對費用

1. 產品由於用戶不當使用、保管與維修之故障。
2. 產品非經本公司授權維修人員檢修而自行拆修，改裝造成之故障。
3. 產品遭受雷電或火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素造成之損壞。
4. 不能提供保證卡或保證卡上所填寫機器型號、機器序號與待修產品機型、條碼不一致。
5. 保證卡擅自修改或填寫內容無法辨識者。
6. 產品外觀因使用造成污舊者。
7. 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務(含正確之操作使用說明)公司得收取基本交通工時服務費。
8. 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

經 銷 商 店 章：



喬山健康科技股份有限公司
台中市大雅區東大路二段999號
客服專線 0800-017360