

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染


JOHNSON®

喬山健康科技

TAK mE

TAKE MASSAGE EASY

帶著走·冰溫多感舒眼摩

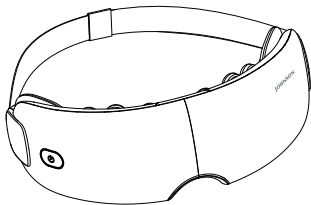

JOHNSON® 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw

TAK mE 帶著走·冰溫多感舒眼摩
TAKE MASSAGE EASY

使用產品前，請仔細閱讀使用手冊 並妥善保管此說明書
Please read the instructions carefully before use

Johnson C28 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS



注意事項

- 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- 維修時請出示本保證卡。
- 保證期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- 保固區域以台灣（不含外島及國外）地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- 產品外觀因使用造成污舊者。
- 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

- 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

感謝您

購買 **JOHNSON® TAK mE** 帶著走·冰溫多感舒眼摩，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目錄

● 安全注意事項	1
● 部件名稱與功能	3
產品結構	3
控制面板	4
● 使用方法	5
充電	6
● 保養與收藏	7
● 故障排除	7
● 產品規格 / 產品零部件回收說明	8
● 限用物質含有情況標示聲明書	9
● 低功率電波輻射性電機管理辦法	9
● 產品保固卡	10

備註: 本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通告，產品顏色以實物為準。

安全注意事項

注意事項1

- ▶ 兒童或殘障人士需要在特別監護下才能使用本產品。
- ▶ 使用過程中，身體出現或感到異常時，請立即停止使用，並諮詢醫生。
- ▶ 若本產品、充電器或充電線已經損壞，請勿使用。
- ▶ 充電前，請確保充電器及產品充電插孔處乾燥。
- ▶ 當產品或充電器嚴重浸入水中的情況下都不得充電使用。
- ▶ 請勿在使用本產品的同時使用其他醫療儀器。
- ▶ 請勿用於治療目的。
- ▶ 本產品僅限一人使用，請勿兩人或兩人以上同時使用。
- ▶ 請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
- ▶ 建議每次使用十五分鐘為宜。
- ▶ 請勿將產品在地面拖動，或拉住電源線移動產品，以免損壞產品。
- ▶ 有眼疾症狀者不能使用，曾做過眼部手術、青光眼、白內障、視網膜脫離等重大眼部疾病患者禁止使用。
- ▶ 眼部周圍有創傷的人，需安靜休養的人請勿使用。
- ▶ 使用心律調節器等植入體內的醫用電子儀器者請於諮詢醫師後使用。(需正常人監護)
- ▶ 患有惡性腫瘤、心臟病、嚴重高血壓等患者請於諮詢醫師後使用。(需正常人監護)

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條形碼：_____

經銷商蓋章

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Conditions of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name		型號(型式) Type designation(Type) Johnson C28					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBBs)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○	
電路板	○	○	○	○	○	○	
氣囊、氣管	○	○	○	○	○	○	
氣泵、電磁閥	—	○	○	○	○	○	
馬達	○	○	○	○	○	○	
喇叭	○	○	○	○	○	○	
內部電纜	○	○	○	○	○	○	
螺絲、轉軸、彈簧	○	○	○	○	○	○	

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.

備考3: "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note3: The "-" indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

NCC 警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全注意事項

注意事項2


- ▶ 體溫38度以上(發熱期)的人請勿使用。
- ▶ 使用時，頭部請稍微仰首，便於按摩器更好佩戴。
- ▶ 請勿私自拆卸產品內部組件，以避免導致商品故障的可能。
- ▶ 除了本公司指定的維修技術人員之外，絕對不得對產品進行分解、修理和改裝。如有問題請與喬山客服中心聯繫。
- ▶ 請勿使用額定電壓以外的電源，以免導致火災或損壞產品。
- ▶ 拔除電源線時，應握住電源線的插頭而非電線。
- ▶ 請勿損傷、損壞、過份彎曲、牽拉、扭轉、打結電源線。
- ▶ 充電器電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯繫喬山客服中心維修。
- ▶ 產品具有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- ▶ 本產品廢棄前，必須將電池從產品中取出，在取出電池時，產品必須要斷電，電池應安全地外置。
- ▶ 本電器不預期提供給生理、感知或心智能力降低、或是經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下使用，孩童應受監護以確保孩童不會嬉玩電器。

警告：請勿使用快充變壓器對電池充電。

備註：依據行政院環境保護署之法規-廢乾電池回收貯存清除處理方法及設施標準依廢棄物清理法第十八條第一項規定訂定之。
廢乾電池回收貯存清除處理方法及設施均須標準之規定，本標準未規定者，適用其他法令之規定。

部件名稱與功能

產品結構

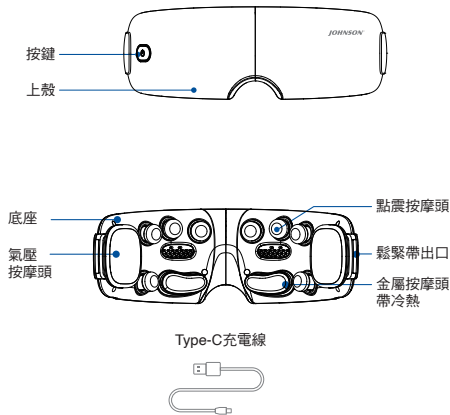

產品規格

產品名稱：TAK mE 帶著走·冰溫多感舒眼摩

產品型號：Johnson C28

額定電壓：5V ---

額定功率：5W

預定時間：15分鐘

安全設計：

產品體積：約20.7 X 7.3 X 7.8 公分

產品重量：約340公克

產品材質：塑料、矽膠、皮革

製造產地：中國

委製/進口商：喬山健康科技股份有限公司

客服專線：0800-017360

NCC編碼：CCAG24LP0030T2

備註：出廠不附電源供應器，需選擇合產品規格之電源供應器 (SELV 5V 1A) 使用。

產品零部件回收說明

回收提示性說明：為了保護環境，本產品或其中的部件報廢後，作為消費者的您有責任將其與生活垃圾分開，送至有資質的回收站點，由回收站點按照國家相關規定進行分類拆解、回收再利用等處理。

保養與收藏

保養

- ▶ 產品如有髒污，請用乾的軟布進行擦拭。
- ▶ 如產品上特別髒，可用經過稀釋的酒精及棉布擦拭。



注意

- ▶ 禁止用水或腐蝕液體清洗本產品。
- ▶ 當產品出現故障時應請維修人員修理，請勿自行拆卸產品。

收藏

- ▶ 使用後請將產品放置安全處，並用袋子套住放至包裝盒內。
- ▶ 請不要在產品上放置重物，避免產品防潮、防鼠、防汙措施。



注意

- ▶ 請勿將本產品暴露在高溫場所或熱源中。
- ▶ 請勿將此產品給兒童玩耍使用。

故障排除

現象	可能原因	處理方式
無法開機	開/關未開	開啟開/關
	電池電量用完	充電
	設定時間到	重新開啟開/關
無法充電	插頭未插好	插頭插好
指示燈亮度暗或閃爍	電池電量不足	請充電
點震強度太弱		


如還有其他異常現象，請與喬山客服中心聯繫，切勿自行拆卸。

部件名稱與功能

控制面板



開關鍵

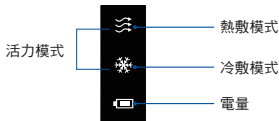

注意

- ▶ 開機默認工作時間為15分鐘，時間到會自動關機，如需繼續使用，再按開關/模式鍵即可。

使用方法


使用方法

- ①長按開關鍵產品開機，語音播報“歡迎使用智能冷熱眼部按摩器”
產品開機狀態下，短按開關鍵切換產品的模式，依次循環：熱敷模式 / 冷敷模式 / 活力模式
②雙擊開關鍵，開啟靜音模式，語音提示“靜音模式已開啟”
(本機音樂、藍牙音樂，當手動開啟藍牙音樂時，音樂可以打開)
再次雙擊關閉靜音模式，語音提示“靜音模式已關閉”
③開關鍵：短按：模式切換，依次為：
模式1：熱敷模式（震動+氣壓+熱敷），切換至該模式後，
將自動運行15分鐘。
模式2：冷敷模式（震動+氣壓+冰敷），切換至該模式後，
將自動運行6分鐘。
模式3：活力模式（震動+氣壓+冷熱交替），切換至該模式後，
將自動運行15分鐘。
2. 藍牙配對：同步打開產品和打開手機藍牙後，找到Johnson C28
裝置名稱點擊連接後，可以播放手機第三方音樂；藍牙連接一次後，
再次同步打開產品和手機藍牙，藍牙會自動連接。
關機：長按開關鍵2秒，語音播報“謝謝使用，再見”，電源鍵指示
燈關閉。
3. 模式指示燈白色
①產品開機默認熱敷模式，電量圖標，熱敷圖標亮白燈。
②切換冷敷模式，電量圖標，冷敷圖標亮白燈。
③切換活力模式，電量圖標，熱敷圖標，冷敷圖標亮白燈。

使用方法

充電

- ▶ 將產品旋轉至下圖角度，露出Type-C充電接口，然後再將
充電插頭插入產品充電孔內。
- ▶ 產品充電狀態下電量指示燈白色燈閃，充滿電後電量指示
燈亮指示白色常亮。
- ▶ 將電池充滿需約4小時，充滿後電量指示燈白燈常亮。
- ▶ 低電量提醒：當電量低於20%時，電量指示燈呈現白色燈
閃狀態，語音播報“電量不足，請充電”。
- ▶ 充滿電後約可使用120分鐘，（不開啟熱敷或冷敷模式）。

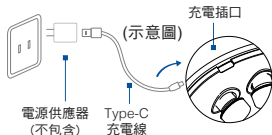

備註：電池充滿電及使用時間為實驗室數據，其實際使用時，
會因環境及電池充放電的次數而有所差異。



注意

- ▶ 充電過程中，產品不能使用。
- ▶ 請使用匹配5V1A的電源供應器，
勿使用快充變壓器。
- ▶ 電源線請勿擠壓，以免帶來損傷。



注意

- ▶ 請將產品戴在眼睛上再開機。
- ▶ 配戴隱形眼鏡者、髮飾等物品者，
應取下後再使用本產品。