

JOHNSON®

喬山健康科技

富士醫療器 最新 最高峰機型

CYBER RELAX JP-3000

日本製

按摩諮商師 · 大力推薦

RESEAT

FUJIIRYOKI 頂級按摩椅

CONDITIONING

按摩體驗選項

JP-3000操作手冊

首先介紹

按摩椅諮商師

按摩椅諮商師

中井唯仁



傳達按摩椅魅力的專家。

1999年加入富士醫療器，負責按摩椅相關諮詢和接待業務。

在按摩椅魅力的傳達和專業知識上有傑出的表現，對健康的社會有所貢獻；除了身體力行地進行產品知識介紹以外，也努力教育培育人才，培訓銷售員和培訓師超過370名。

另外，也以個人魅力和出色演講能力活躍在媒體新聞上，如朝日放送，BS電視，雜誌，周刊等等。

通過具體症狀或者個人喜好的強度來選擇

嘗試一下**自動程式**吧！！

按摩開始前的準備

01

打開電源

自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升



02

腳部調節 自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升

調節腳部位置




伸長/縮短按鍵調整腳部長度



03

傾躺角度調節

※傾躺角度越大按摩球刺激越強

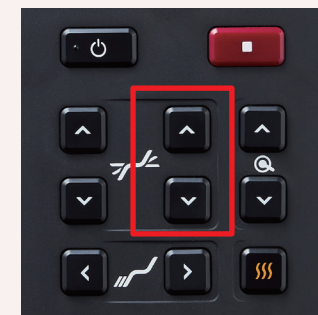

01

選擇「全身」、「頸・肩」、「腰部」中的任一程式



02

根據身體狀態從選項中選擇想要體驗的程式
按下按鈕即刻享受



03

可自由選擇按摩強度、氣壓強度及腳底滾輪指壓的強度



專業級體驗 推薦要點

自動程式有24種可供用戶選擇。※推送程式請至專屬APP下載

自動程式按摩強度是從強到弱排序；按摩強度、氣壓強度與腳底滾輪指壓強度在程式進行中也可調整。
請根據自身疲勞程度與狀況調整按摩強度。

為疲勞感、倦怠感及血氣不順而煩惱的人

嘗試一下**全身程式**吧！！

按摩開始前的準備

01

打開電源

自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升



02

腳部調節 自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升

調節腳部位置




伸長/縮短按鍵調整腳部長度



03

傾躺角度調節

※傾躺角度越大按摩球刺激越強

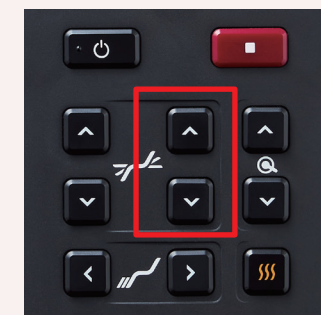

01

選擇全身程式



02

根據身體狀態從選項中選擇想要體驗的程式
按下按鈕即刻享受



03

可自由選擇按摩強度、氣壓強度及腳底滾輪指壓的強度



專業級體驗 推薦要點

若有全身疲勞、倦怠感與血氣不順者，請使用全身程式以恢復精神。
請根據自身狀況調整按摩強度。

為頸/肩部肌肉僵硬及後背痠痛而煩惱的人

嘗試一下**頸・肩**程式吧!!

按摩開始前的準備

01

打開電源

自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升



02

腳部調節 自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升

調節腳部位置



伸長/縮短按鍵調整腳部長度



03

傾躺角度調節

※傾躺角度越大按摩球刺激越強



01

選擇頸・肩程式



02

根據身體狀態從選項選擇想要體驗的程式
按下按鈕即刻享受



03

可自由選擇按摩強度、氣壓強度及腳底滾輪指壓的強度



專業級體驗 推薦要點

對於長期久坐辦公、烹飪、家務或洗衣服等作業而感到頸部・肩部・背脊的僵硬與痠痛者請使用頸・肩程式。
請根據自身狀況調整按摩強度。

為腰部肌肉僵硬、緊繃和痠痛而煩惱的人

嘗試一下**腰部程式**吧!!

按摩開始前的準備

01

打開電源

自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升



02

腳部調節 自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升

調節腳部位置




伸長/縮短按鍵調整腳部長度



03

傾躺角度調節

※傾躺角度越大按摩球刺激越強

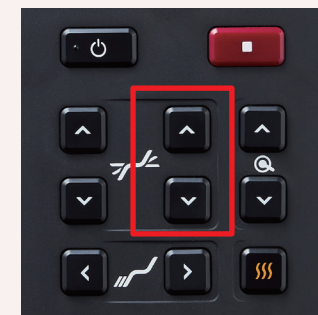

01

選擇腰部程式



02

根據身體狀態從選項中選擇想要體驗的程式
按下按鈕即刻享受



03

可自由選擇按摩強度、氣壓強度及腳底滾輪指壓的強度



專業級體驗 推薦要點

對於固定姿勢、站立工作、體力工作或半蹲姿勢導致的腰部肌肉僵硬、緊繃和痠痛者，請使用腰部程式。
請根據自身狀況調整按摩強度。

15 種類集中按摩放鬆疲勞部位

嘗試一下**部位集中技巧**吧!!

按摩開始前的準備

01

打開電源

自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升



02

腳部調節 自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升

調節腳部位置




伸長/縮短按鍵調整腳部長度



03

傾躺角度調節

※傾躺角度越大按摩球刺激越強

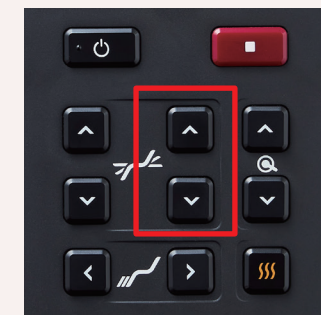

01

選擇部位集中



02

選擇您喜好的部位集中技巧

可從軀幹、背部、肩部、肩胛骨、腰部、坐骨、腳部、頸部伸展、腳部/膝關節伸展、弦月伸展中選擇



03

可自由選擇按摩強度、氣壓強度及腳底滾輪指壓的強度



專業級體驗 推薦要點

集中按摩放鬆特定部位的7分鐘迷你程式。
針對疲勞堆積的部位和肌肉僵硬的部位有效的按摩放鬆。
分部位拉伸身體肌肉伸展選項也十分有效。

根據使用當天的身體狀態

嘗試一下**53種類**的豐富揉捏按摩技巧吧！！

按摩開始前的準備

01

打開電源

自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升



02

腳部調節 自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升

調節腳部位置



伸長/縮短按鍵調整腳部長度



03

傾躺角度調節

※傾躺角度越大按摩球刺激越強



01

按下手動選擇



02

從中選擇各式按摩、捶打、小圈捶揉、強力捶揉、指壓、揉捏等技巧，更加緩慢、深入地按進並放鬆肌肉



03

依選擇的技巧，可自由調整按摩強度、氣壓強度或腳底滾輪指壓的強度



專業級體驗 推薦要點

準備了53種靈活運用雙按摩球機芯獨有的「力道」、「技巧」的部位集中揉捏按摩技巧。按摩、捶打、小圈捶揉、強力捶揉、指壓、揉捏等充足的揉捏按摩技巧一定能讓您感到滿足。

全新搭載的技巧：深按向上滑推、深按向下滑推、強力捶揉、輕柔按摩、舒緩捶打揉捏、捶打拉伸揉捏、頸椎緩慢推揉、肩上海壓。

強烈推薦!!

弦月伸展

按摩開始前的準備

01

打開電源

自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升



02

腳部調節 自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升

調節腳部位置




伸長/縮短按鍵調整腳部長度



03

傾躺角度調節

※伸展時推薦將傾躺角度調至最大

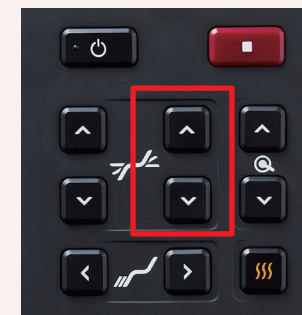

01

選擇部位集中



02

選擇弦月伸展



03

可自由調整氣壓強度



專業級體驗 推薦要點

為了更有效的按摩，我們向您推薦弦月伸展。
對於久坐辦公、駝背與肩膀前扣煩惱者，請使用弦月伸展程式。
上半身緩慢後仰、拉伸能有效舒緩全身僵硬肌肉。

作為按摩的收尾

強烈推薦!! 部位集中伸展技巧

按摩開始前的準備

01

打開電源

自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升



02

腳部調節 自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升

調節腳部位置




伸長/縮短按鍵調整腳部長度



03

傾躺角度調節

※ 伸展時推薦將傾躺角度調至最大

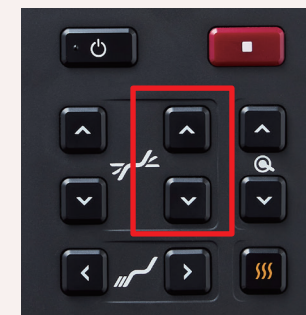

01

選擇部位集中



02

選擇您喜好的伸展技巧，可從頸部伸展、背部伸展、腰部伸展、肩部伸展、腳部/膝關節伸展、弦月伸展中選擇



03

依選擇的技巧，可自由調整按摩強度、氣壓強度或腳底滾輪指壓的強度



專業級體驗 推薦要點

部位集中伸展技巧最為適合作為按摩的收尾。
藉由拉伸、揉開肌肉技巧使您更加神清氣爽。

調整全身護理程式、療癒心靈專注力程式

按摩開始前的準備

01

打開電源

自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升



02

腳部調節 自動向後傾躺至待機位置，腳部擡升

調節腳部位置



伸長/縮短按鍵調整腳部長度



03

傾躺角度調節

※傾躺角度越大按摩球刺激越強



01

選擇30分鐘專業程式



獨創

02

選擇調整全身的「護理程式」或以冥想為概念的「專注力程式」



03

可以自由選擇按摩強度及氣壓強度

※專注力程式僅能調整氣壓強度



專業級體驗 推薦要點

護理程式是為了能帶給您充滿活力、熠熠生輝般的度過每一天而設計的程式，藉由此程式調整身體至最佳狀態。
專注力程式以「冥想」為概念，是為了療癒心靈並使您感到放鬆而製作的程式。

FUJIIRYŌKI

SINCE 1954 JAPAN

世界首創！
量產型按摩椅

獲認定為機械遺產！

※2014年8月7日認定

按摩椅的世界先驅。我們的技術從1954年以來歷經時間不斷進化。

機械遺產第68號・富士自動按摩椅

世界第一台量產按摩椅・1954年製造

規格

尺寸：W710×L870×H1300 mm

重量：約 64kg

程式：揉捏

外觀材料：木製

按摩球材質：橡膠

從公共澡堂或溫泉旅館起推廣按摩椅，而後被廣泛應用於家庭，繼續照顧人民群眾的身體健康。這台創業號是起源點。

機械遺產

1954年，全球首款量產型按摩椅在大阪誕生。

2014年，這台富士自動按摩機器獲日本機械學會認定為 [機械遺產] 之一。

日本機械學會作為給下一代傳達為目的，保存珍貴歷史性機械技術遺產，並將其視為文化遺產。

而日本國內機械技術領域中，歷史上的意義被認定為機械遺產。

目前業界中，聲明為首座量產型按摩椅品牌僅 **FUJIIRYŌKI** 獲得實質第三方認證，以此為證。



開關



內部構造



機械遺產認定證

RESEAT

FUJIIRYŌKI 頂級按摩椅

CONDITIONING

サイバーリラックス

CYBER-RELAX JP-3000



黑色(BG)



咖啡色(SB)



白色(WH)

規格

- 本體尺寸 (約) :
收起腳機時：寬 86 × 深 141 × 高 124cm
腳部最大使用時、傾躺時：寬 86 × 深 212 × 高 73cm
含遙控器本體寬度：約 90cm
- 組合前最小寬度 (約)：70cm
- 傾躺角度 (約)：117~164 度
- 重量 (約)：96kg

- 電源：AC110V (50/60Hz)
- 消耗功率：90W
- 連續使用時間：30 分鐘 (自動定時器約 7/18/30 分鐘)
- 日本醫療機器認證號碼：304ABBZX00024000
(家庭用電氣按摩器、管理醫療機器)
- 安檢合格認證號碼：R53481 本商品通過經濟部標檢局—
安全檢驗合格認證

RESEAT

FUJIIRYOKI 頂級按摩椅


CONDITIONING

サイバーリラックス


CYBER-RELAX JP-3000

搬移・安裝

- 本體搬移寬度
需要最小寬度（約）70cm+6cm 以上
保證正常搬入。
- 安裝
需空出可以讓椅背傾躺的空間，安裝
在水平地面。腿部方向需空出 30cm
以上，頭部方向需要空出 50cm 以上。

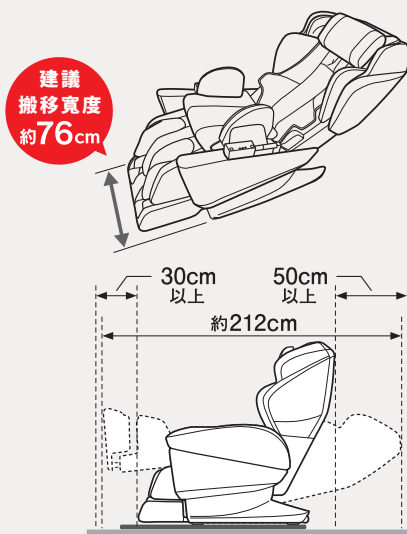

尺寸圖 (cm)

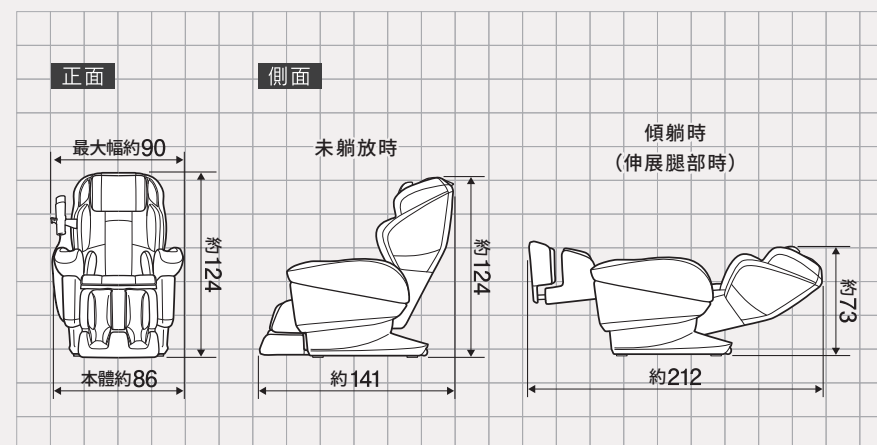

日本官網 <http://www.fujiiryoki.co.jp/>



安全注意事項

使用前請詳閱「使用說明書」，並正確使用。

- 有以下情況者請勿使用，否則可能導致身體異常。
 - 醫生禁止按摩者（例：血栓、重度動脈瘤、急性靜脈瘤、各種皮膚炎及皮膚感染〔含皮下組織炎症〕）。
- 有以下情況者，請務必諮詢醫生後使用，否則可能導致身體異常。
 - 使用心律調節器等易受電磁波影響的體內植入型醫療電子儀器
 - 有惡性腫瘤
 - 有心臟疾病
 - 懷孕中或剛生產
 - 因糖尿病等引起高度末梢循環障礙而導致知覺障礙
 - 皮膚有創傷
 - 需保持身心安靜
 - 體溫38℃以上（發燒）（例如：急性炎症〔倦怠感、寒顫、血壓變化等〕症狀強烈時期。身體虛弱時。）
 - 患有骨質疏鬆症、脊椎骨折、急性（疼痛性）疾病
 - 背骨（脊椎）異常，

或脊椎左右側彎 ●扭傷、拉傷等發炎症狀 ●椎間盤突出症 ●被認定喪失溫度感覺 ●其他身體出現特別異狀，或是在醫療機構治療中。

■請勿讓兒童獨自使用，或讓無法自行表達意志的人使用，此外也請勿讓幼兒接近。



懷孕中或剛生產者，請和醫生討論後再使用。

使用前注意事項

- ◎本商品附保證書。保證書是在通路銷售用印後開始有效。請確認記載內容並確實保管。
- ◎本商品保證僅限台灣區內有效。◎遙控座僅可設置於一側。

RESEAT

FUJIIRYŌKI 頂級按摩椅

CONDITIONING



美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

JOHNSON 喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360
www.johnsonfitness.com.tw
428 台中市大雅區東大路二段999號