

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染

JOHNSON®

喬山健康科技

TAK mE

TAKE MESSAGE EASY

帶著走·手持舒摩器



輕輕一按·輕鬆享受·身心怡然

JOHNSON®

喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360

www.johnsonfitness.com.tw

TAK mE 帶著走·手持舒摩器
TAKE MESSAGE EASY

Johnson C56 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

注意事項

- 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- 維修時請出示本保證卡。
- 保證期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- 保固區域以台灣（不含外島及國外）地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- 產品外觀因使用造成污善者。
- 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

- 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

感謝您購買 **JOHNSON® TAK mE** 帶著走・手持舒摩器，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目錄

● 重要安全警告	2
● 產品名稱	4
● 使用方式	5
● 操作說明	6
● 清潔保養	8
● 故障排除	8
● 產品規格	9
● 限用物質含有情況標示聲明書	10
● 產品保固卡	11

備註：本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通，產品顏色以實物為準。

重要安全警告

1、安全警告

· 本產品不打算提供給無法自主或未成年使用時必須有正常人監護下再使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導，兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。

- 請按本說明書指示使用此產品。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可用強力。
- 切勿使電線受損或竄改此器具電路。
- 如果充電時發生停電應該將充電的電源變壓器撥離電源插座。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 使用此商品時請勿過分用力，以免受傷。
- 飯後一小時內請勿使用本產品。
- 如果在使用中感到任何此產品異常請立即停止使用，並向當地購買之經銷商或與喬山客服中心諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向保健醫生諮詢。
- 如果電源變壓器發生任何損壞或功能異常，為了避免危險，必須由本公司指定的維修技術專業人員更換。

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條形碼：_____

經銷商蓋章：

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱 Equipment name		TAK mE帶著走・手持舒摩器				型號(型式) Type designation(Type)		Johnson CS6
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols							
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)		
震動馬達組	○	○	○	○	○	○	○	
電路板組	○	○	○	○	○	○	○	
鋰電池組	○	○	○	○	○	○	○	
電源適配器	○	○	○	○	○	○	○	
電源線、內配線	○	○	○	○	○	○	○	
螺絲	○	○	○	○	○	○	○	
塑(橡)膠件組	○	○	○	○	○	○	○	
備考1: “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence. 備考3: “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.								

重要安全警告

2、使用環境


- 請勿在室溫高於40℃的環境下使用本產品。
- 請勿在潮濕或過多灰塵的環境下使用產品，以免觸電或機器故障。
- 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- 請勿將產品放置於戶外或在戶外使用。
- 請將產品放置在平坦的地方使用。
- 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。

3、不適宜使用本產品的人士

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 使用心律調節器等植入體內的醫用電子儀器者。
- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。
(需正常人監護)
- 孕婦或正處於經期者。
- 骨質疏鬆正、脊椎骨折患者。
- 皮膚有創傷的人、需安靜修養的人。
- 體溫38度以上(發熱期)的人。
- 產品加熱，對熱不敏感的的人使用時必須注意。(需正常人監護)
- 無法自主或未成年使用時必須有正常人監護下再使用。

產品名稱

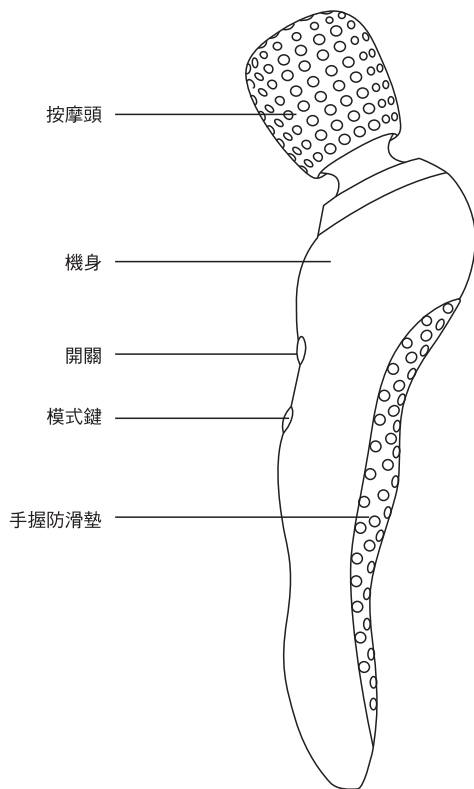

產品規格

產品型號：Johnson C56

產品名稱：TAK mE 帶著走·手持舒摩器

電源變壓器輸入：100-240Vac, 50/60Hz, 0.4A

電源變壓器輸出：5.0V===1.5A

電源適配器型號：FJ-SW1260501500UT

額定電壓：5V ===

額定功率：6W

額定時間：5分鐘

安全設計： R53758
RoHS

電池類型：高容量鋰離子電池

產品體積：約(長)27.1X(寬)8.9X(高)5.9 公分

產品重量：約0.35公斤

產品材質：按摩頭:矽膠

製造地區：中國

清潔保養

1.清潔方式

- 1.1 請用中性清潔劑清潔本產品，清潔後用柔軟的棉布擦拭乾淨即可。
- 1.2 不得使用任何鋼絲網、銅刷、尖銳器具、汽油、煤油等清潔本產品。

2.保養方式

- 2.1 通常不用時，請將產品放入包裝盒，置於乾燥、陰涼處。
- 2.2 請勿將本產品貯存於高溫或火源附近，以及太陽直射的地方，否則容易導致褪色和損壞。
- 2.3 避免在本產品及附件上使用苯、稀釋劑，或其它任何腐蝕性溶劑。

故障排除

故障現象	可能原因	處理方法
無法啟動	電池電量低。 產品處於旅行鎖模式。	充滿電後再使用。 按操作說明解除旅行鎖模式。
產品在工作 中自動停止	電池電已用完。 自動定時5分鐘已到。	充滿電後再繼續使用。 重新啟動。
產品工作時 發出嗡嗡聲	馬達運轉發出的 正常聲音。	

使用方式

溫馨提示

本產品配備一個專用的電源變壓器，通過連接產品充電插孔充電，請勿使用非原廠的變壓器進行充電，以免損壞產品。



功能特點

按摩手法：振動

按摩部位：頸部、背部、腰部及身體其它柔軟部位

特殊功能：無線便攜、超強振動、旅行鎖

自動定時：5分鐘

控制方式：智能控制



震動按摩



模式鍵



超級靜音



旅行鎖設計



環保鋰電



超長續航



小巧方便



親膚砂膠




超輕便攜



多部位按摩

使用方式


按鍵說明

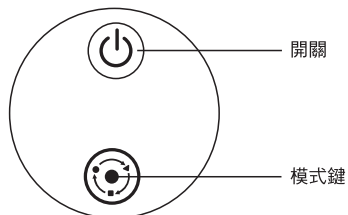

充電(若產品電量充足，則無需充電可直接使用)

將電源變壓器電源插頭插入市電插座，另一端插入本產品充電孔進行充電，此時指示燈亮紅色；充滿電後指示燈亮綠色，此時可將電源變壓器插頭撥離產品充電孔，按動電源開關即可使用本產品。

(備註：為安全起見，本產品在充電時，內部處於隔離狀態，不能使用)。

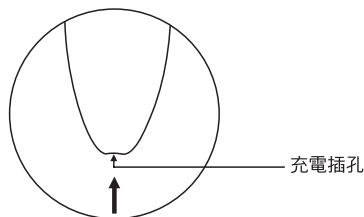

操作說明

溫馨提示：為防止使用者外出攜帶時，誤操作按鍵，造成產品誤動作或電池電量消耗，本產品特別增設了旅行鎖模式，該模式下所有按鍵操作均無效；解除旅行鎖模式後才能正常操作使用。

注：① 以下描述中，“短按”指快速按壓，“長按”指按壓時間大於3秒。

② 產品出廠時處於旅行鎖模式，使用前需進行解鎖，解鎖方法詳見3.2

1. 電源開關鍵



- 1.1 關機狀態下，短按指示燈亮藍色，進入低速運行模式；
- 1.2 開機狀態下，短按指示燈滅，關機。

2. 模式鍵

- 2.1 開機狀態下，短按，指示燈閃爍後亮藍色，切換各種不同的運行模式，共有5種運行模式可供循環切換，不同的模式見下表。

3. 電源開關鍵 和模式鍵 同時按下。

- 3.1 關機狀態下，長按，指示燈閃一下、振動一下，進入旅行鎖模式。
- 3.2 旅行鎖模式下，長按，指示燈閃一下、振動一下，解除旅行鎖模式。

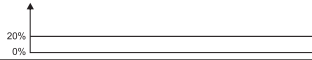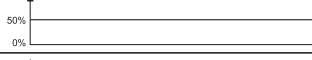工作模式	速度波形示意圖
模式1	
模式2	
模式3	
模式4	
模式5	