

好FUN鬆
全身上下・一按就鬆
手持按摩器




喬山健康科技股份有限公司
428 台中市大雅區東大路二段999號
電話: (04) 2566-7100
傳真: (04) 2566-3974
消費者免付費電話: 0800017360
<http://www.johnsonfitness.com.tw>

本公司保留對產品及說明書修改之權利，如有改動恕不另行通知。

JOHNSON®

好FUN鬆
全身上下・一按就鬆
手持按摩器

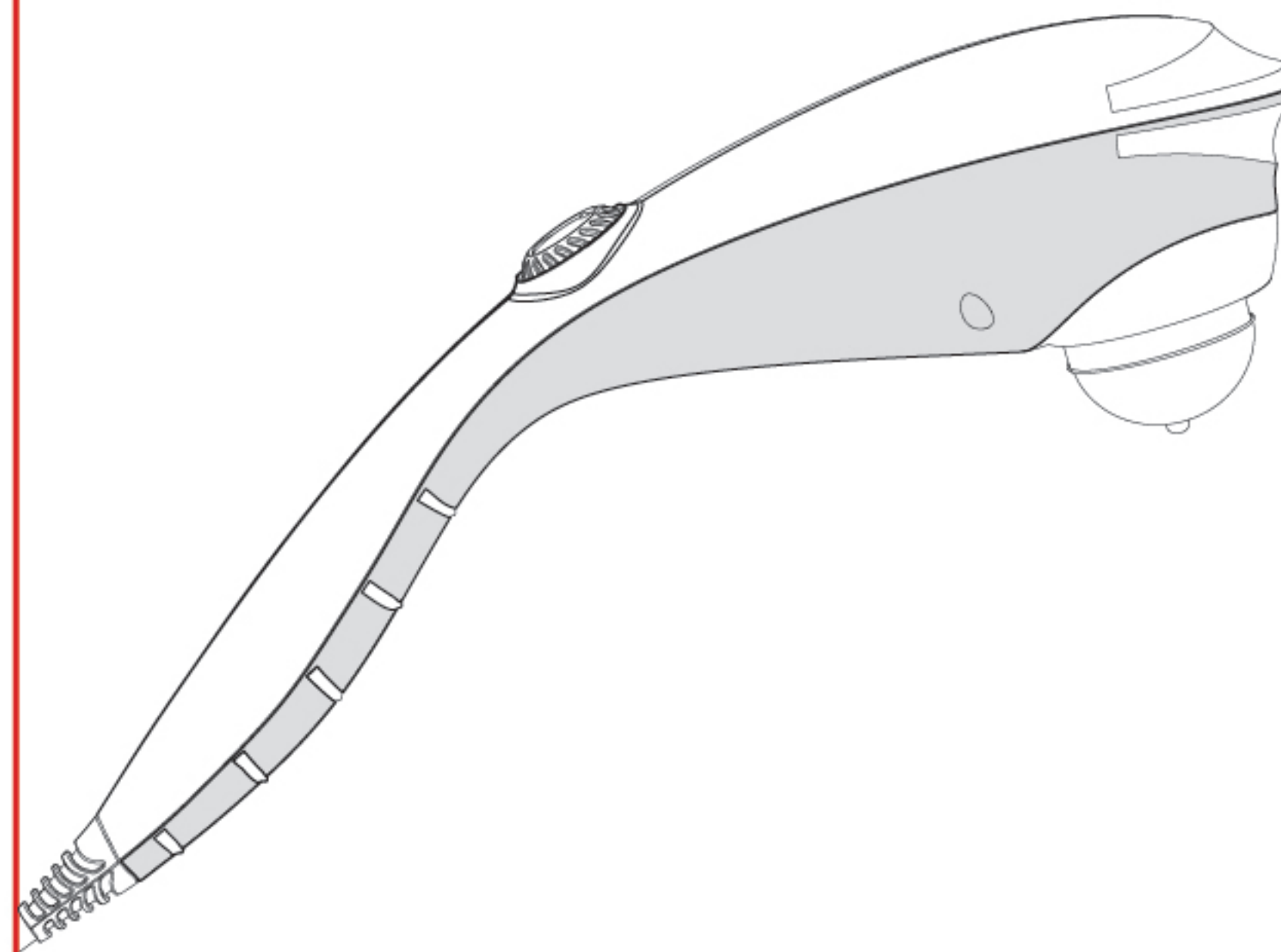

HM160
使用說明書

目 錄

● 安全注意事項	2-4
使用環境	
不適宜使用本產品的人士	
開關注意事項	
應停止使用產品的狀況	
關於電源插頭和電源線	
● 機件名稱 (外觀結構)	5
● 使用方法	6
● 使用部位示範	6
● 產品清潔 / 保養	7
● 產品組裝 / 維修	7
● 常見問題 / 處理方式	8
● 產品規格	8

感謝您購買 **JOHNSON®** HM160 手持按摩器，建議在使用前請仔細閱讀本操作手冊，以便正確操作和使用本產品。本手冊提供使用者安全及有效操作方式，尤其注意「安全注意事項」，操作手冊請在閱畢後妥為收藏，以便日後查詢使用。

注意

- ▶ 請勿在進食前後1小時使用本產品。
- ▶ 請勿在產品使用時入睡。
- ▶ 請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
- ▶ 建議每次使用時限為15分鐘，每天不超過30分鐘。
- ▶ 請勿將任何物品或易燃物品插入本產品內，這可能導致觸電、故障或是引發火患。
- ▶ 孩童、行動遲緩、身心功能或智能障礙者欲使用本產品，必須要有人在旁指導且能負責其安全。
- ▶ 請務必督導及確認孩童未將產品是為遊樂器材使用，以確保其安全。

安全注意事項

1、使用環境

- * 請勿在潮濕或過多灰塵的環境中使用產品，以免產品發生故障。
- * 請勿在室溫高於40° C的環境下使用本產品。
- * 若是在偏低室溫中使用，或由低溫處移至溫暖的環境中使用時，可能會因為機件內水氣聚集而影響機器正常運作，甚至造成機件故障。建議先放置於正常室溫一小時後再開始使用。
- * 請勿在使用噴霧產品或充滿氧氣的場所操作本產品。
- * 請勿將產品放置於戶外、電熱器旁、爐具附近、或陽光直射處。

2、不適宜使用本產品的人士

如果您有以下情形，使用前請先諮詢醫生：

- * 正在接受醫生治療者或身體感覺不適者。
- * 高血壓、心臟病、腦動脈硬化、腦血栓患者。
- * 惡性腫瘤患者。
- * 孕婦或正處於經期者。
- * 骨質疏鬆症患者。
- * 使用心臟起搏器等植入體內的醫療電子儀器者。
- * 患有急性疾病者。
- * 未成年人。

安全注意事項

3、開關注意事項

- * 雙手或身體潮濕時，請勿操作或使用本產品。
- * 切勿使控制開關接觸到水等類似液體。

4、應停止使用產品的狀況

下列情形應立即停止使用產品，並將電源插頭拔離插座：


- * 意外將水濺到產品或控制開關上時。
- * 相關配件破損或內部機件暴露出來。
- * 在按摩期間感受到異常或嚴重的疼痛。
- * 在产品運作時發現任何異常的狀況如：冒煙、異味等。
- * 突然斷電時。
- * 雷電發生時。

5、關於電源插頭和電源線

- * 請檢查電壓確實符合產品規格需求，本產品僅使用交流電(AC)。
- * 雙手潮濕時切勿安插或拔除電源插頭。
- * 拔除電源插頭時，請握住插頭本身，切勿拉扯電源線。
- * 請勿將電源線置於任何物體之下；請勿將電線纏繞於物體之上，以免電源線受損。
- * 電源線損壞或電源插座有鬆脫的狀況時，請勿使用本產品。
- * 電源線損壞時，必須由維修中心專職人員更換。

機件名稱 (外觀結構)

- ① 電源開關
- ② 按摩頭
- ③ 電源線

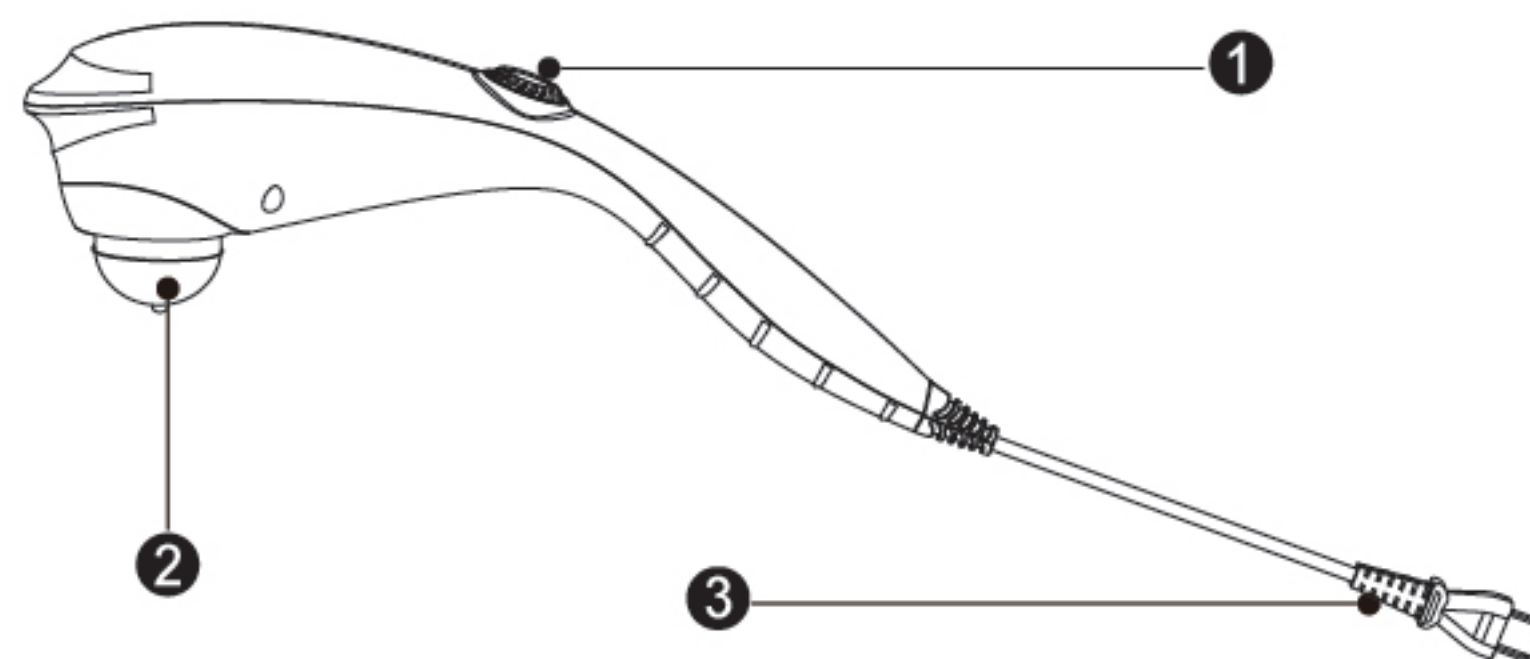

● 4 種按摩頭





使用方法

⚠ 注意

- ▶ 本產品每次建議使用時間為15分鐘，每天使用不超過30分鐘。

- * 由左至右旋轉電源開關，啟動並依照個人需求調整強弱。
(由左至右漸強；由右至左漸弱)。

使用部位示範

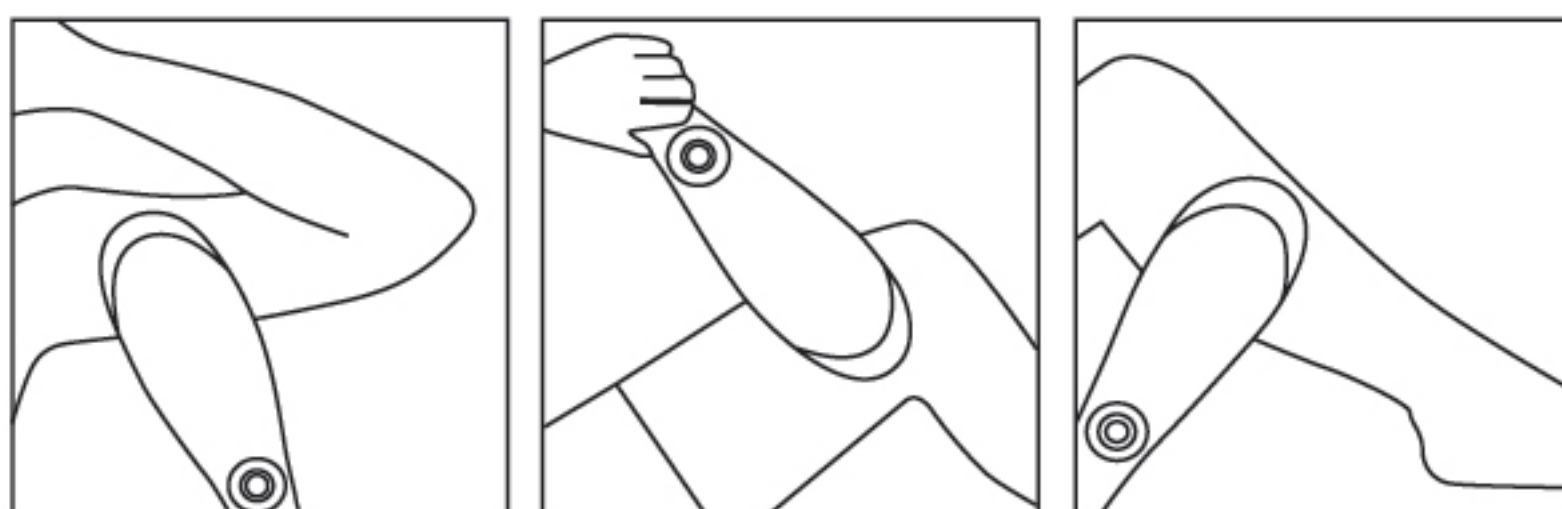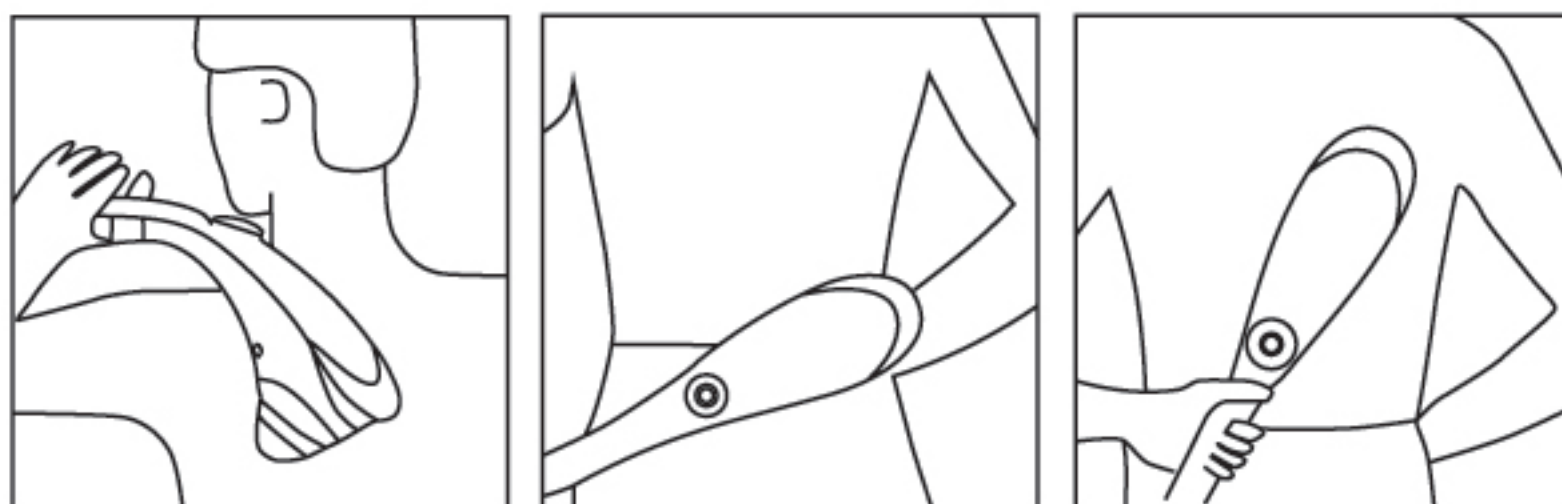

產品清潔 / 保養

1、清潔

- * 清潔之前，請確認開關已經關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- * 請使用乾布清潔產品表面。

2、保養

- * 確認開關關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- * 保持產品清潔並遠離高濕度的場所。
- * 如果長時間不使用本產品，請用防塵罩（請自行購買）套住產品，防止灰塵落入。

⚠ 注意

- ▶ 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色。
- ▶ 請勿使用溼布擦拭電源開關，以免導致機器故障。

產品組裝/ 維修

- * 請勿嘗試自行拆卸或維修本產品。碰觸內部機件可能導致產品故障或觸電意外。
- * 請務必依照使用手冊中所敘述的用途使用本產品；請勿使用非製造商所推薦之零配件。
- * 本產品僅能由本公司授權之專業維修單位或人員進行維修。
- * 下列狀況發生時，切勿使用本產品：
電源線或電源插頭損壞、操作不正常、曾掉落地面損傷、曾掉落水中。
- * 如有上述情形，請將產品送回維修中心進行檢查或維修。

常見問題 / 處理方式

常見問題 / 處理方式

使用本產品時，如遇以下問題，請參考下列提示及可能解決方式。惟持續故障無法使用，請拔除插頭，並和維修及服務中心聯絡，謝謝。

狀 況	可能原因 & 處理方式
無法啟動產品	★ 請檢查電源插頭是否正確插入插座。 ★ 請確認開啟插座電源。
按摩進行中忽然停止	★ 請檢查電源插頭是否被拔離，或電源轉接頭處脫落。 ★ 請確認是否不小心壓到控制面板上的按鈕。 ★ 產品按摩過久，啟動過熱自動保護裝置，請關閉產品主電源至少1小時，等待機器降溫。 ★ 如問題無法解決，請與維修服務中心聯絡。

產品規格

型 號：HM160

輸入電壓：AC 110V，60Hz

額定功率：15 W

商檢字號： 