

說明

- 本公司保留對產品及說明書修改的權利，如有異動恕不另行通知，產品外觀以實物為準。
- 本冊內容上的說明，本公司保留解釋權。

♻️ 廢棄物不當處置會造成對環境的污染


JOHNSON®

喬山健康科技

TAK mE

TAKE MESSAGE EASY

帶著走·膝蓋舒摩器

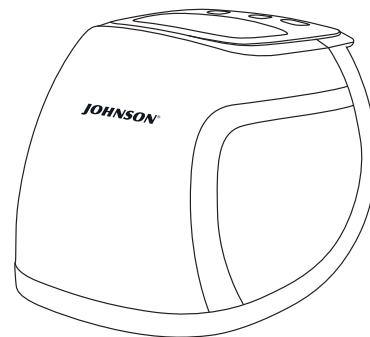

JOHNSON®

喬山健康科技

Customer Care Line at 0800-017360

www.johnsonfitness.com.tw

TAK mE 帶著走·膝蓋舒摩器
TAKE MESSAGE EASY

Johnson SL-C36 使用手冊
OPERATION INSTRUCTIONS

感謝您購買 **JOHNSON®** TAK mE 帶著走・膝蓋舒摩器，建議使用前請詳細閱讀本使用說明書，以便正確操作和使用本產品，本使用說明書提供使用者安全及有效的操作方式並請特別注意安全警告；使用說明書請在閱畢後妥善收藏，以便日後查閱使用。

目錄

● 安全與保養事項	2
● 產品名稱	4
● 功能	5
● 使用方法	6
● 產品規格	9
● 產品保固卡	10

備註：本公司保留對產品的設計更改以及解釋的權力，如有更動恕不另行通，產品顏色以實物為準。

重要安全警告



1、安全警告

- 本商品不提供給身體有無法自主、或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該器具的監督與指導，兒童必須被監督以確保他們不會拿器具來玩耍。

- 請按本說明書指示使用此商品。
- 請使用與此商品匹配的電源，請勿在此商品外殼或電源線破損情況下使用。
- 禁止將雜物塞入殼體間隙處。
- 禁止將液體潑向本產品，以免短路引起事故。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭 以免造成設備或人身損害。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 插拔電源插頭時切勿拉扯電源線，不可用強力。
- 切勿使電線受損或竄改此器具電路。
- 如果發生停電應該離開此商品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 使用此商品時請勿過分用力，以免受傷。
- 如果在使用中感到任何此商品異常請立即停止使用，並向本公司客服中心諮詢。
- 如果您在使用此商品期間感到身體異常請立即停止使用，並向保健醫生諮詢。

2、使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此商品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此商品。
- 請勿在飛塵嚴重或有腐蝕性氣體環境中使用此商品。

注意事項

- * 本保證卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- * 維修時請出示本保證卡。
- * 保證期限內，請聯絡本公司之客服中心檢修。
- * 保證卡僅此一份，請妥善保存。
- * 保固區域以台灣（不含外島及國外）地區為準。

保證期間內因下列情況發生將收取相對費用

- * 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- * 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- * 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害等其他外部因素所造成之損害。
- * 不能提供保證卡或保證卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- * 產品外觀因使用造成污舊者。
- * 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等費用。
- * 使用於營業地點或公共場所（非家用）之商品。

保證期限

- * 本產品自購買日起，保固一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，周邊配件及耗材除外。

JOHNSON® 產品保固卡

【請妥善保管，遺失或損毀均不再補發】

購買日期：_____

機器型號：_____

條形碼：_____

經銷商蓋章：

重要安全警告



3、不適宜使用本產品的人士

如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 懷孕或經期婦女。
- 皮膚傳染病者。
- 骨質疏鬆症患者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 身體有創傷或體表患病者。
- 無人監管時，14歲以下兒童及神智不清者，禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 身體潮濕時，禁止使用此器具。
- 器具有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- 醉酒或感覺不適時，請勿使用此器具。
- 近期內動過手術者，請遵照醫師指示使用。
- 膝蓋出現急性浮腫或出血的患者面，請事先諮詢醫生後使用。
- 類風濕性關節炎患者面，請事先諮詢醫生後使用。
- 疑似為急性外傷引起的浮腫，細菌感染面，其他特殊炎症的患者請先諮詢醫生後使用。
- 使用產品後出現疼痛加劇時，請立即停止使用。
- 使用產品時，請勿將產品直接與皮膚接觸，避免加熱功能過熱灼傷皮膚。



4、鋰電池警告

- 這個設備包含固定的鋰電池。電池必須回收利用或者得到正確處理。

注意：

- 電量過低時需要及時充電，避免過度放電。
- 長時間不用應該每隔一個月充一次電，避免電池老化。

產品名稱

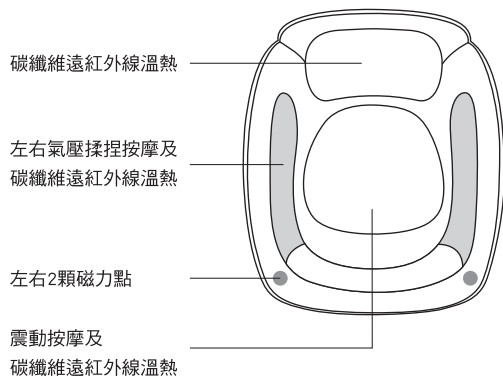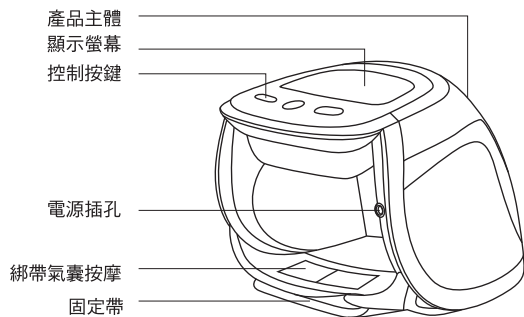

產品規格

產品型號：Johnson SL-C36

產品名稱：TAK mE 帶著走·膝蓋舒摩器

額定電壓：5V ===

額定功率：5 W

額定時間：15分鐘

電池類型：高容量鋰離子電池

產品體積：約(長) 19.5 X(寬)17.5 X(高) 15公分

產品重量：約0.9公斤

產品材質：塑膠、布質

製造地區：中國

進口商：喬山健康科技股份有限公司台中分公司

地址：台中市大雅區東大路二段999號

電話：0800-017360

網址：www.johnsonfitness.com.tw

使用方法

四、產品保養

• 清潔

不要使用鋼絲球，研磨性清潔劑或腐蝕性液體（例如汽油或丙酮）來清潔產品，切勿將產品侵水中。

- 1.將產品從電源插座中拔下。
- 2.用乾布清潔控制板和電源線。
- 3.請勿使用清潔劑。

• 存放

- 1.將插頭從電源插座中拔下。
- 2.將本產品儲存在遠離日光照射的陰涼乾燥處。
- 3.請勿將重物放在本產品頂部。

• 更換

如果外殼損壞，請停止使用本產品，並向本公司之客戶服務中心詢問。

• 保修與服務

如果你需要有關產品的詳細信息或有任何問題，請與本公司之客服中心聯繫。

功能

- 工作顯示螢幕，清晰可見。
- 根據人機工程學原理設計，確保產品與膝蓋的完美貼合，對膝蓋進行舒適揉捏按摩，高頻震動按摩、溫熱按摩、磁力按摩。
- 外觀新穎、時尚、輕巧便攜。
- 內置天然磁石，快速舒緩膝蓋疼痛感。
- 整機採用全氣囊式設計，對人體膝蓋部位有效的揉捏按摩，刺激您的膝蓋部反射穴位。
- 揉捏按摩，給您最放鬆和倍感活力的按摩體驗。
- 設有溫熱功能採用碳纖維遠紅外熱源，具有溫熱效果。
- 設有每按一次功能按鍵時，蜂鳴器響鳴都有提示功能。
- 在按摩進行15分鐘後，將自動關閉所有按摩功能。
每次連續使用時間不超過30分鐘。

使用方式

一、開始按摩

- 1、將產品戴在膝蓋上，用固定帶將產品綁緊在膝蓋上到最佳效果。
請將產品盡量緊貼在膝蓋上。
- 2、短按【Ⓢ】鍵，產品開始工作。
- 3、產品開啟後設定中檔模式，中檔按摩壓力，中檔溫度，振動開。
- 4、產品開啟後，所有按鍵亮白色燈，顯示幕對應顯示相應圖標。
- 5、在開機狀態下，短按【Ⓢ】鍵，可以開啟或關閉振動功能。
- 6、短按【溫熱】鍵，可調節溫度（中-高-低-中-高-低，依次循環），顯示幕有對應溫度檔位顯示；長按【溫熱】鍵，可取消溫熱功能。同時產品以“滴滴”聲提示正在關閉。
- 7、短按【氣壓】鍵，可調節氣囊揉捏力度大小（中-強-弱-中-強-依次循環），顯示幕對應顯示力度檔位；長按【氣壓】鍵，可以關閉揉捏功能並放氣，同時產品以“滴滴”聲提示正在關閉。
- 8、產品運行默認15分鐘後自動關機。

二、開始按摩

- 1、請使用DC5V電源供應器，將隨機器配備的充電線，USB端插入電源供應器，另一端頭插入機器電源插孔內，機器顯示面板對應顯示充電狀態：
 - 顯示面板電池圖標亮紅色，代表正在充電，三格進度條閃爍，代表當前電量小於33%；
 - 充電完成33%，第一格進度條常亮，另兩格進度條閃爍；
 - 充電完成66%，第一、二格進度條常亮，第三格閃爍；
 - 充電完成時，三格進度條熄滅，電池圖標由紅色轉為綠色。
- 2、在使用產品時，如果電池圖標紅燈閃爍，應當停止使用，並立即給產品充電。
- 3、給產品充電，請使用DC5V，1A或1A以上的電源供應器，當然也可以用電腦USB端子給本產品充電。

使用方式

三、故障排除

- 本章歸納了本產品在使用時最常遇到的問題，如果你無法用下面的信息解決問題，請與本公司客戶服務中心諮詢。
- 如果您遇到列表中未提及的問題，應首先嘗試下列步驟：
 - 1.關閉產品的電源，從插座中拔下電源插頭。
 - 2.讓本產品保持關閉狀態60分鐘。
 - 3.重新將插頭插入電源插座，充電完成後並開機使用本產品。

問題	可能的原因	解決方法
產品不能工作	正在充電的產品不能工作。	此產品為了安全防護設計，充電時不能使用；充電完成後，拔掉充電插頭，即可按開機鍵使用本產品。
	產品剛剛完成15分鐘按摩並自動切換至待機模式。	如果你想再按摩一次，請再次按下Ⓢ按鈕。
	你已經連續使用本產品長達45分鐘，導致過熱保護裝置切斷了產品的電源。	重新使用本產品之前，必須先將產品插頭拔下並冷卻60分鐘。
產品過熱	溫熱功能為打開狀態。	關閉溫熱功能。
	你已連續讓本產品執行了45分鐘按摩。	拔下產品電源插頭並讓其冷卻，在每次使用之後拔下產品的電源插頭。
有聲音從產品中傳出	此聲音是由於產品的機械結構造成。	此聲音是正常的，並不意味著產品的功能出現故障。