

JOHNSON®

家庭用

電動按摩椅 MR7000

使用說明書



重要安全事項說明

使用按摩椅時，請特別注意並遵守下列安全事項：
使用本機前，請先詳讀所有的說明。

⚠️ 危險 — 為了減少觸電危險，請遵照下列指示

1. 使用完畢後，請將電源插頭從插座中拔除。
2. 清潔按摩椅前，請將電源插頭從插座中拔除。

⚠️ 警告 — 為了減少灼傷、火災、觸電或人員傷害的危險，請遵照下列指示

1. 無人在旁看管時，請務必將按摩椅的電源插頭從插座中拔除。不使用時，也務必將電源插頭從插座中拔除。
2. 請勿在加熱設備上（如電熱毯等）使用本機。勿在毛毯或枕頭下面使用本機。否則將導致過熱而引發火災、觸電或人身傷害。
3. 當行動不便或溝通能力不足的人使用本機時，必須要有看護等人持續在旁照顧及協助使用。
4. 兒童不宜使用本機。請讓兒童遠離本機。不使用時，請將開關關閉並將插頭從插座上拔除。
5. 只能將本機用於本說明書中敘述的用途。勿使用非製造商所推薦的任何附件。
6. 如果電源線或插頭已損壞，切勿使用本機。如果本機運作不正常、曾不慎使之掉下或損壞、使之浸入水中，請將其送到授權的維修中心進行維修。
7. 讓電源線遠離熱表面。請勿拉扯電源線來移動本機。勿讓插頭接觸針頭、不潔物或溼氣（請用乾燥的布拭去灰塵）。
8. 在操作期間，千萬勿堵塞氣孔，必須讓所有的氣孔避開棉絨或頭髮等物料。請勿將任何異物落入或塞入本機內。
9. 請勿在浴室或其他溼氣較重的地方使用本機。否則可能會導致觸電或本機功能異常。請勿將水等潑灑在遙控器和本機上。
10. 請勿在室外使用本機。
11. 請勿在正在使用氣溶膠噴射產品或正在實施供氧的地方使用本機。
12. 使用本機前，請掀起背墊確認靠背部的椅套無任何破損，並請檢查其他部分，確認是否開裂。若發現了裂口，即使破損很小，應立即停止使用本機，拔下電源插頭，將本機送交授權的維修中心進行修理。若在椅套破損狀態下使用本機，可能會導致觸電或受傷。
13. 從電源插座上拔除本機插頭前，應關閉所有的控制開關。操作本機時請勿使用變壓器，否則可能會導致功能失常或觸電。
14. 請勿站立在本機上。
15. 只能將本機連接至合適的接地插座，請參看接地說明。
16. 為避免觸電或人員傷害，請勿擅自打開或分解本機的任何部件。

請妥善保管本說明書

⚠️ 警告

1. 下列人士或正在接受治療者，在使用本機前，務請諮詢醫師。
 - 1) 使用心律調整器等易於受到電磁波影響之體內植入式醫療裝置者。
 - 2) 罹患心臟疾患者。
 - 3) 孕婦、病人或體質虛弱者。
 - 4) 因患血栓症、嚴重動脈瘤、急性靜脈曲張、各種皮膚疾患及皮膚感染（包括皮下組織炎症）等而被醫生禁止接受按摩者。
 - 5) 骨質疏鬆症者、脊椎骨折、急性（疼痛性）疾患者。
 - 6) 脊椎異常者或脊椎側彎者。
 - 7) 糖尿病等所致嚴重末梢血液循環障礙之知覺障礙者。
2. 勿將手腳夾在按摩球之間，以免引起身體不適或受傷。切勿將手指、腳和頭部放入靠背和椅座、靠背和扶手、椅座和扶手下、置腿台和椅座底、背面外蓋和腳架、以及置腿台背側之間的縫隙中，以免導致受傷。
3. 勿用於未著衣情況。直接按摩皮膚會引起疼痛。勿配帶髮飾等硬物使用。按摩頸部周圍時，應注意按摩球的動作，請勿過度強力按摩頸部。以免導致事故或受傷。
4. 初次使用按摩椅時，請使用輕度的按摩。每次使用時間控制在15分鐘之內。此外，同一部位之使用時間，應控制在5分鐘之內。連續使用時間過長，會損傷肌肉和神經。建議一天使用時間，應控制在30分鐘之內。
5. 使用過程中身體出現或感覺異常時，應立即停止使用，並及時就醫。
6. 勿在使用本機時入睡或酒後使用本機。
7. 勿坐在靠背、置腿台、肩部、扶手或站在座位上，以免使用者跌倒或按摩椅翻倒導致事故或受傷。
8. 本機不能運行或出現異常時，請立即關閉電源開關拔除電源插頭，並聯絡授權的維修中心進行檢查和維修。
9. 千萬不得擅自改裝、自行拆卸分解和修理本機。
10. 躺放椅背前，應確認椅子後面並無障礙物。若椅背碰到牆壁或柱子，可能會造成按摩椅功能失常。請確保椅子後面留有足夠空間。
11. 不使用時，應將電源開關關閉。從電源插座上拔除電源插頭。以免因兒童玩耍等而導致事故。
12. 檢測體型時，務必確認肩部位置是否正確。當不正確時，應利用位置調節鍵進行調節，或者停止按摩，再次進行檢測。
13. 確認本機部件間不存在任何異物後方可入座。同時應先確認按摩球位置後，再緩慢就座。勿在置腿台抬起狀態下，強行坐下或起身。以免導致事故或受傷。
14. 按摩手掌、手臂時，應摘除假指甲、手錶、戒指、手鐲等硬物。按摩大腿和臀部時，應檢查衣服（褲袋等）內沒有硬物。按摩時，應摘除耳環、項鍊、圍巾等飾品，以免導致受傷。
15. 靠背椅套因磨耗而造成細微破損或穿孔時，應立即停止使用。請勿自行將靠背椅套拆下、弄破或切開。嚴禁在靠背椅套破損狀態下使用，可能因衣服或頭髮被捲入造成傷害。
16. 使用“溫熱”功能時，避免長時間接觸同一位置。否則可能發生低溫灼傷。
17. 處於安裝狀態時，不得拖動或拉動本機。勿在木地板、地毯等易於劃傷之表面移動腳輪或拖拉按摩椅。以免損傷其表面。
18. 移動本機時，請勿握住置腿台/腳底按摩部分。以免因滑動可能導致事故或受傷。
19. 勿損傷電源線。勿損傷、損壞、加工、強行彎曲、牽拉、扭曲、束緊電源線。電源線上勿壓放重物，尤其留意勿在移動中捲入或夾住電源線。以免電源線破損，可能導致火災或觸電。
20. 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
21. 使用中請勿拔掉電源插頭和關閉電源開關。
22. 請勿在電源插頭、插座等插入鬆弛的情況下使用。以防引發觸電和短路。
23. 請勿使用額定電壓以外的電源，以免發生火災、觸電或故障。

操作注意事項 — 為了避免按摩椅損壞

1. 請在平整的場地使用，如不注意可能會發生傾倒的事故。
2. 使用前應確認操作開關和計時功能等是否正常運作。
3. 長時間未使用後，再次使用前，應先重新仔細閱讀本說明書，然後再確認按摩椅是否正常運作。以免導致事故或受傷。
4. 移動按摩椅時要平穩輕放。以免刮傷地板。
5. 為了安全請準確的安裝地線，電源插頭必須插在有接地線的插座上，地線插頭不能彎曲或自行拔除，如不注意可能會在漏電或故障時發生觸電。
6. 請勿在靠背、扶手、置腿台的上面站、坐或放東西。
7. 身體潮濕時禁止使用本產品。以防導致漏電或觸電。
8. 停電時，應立即切斷電源開關，從電源插座上拔下電源插頭。以免重新通電時導致事故。
9. 進行保養時，應從電源插座上拔下電源插頭。並勿用濕手插拔電源插頭。以免導致觸電和受傷。
10. 拔下電源插頭時，應握住前端之插頭部分拔下，勿牽拉電源線。以免導致觸電或短路，引發火花。
11. 不使用時，應從電源插座上拔下電源插頭。以免灰塵或潮濕導致絕緣老化，引發漏電火災。
12. 不要在游泳池、浴室等特別潮濕的環境下使用或保管本產品。
13. 不可放置在太陽光直接照射的地方，或接近爐子、熱風機等暖房器具的周圍。否則可能會造成皮套表面的變色、變質。
14. 勿在暖爐等高溫場所附近使用，勿邊吸煙邊使用。勿置於電熱毯等取暖器具上使用。以免導致火災。
15. 勿載人或載物移動按摩椅。以免導致故障或受傷。
16. 勿兩人以上同時坐在按摩椅上。以免導致故障或受傷。
17. 本機發生任何故障請務必由專業人員進行維修，不得自行改造、拆卸和修理
18. 任何維修服務均應該由授權的維修中心執行。


接地說明

本機必須妥善接地。如果本機功能失常或故障，接地為電流提供最低電阻，降低觸電的危險。本機配備一條含有接地導體的絕緣電線和一個接地插頭。接地插頭必須插入正確的電源插座上，而該插座是根據當地法令及標準規範而妥善安裝。

⚠ 危險

接地連接不良可能導致觸電。若對電源插座是否已妥善接地尚產生疑問，請諮詢授權的維修中心。若本機隨附的插頭與電源插座不符，切勿擅自調整插頭。並請授權的維修中心安裝適當的插座。


本機內附接地插頭。請確認電源插頭必須連接到與電源插頭相符的電源插座上。不可使用任何電源轉接器在本產品上。

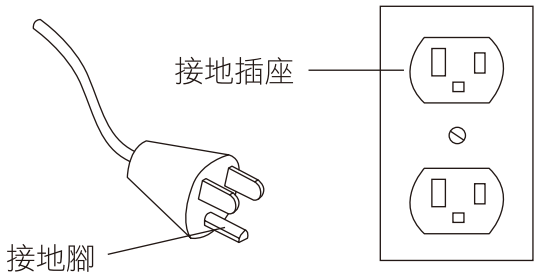

使用前的準備

按摩椅設置方法


- 周圍應留出空間，置於平坦場所。避免置於陽光直射或取暖設備及其他高溫場所之附近，以免導致按摩椅或背墊變色或變質。
- 建議在本機底下放一塊地毯或其他軟性底墊，避免損壞地板。所準備的底墊必須大於本機和置腿台可碰處地面之面積（最小 120 cm x 70 cm）
- 放下靠背時腿部按摩器同時會抬起，為避免碰撞周圍物品，應預先留出前方80公分以上、後方50公分以上之空間。

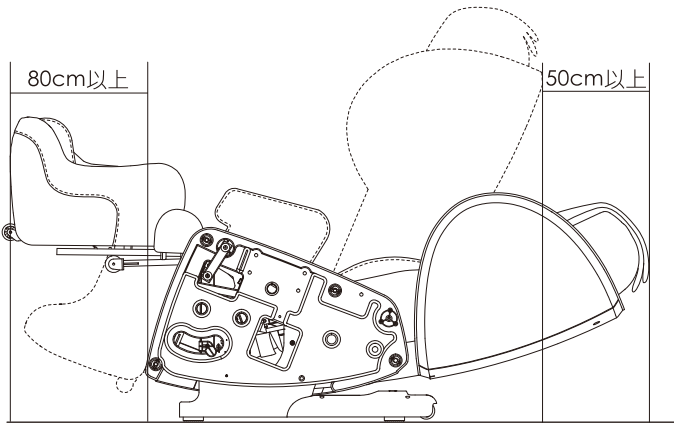


⚠ 注意 | 椅背初始位置為平躺

從包裝箱中取出所有物件，安裝本機。

- 主機體
因本機極重（約108公斤），請小心處理，避免受到傷害。
（本機必須由兩人或多人搬運）

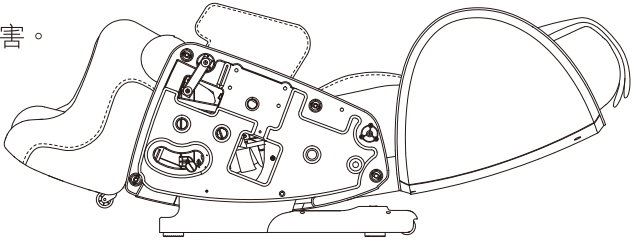


- 配件

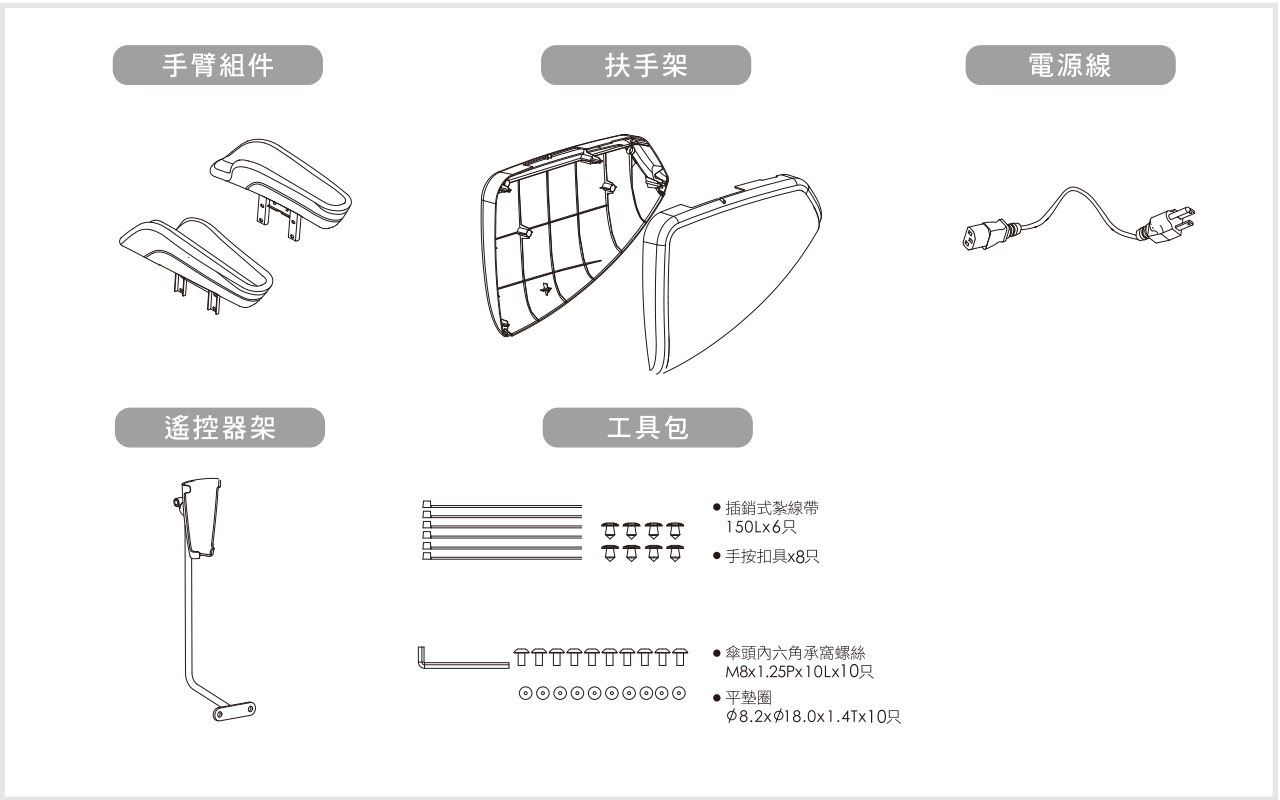


組裝方法

1. 手臂部件的安裝方法（左右兩側）

❶ 將手臂部件之孔位對準內側版的安裝孔位。

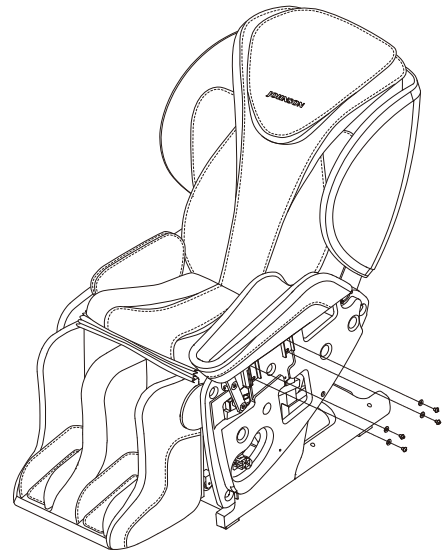


❷ 以平墊圈 $\phi 8.2 \times \phi 18 \times 1.4 \text{ T} \times 4$ 只及傘頭內六角承窩螺絲 $M8 \times 1.25 \text{ P} \times 10 \text{ L} \times 4$ 只固定手臂部件四個部位。

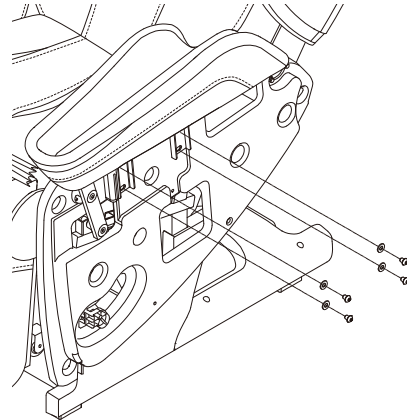


❸ 安裝手臂氣囊進氣接頭。

請務必將黑色的氣管與黑色氣管接頭對接，黃色氣管與黃色氣管接頭對接，並使用插銷式紮帶 $150 \text{ L} \times 2$ 只，將氣管與接頭重疊處紮緊固定。

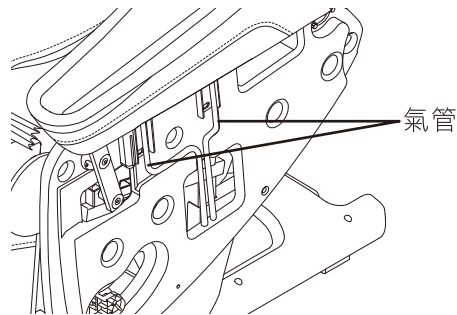


❹ 重複步驟1~3，安裝右側手臂部件。

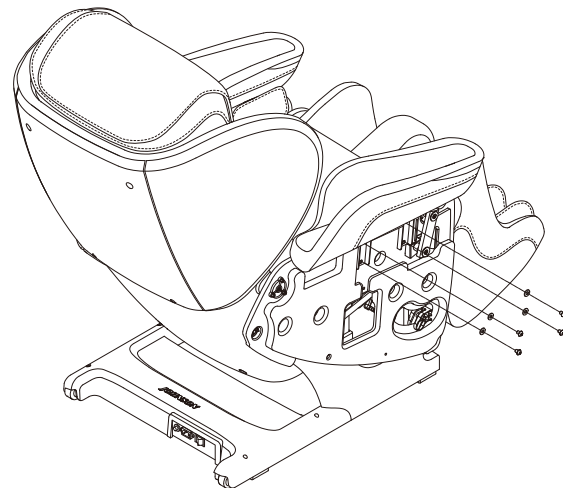

2. 遙控器架的安裝方法（可選擇安裝於本機的右側或左側）

❶ 將遙控器架安裝在內側板上。


❷ 以平墊圈 $\phi 8.2 \times \phi 18 \times 1.4 \text{ T} \times 2$ 只及傘頭內六角承窩螺絲 $M8 \times 1.25 \text{ P} \times 10 \text{ L} \times 2$ 只固定遙控器架兩個部位。

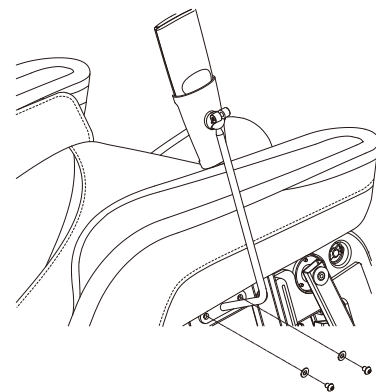


3. 扶手架的安裝方法（左右兩側）

在手臂組件及遙控器架安裝完成後，安裝側板外蓋。

❶ 從按摩椅右側面安裝右側板外蓋，將側板孔對準內側板安裝孔，於內側板內側扣上4只扣具，將右側扶手外蓋固定住。

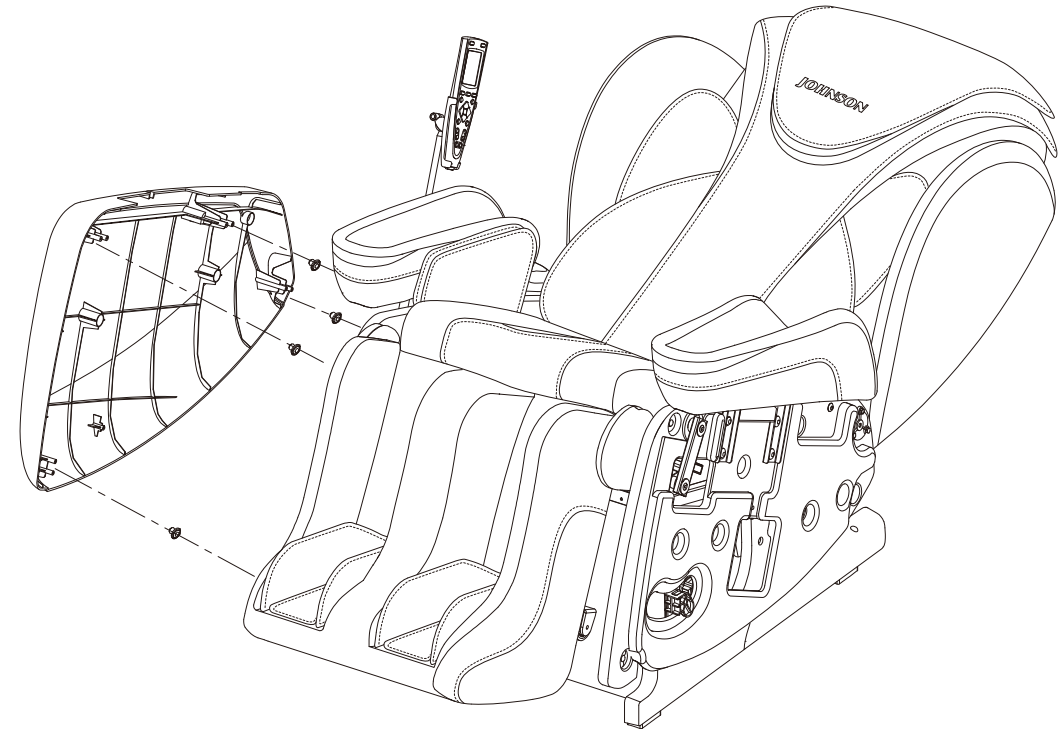


❷ 重覆❶步驟，安裝左側扶手架。

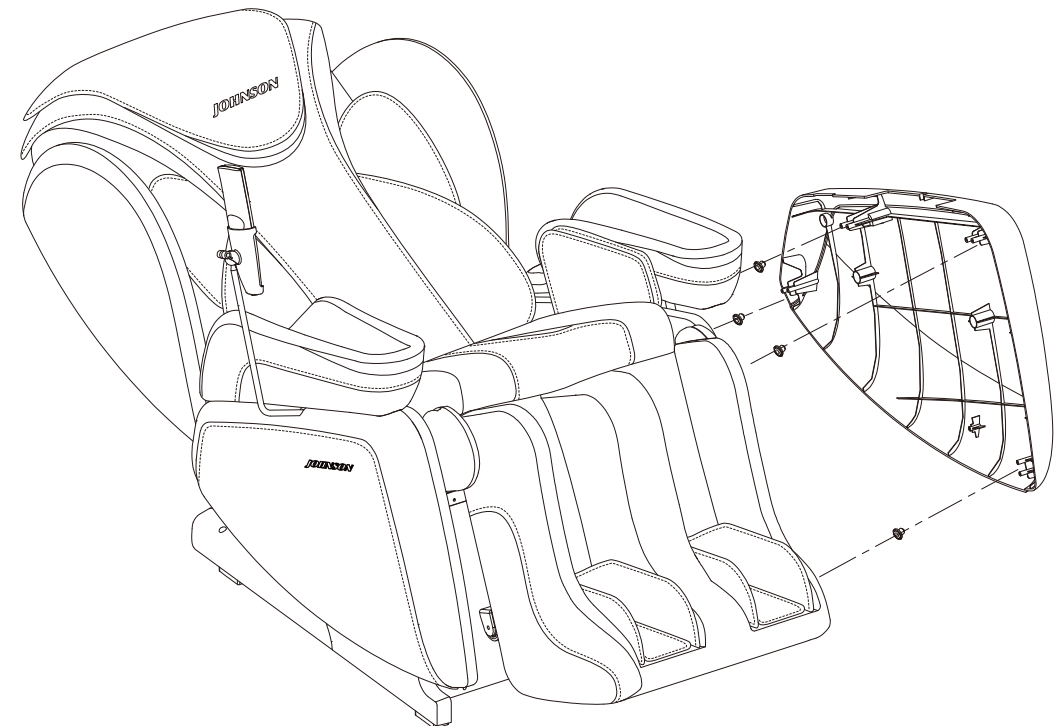

⑤ 安裝完成

- ・按摩時，將大頭枕拆除。
- ・感覺按摩力度不足時，可以將背墊移除，加強按摩球與背部的接觸。

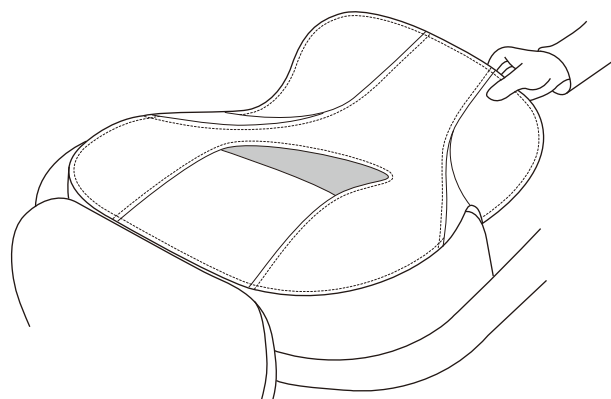


- ・不按摩時，可不必拆下背墊和頭枕而作為躺椅使用。

⚠ 警告


使用前務必掀起背墊，檢查靠背椅套有無破損，同時檢查其他部位有無破損。
(即使破損很小，也應立即停止使用，拔下電源插頭，委託修理)。

⑥ 將電源線連接到本機

務必將電源輸入插頭完全插入電源輸入插座。

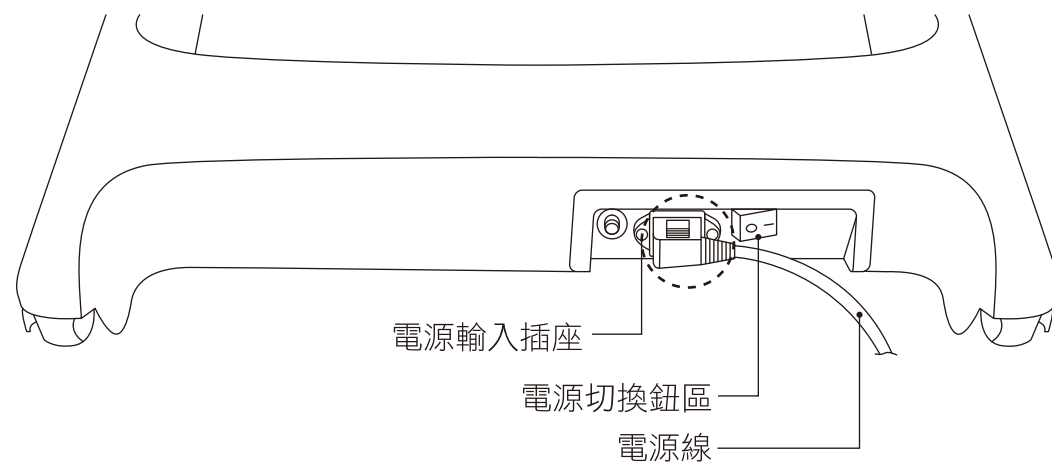


4. 安裝完畢後，將電源插頭插入插座。打開電源開關，就可以使用遙控器選擇按摩功能。

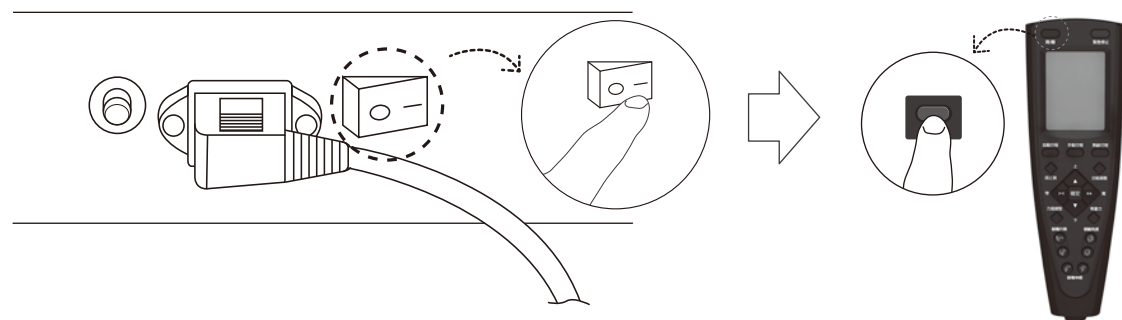

按摩椅移動方法

1. 使用腳輪移動

推壓靠背部位之上部，翹起按摩椅之前部，手推移動。

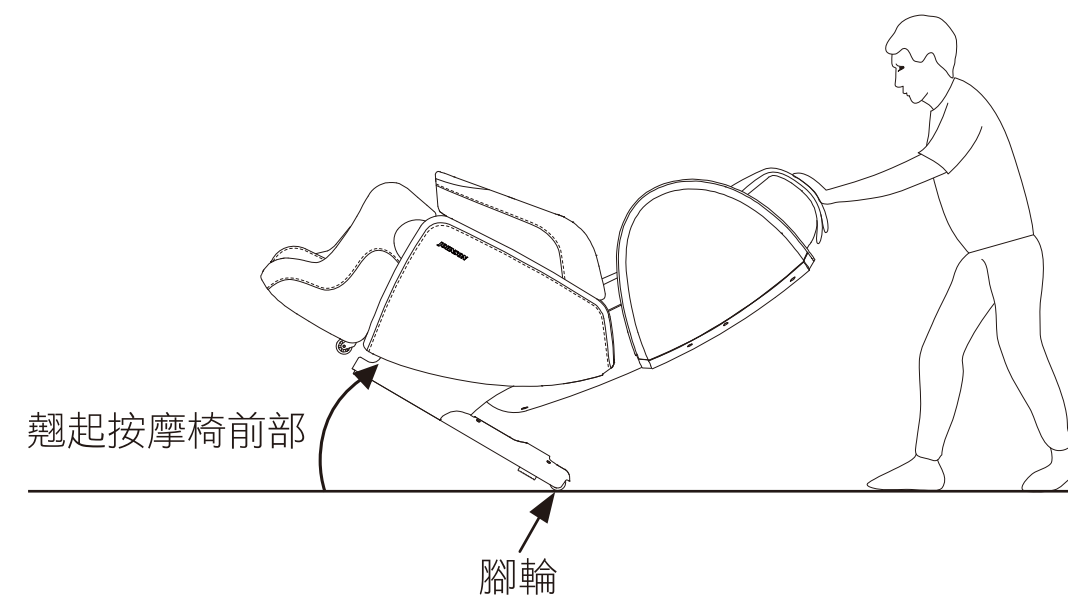

請將按摩椅前側抬起，利用下部滑輪進行移動。

⚠ 注意

- ・不要載人或載物移動，以免翻倒。
- ・不要在容易劃傷之地板上滑動腳輪或拖拉。
- ・移動時不要搬起座位部分、腿部和肩部。
- ・翹起按摩椅前部時，應注意其重量。


2. 2人搬運

當2人一起搬運時，請將椅背放倒，一人握住椅背，一人握住小腿架進行移動

⚠ 注意

- ・電源線要整理好並放在按摩椅座上，以免在移動時過程中損壞電源線。
- ・若移動本機後用力放下可能會損壞內部零件。
- ・地面不平時請勿使用腳輪。
- ・地板為木質等易滑動表面請勿使用腳輪，以免刮傷地板，如需要移動，必須兩人以上合作抬起移動。

各部位名稱及功能

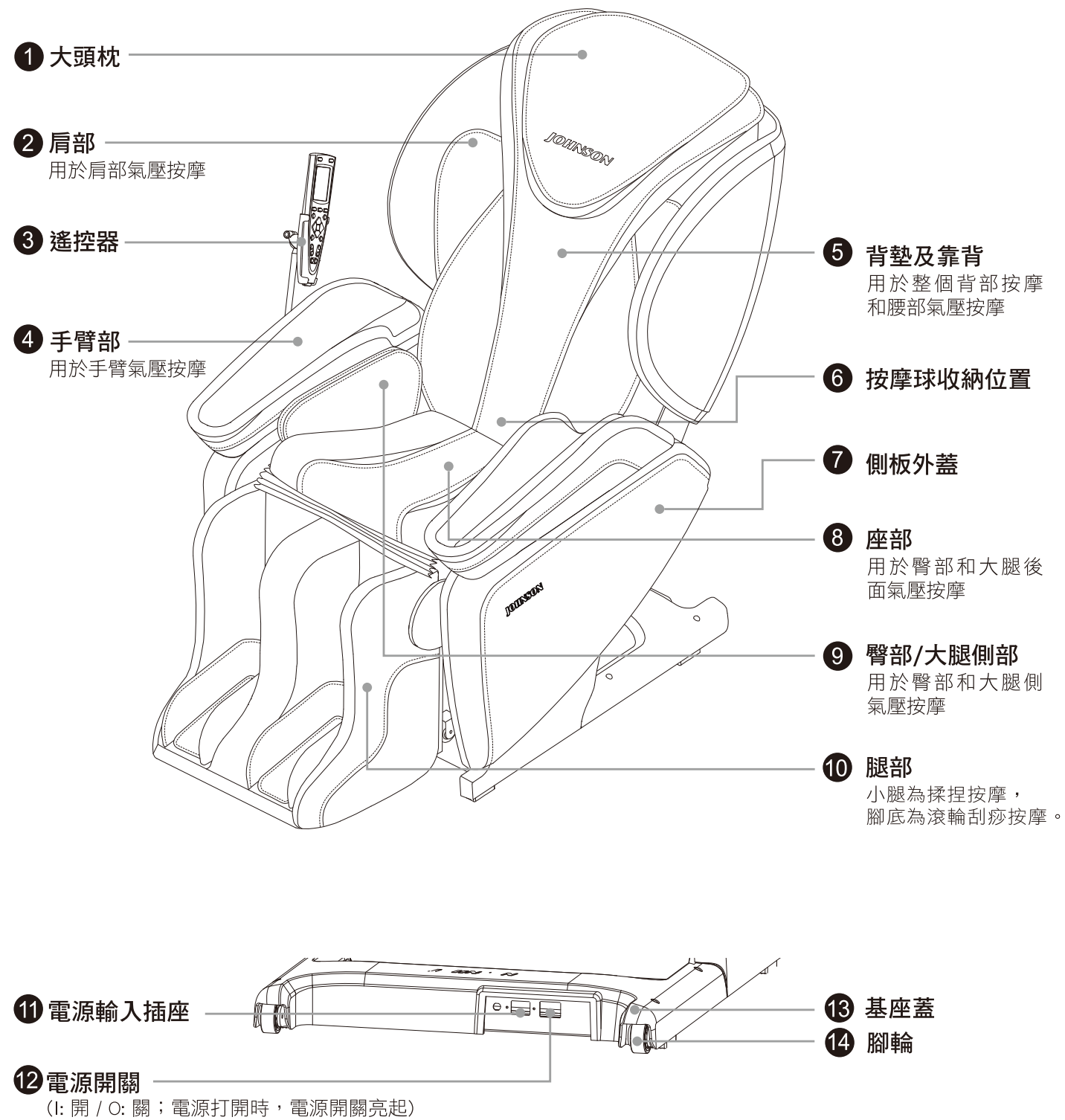

遙控器

按鍵功能說明



每次開始按摩前


— 接通電源

1. 將電源插頭插入電源插座。

- 檢查電源線、遙控器線、電源插頭是否損傷，檢查電源插頭上是否粘附頭髮或灰塵等。

2. 打開電源開關。

- 電源開關位於基座的右側下方。
- 確認電源切換是設定在 I（開）的位置（電源打開時，電源開關亮起）。

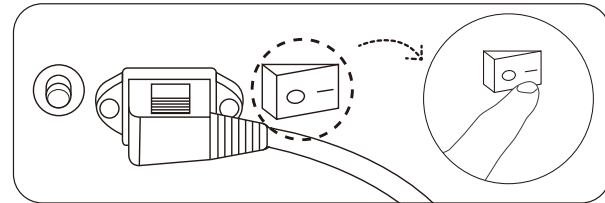


3. 請務必確認周圍狀況。

確認按摩椅之後面和腿部按摩器前方與下方等周圍沒有人、寵物、物品等。

4. 確認按摩椅狀態。

- ① 掀開背墊，檢查靠背椅套有無破損，同時檢查其他部位有無破損。
※ 即使破損很小，也應立即停止使用，拔下電源插頭，委託修理。
- ② 檢查電源線、遙控器線或物品是否夾在按摩椅中。
- ③ 坐下前，確認按摩球位置。
 - 按摩球通常位於收納位置(收在靠背最下部之狀態)。
 - 按摩球不在收納位置時，按下開/關鍵，按摩球則回到收納位置。
- ④ 坐下前，確認腿部按摩器處於收納位置。
 - 腿部按摩器處於抬起狀態時，若強行坐下，可能會導致受傷。
 - 此時，應按下腿部按摩器角度調整鈕，放下腿部按摩器。
 - ※ 按下開/關鍵，靠背也同時收納。

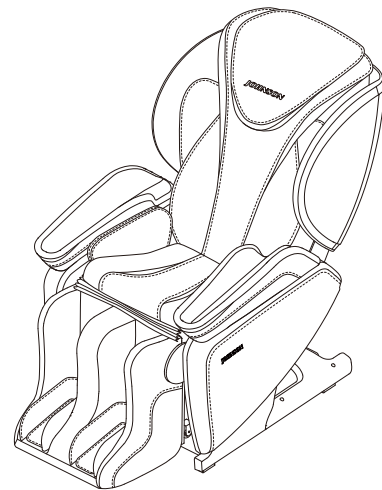

按摩椅的調節方法


— 想要調整靠背和/或腿部按摩器時

1. 按 開啟電源。

- 不按摩時，超過3分鐘無操作，遙控器顯示將自動關閉。


2. 按 或 鈕以調整角度。

- 若按按鈕，靠背或腿部按摩器將移動，直到聽到嗶嗶聲為止。
- 扶手會根據靠背的傾度移動。

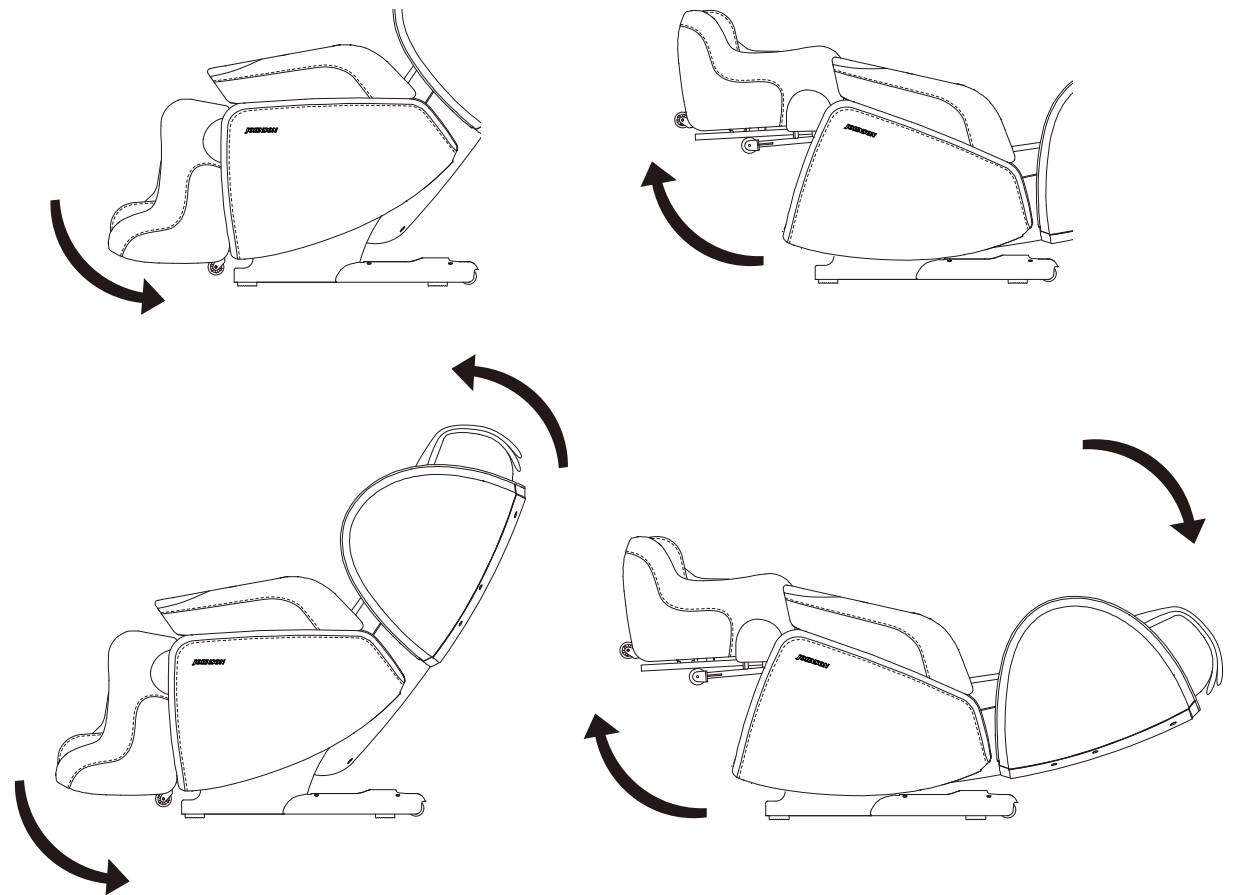

3. 按 以調整腳機伸縮

腳機伸縮

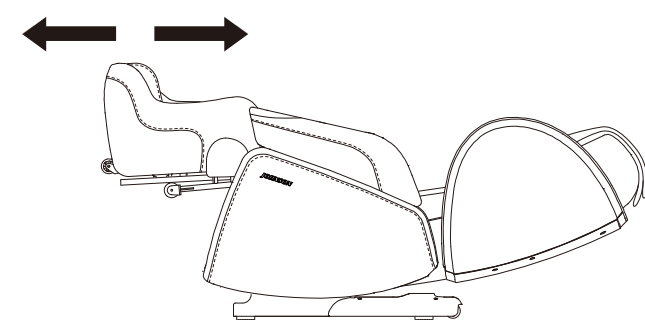

開始按摩


由於 MR7000 搭載功能強大且專業的按摩科技，當按摩椅開始運作前，請務必配合以下操作提醒進行設定，讓按摩效果達到最佳化。



- 選擇喜好行程後，將自動調整到標準按摩角度，但是您仍然可以調整適合您自己喜愛的角度。



- 為配合腳底滾輪的功能能有效的發揮，請務必調整腳機角度 / 長度，讓腳底平貼於腳踏平台上。

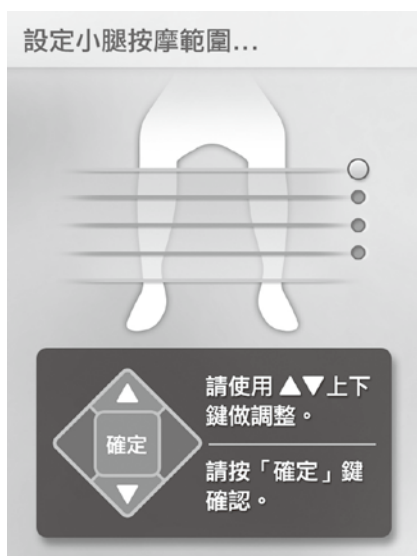


- 我們有四段小腿按摩範圍可供選擇，但由於每個人的身形不同，小腿長度也不同，所以，請根據您個人需求選擇適合您身形，身高的小腿按摩範圍。




- 請您精確的微調按摩球配合肩部位置，(上下鍵為高度調整，左右鍵為深度調整)如此將能夠讓按摩精更加到位。

腳部按摩放置位置建議 (請務必詳讀)

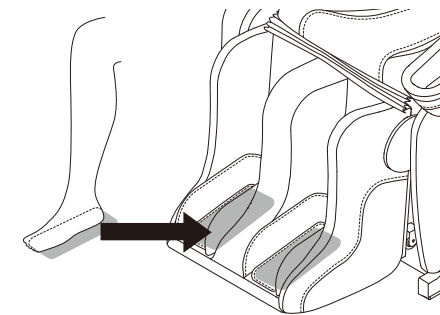


- 1-1. 足底務必踏平腳底按摩平台上，以確保腳底按摩機構可以正確施行按摩動作。
- 1-2. 若我們內置的最佳座椅角度無法讓您踏平於按摩平台上，請調整腳機角度 (通常調整角度往上)，或者調整腳機伸縮距離，以便踏平於平台上。

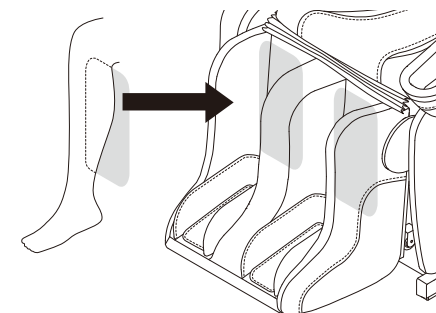

- 2-1. 請確認小腿後面 (小腿肚或腿肚下緣) 可以擱在小腿按摩機芯上，以確保小腿 4D 按摩機芯可以正確施行按摩動作。
- 2-2. 若我們內置的最佳座椅角度無法讓您的小腿肚碰觸到按摩機芯，請調整腳機角度 (通常調整角度往上)，或者調整腳機伸縮距離，以便小腿肚或腿肚下緣，可以擱在小腿按摩機芯上。

腳部按摩放置位置建議 (身高超過 180 CM)

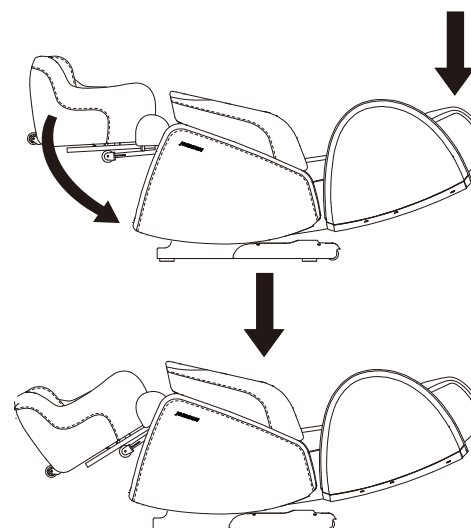

- 3-1. 請先調整姿勢如左圖，椅背儘量往後躺，腳機角度不要抬高，並且腳機延伸至最長。
- 3-2. 請按 1-1 ~ 2-2 的步驟，確認足部/小腿可以到定點置，以便腳機按摩功能充分發揮效果。

自動按摩行程的使用方法

1



2



1. 按 開啟電源。

- 不按摩時，超過3分鐘無操作，遙控器顯示將自動關閉。
- ※ 按下"開/關"，選擇喜好的行程後，靠背和腿部按摩器會自動調整到最舒適的按摩位置。
- ※ 按下"開/關"前，若按摩球或按摩椅不處於收納位置，此時按下"開/關"，按摩球/椅會先回到收納位置，選擇喜好的行程後，將自動調整到最舒適的按摩位置。

2. 請按 鍵，進入“自動行程”主頁。

3. 請按 進入類別的行程選項，到達您要的行程後(例如，晨間喚醒)，請按“確認鍵”開始進行按摩。




4. 自動行程目前共分為 4 個類別，分別為 --- 樂活行程、部位極致、D極致以及記憶行程。請參考17頁說明。

自動按摩行程的使用方法

5. 對於身高不足140cm或180cm以上、肩部位置不適合者，建議按以下方法使用。


① 身高不足140cm左右

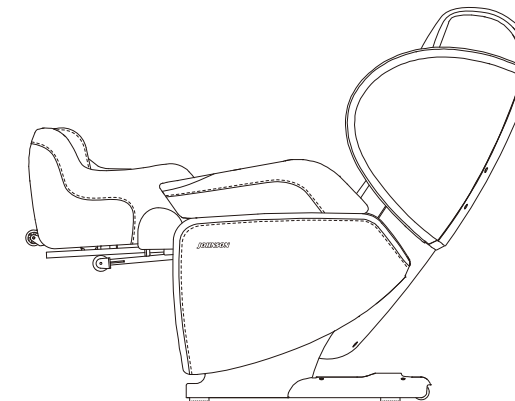

請在座部上方鋪設坐墊，貼著靠背坐。

② 身高超過180cm左右

(請參閱14頁，下半頁說明。)

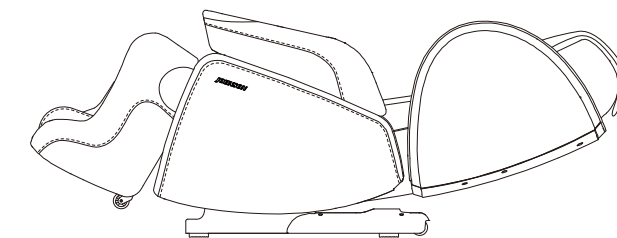


6. 選擇行程後，為達到最佳的按摩效果，請配合螢幕提示建議的按摩椅與身形的搭配調整，然後，將開始進行檢測體型。(請參閱13頁說明)

7. 體型檢測後，按摩球慢慢向下移至肩膀位置，然後開始捶打動作，決定您的肩膀位置。若用戶不動作調整的話，10秒後會自動確認肩位並開始行程。

8. 在捶打動作期間調整肩部位置。

- 肩部位置不合適時，在輕微的捶打過程中約(10秒)用  按鈕將按摩球上、下、前、後移動，然後按「確認」按鈕。用戶調整肩位後，3秒內沒按「確認」按鈕，會視同確定。

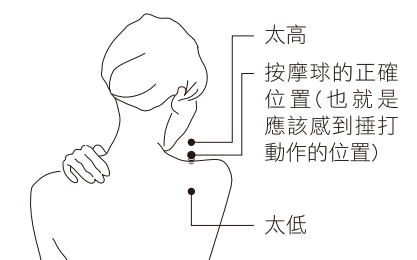

正確的肩位就是肩膀上部感覺到輕微捶打動作的位置。

9. 捶打動作一完成，體型偵測結束。

- 如果在捶打動作仍在進行時按「確認」按鈕，便會結束體型偵測並開始按摩。
- 若肩部位置偏離較大，請暫時斷開電源，將肩部對好靠背，再從頭開始操作一次。

自動按摩行程的使用方法

10. 自動行程類別的說明

• 樂活行程

以現代人的生活型態為基礎，規劃符合現代人生活型態的按摩行程。

讓您根據您目前的狀況，毫不費力的做選擇，輕輕鬆鬆地享受我們為您開發的專業按摩行程。



• 部位極致

此類別是根據不同部位做按摩規劃，以能達到對該部位最適切，最充分的按摩效果為主的專業按摩行程，您可以根據您的特定需要，直接選擇按摩部位，既直覺又容易。



• 4D極致

此類別是除在3D的基礎上（上下左右前後的立體按摩），再帶入快慢的韻律感，以達到擬真人手感般的按摩效果，並且全程4D涵蓋率達70%以上的按摩規劃，讓您有如按摩大師為您親自按摩般的極致感受。



• 記憶行程

此類別是根據您在使用過程中的所做的任何設定調整做紀錄，並將您已經調整到最適合的強度特別功能的開關設定偏好，以及您特別鍾愛的手技...等等，做一個完整紀錄後，再儲存下來，以方便下次再行使用。



按摩中的力道調整方法



1. 按  叫出按摩力道調整頁面（如下圖所示）並用  選擇要調整的類別。然後用  調整力道。



- 按摩力道調整頁面

零重力角度的使用方法



1. 按  後，按摩椅將直接調整至零重力角度。
2. 在按摩啟動後，任何時刻皆可以直接啟動。

操作小技巧 (多頁選項時翻頁技巧)

當遇見選項較多，某些選項必須翻頁才能選擇時(選項多頁，跨頁)，有以下三種操作模式，可以直接進行跳頁，以增加您的使用便利性。(以下以”自動行程”為例)



●自動行程/樂活行程(第一頁)

●自動行程/樂活行程(第二頁)

1. 可以直接連續按”自動行程”按鍵，進行跳至下一頁的動作。




2. 可以直接長按”左”，”右”鍵，進行跳至下一頁的動作。



3. 可以停留在分類頁籤上，按”左”，”右”鍵，進行跳至下一頁的動作。



依自己的偏好做調節

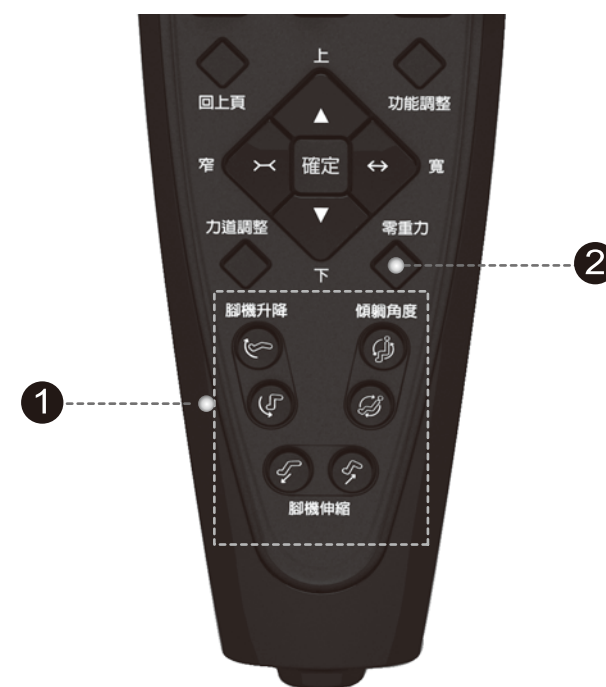

1. 希望調節傾躺、腿部按摩器角度，以舒服姿態進行按摩。

- 1 欲調節傾躺、腿部按摩器的角度，按進行調節。

- 伸展行程中無法調整靠背和腿部按摩器角度。

2. 請按”功能調整”按鍵，叫出可調整之功能選項，開始進行想要的選項調整。以下分別說明各個功能選項。

3. 痠痛點：

對於當下按摩部位，符合您痠痛點的位置，而想進行重複按摩時，可以選擇此選項，請按  鍵，進行重複當前按摩內容。

4. 捶打：

對於正在進行時的行程，關閉/開啟內置的捶打動作，請按  鍵，以進行捶打動作的關閉/開啟。

5. 腿伸展：

對於正在進行時的行程，關閉/開啟內置的腿伸展動作，請按  鍵，以進行腿伸展動作的關閉/開啟。



依自己的偏好做調節




6. 足底溫熱：
可以針對足底溫熱器，進行關閉 / 開啟的動作，請按  鍵，以進行設置。

7. 腳機功能：
對於正在進行時的行程，關閉 / 開啟內置的腳機動作 (所有腳機的按摩動作)，請按  鍵，以進行設置。

8. (小腿) 按摩範圍：
若有需要調整腳機小腿按摩範圍，我們提供四段按摩區域做選擇，請按  鍵，以進行設置。

9. 氣壓設定：
對於正在進行時的行程，可以針對內置的各部位氣囊執行關閉 / 開啟的設置，請按  鍵，以進行。

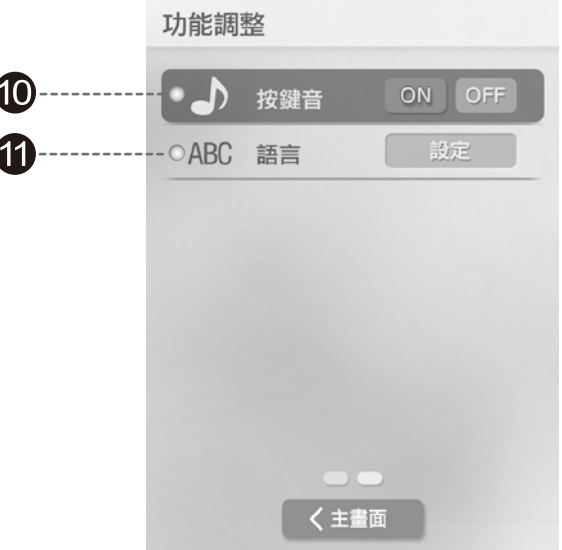


10. 按鍵音：
關閉 / 開啟手控器按鍵的回饋聲音，請按  鍵，以進行設置。

11. 語言：
您可以針對手控器語言做變更，請按  鍵，以進行設置。

記憶功能的使用 (一般使用者)

在使用按摩椅的過程，您所做的任何調整，我們設計了一個智慧程式，會去判斷你的最佳調整的設定，並貼心的幫您分析紀錄，並在行程時間結束後，讓您可以儲存以方便下次再使用，以下介紹使用方法。

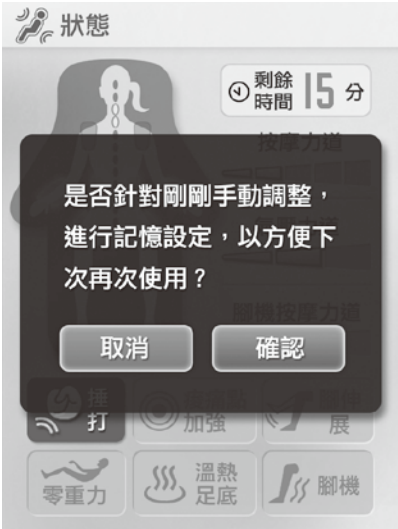


1. 針對您於按摩期間所調整的設定，於按摩時間結束後，會有一個詢問視窗，請選擇“確定”，並請按  鍵，以進行設置。

- 被記憶內容包括所有跟按摩相關的調整設定，如：力道大小，部位設定，功能開關…等。



2. 進入記憶位置頁面，請按  鍵，選擇要記憶的位置，並按  鍵，設定被記憶在選定的位置。

- 若選擇先前已被記憶的位置，例如：A-1，則 A-1 將被覆蓋掉。

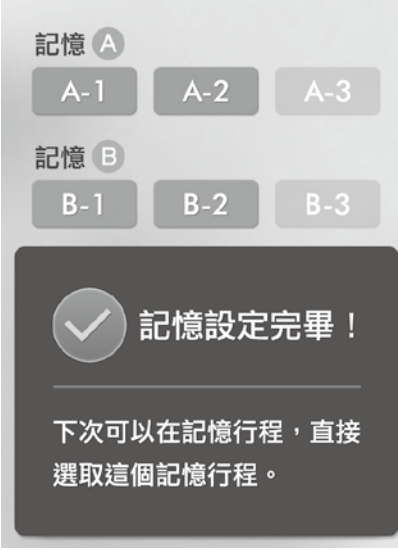

3. 設定完畢，將顯示如左頁面。


手動選擇喜好的按摩部位及按摩動作



1. 按 開啟電源。
 • 不按時，超過3分鐘無操作，電源將自動關閉。

2. 按 鍵，進入手動按摩選項，並按 鍵選擇要進行按摩的項目，按 鍵進行細部設定。

以下例子以“手動行程 / 背部按摩”為說明

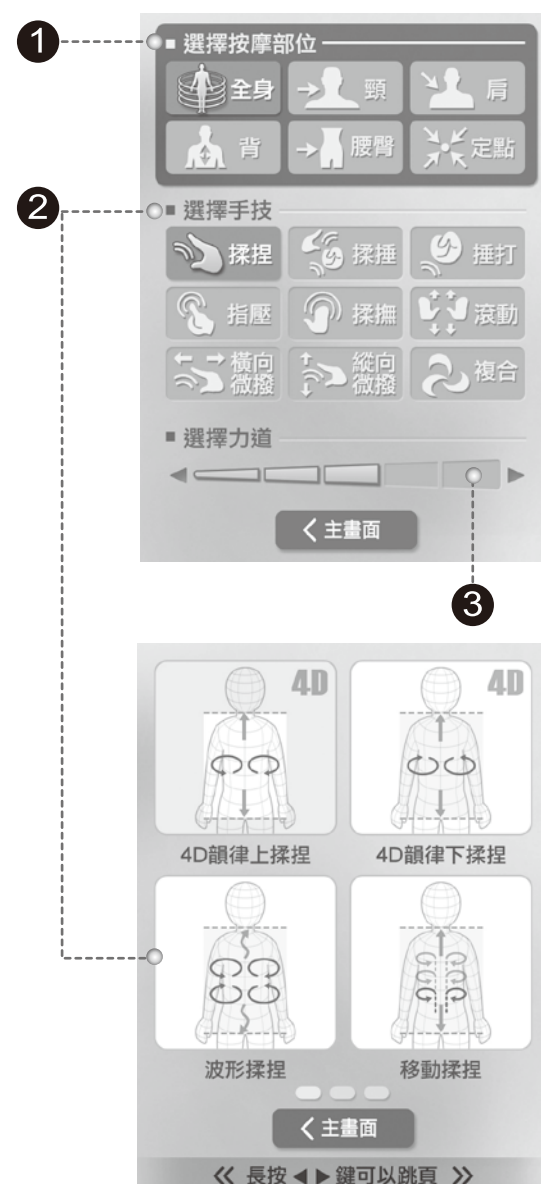

1. 按 鍵，選擇按摩部位，按 進行下一個步驟的選擇。

2. 按 鍵，選擇手技，按 進行細部手技選擇(如左下圖)，並選擇“細部手技”。
 • 此時所選部位，手技已經開始運作，您可以隨時回到以上任何項目進行細部變換調整。

3. 按 鍵，選擇力道大小，並開始享受手動設定的按摩。

4. 您可以間隔幾分鐘或者間隔任您你所需求的時間，再次重複以上的步驟，做其他的設定，總共有15分鐘可運用。

5. 手動選項除了“背部按摩”外，還有“氣壓按摩”“小腿按摩”“足底按摩”“溫熱設定”，其操作方式與上述“背部按摩”大同小異，請自行操作使用。

手動部位的體型偵測

- 全身/ 頸/ 肩 - 正常掃描
- 背/ 腰臀 - 簡單掃描 (按摩球將不會向上移至肩膀部位)
- 定點 - 不需掃描

欲在按摩時變更動作

- 在步驟2至4中選擇喜好動作。
- 在步驟2中重設動作後約5秒後無動作，將自動確認開啟動作。



• 手動按摩主頁面

熟齡按摩行程的使用方法



1. 按 開啟電源。

- 不按摩時，超過3分鐘無操作，電源將自動關閉。
※按下"開/關"後，靠背和腿部按摩器會自動調整到最舒適的按摩位置。
- ※按下"開/關"前，按摩球或按摩椅不處於收納位置，此時按下"開/關"，按摩球/椅會先回到收納位置後，再自動調整到最舒適的按摩位置。

2. 請按 鍵，進入“熟齡行程”主頁。

3. 請按 選擇您要的行程後 (例如，晨間喚醒)，請按 鍵開始進行按摩。

4. 熟齡行程目前共為兩頁，第一頁如左下圖，第二頁如下圖。

5. 熟齡行程是專為年紀較長者特別規劃設計的按摩行程，不只是使用介面上放大圖像文字，考慮使用的辨識容易外，在按摩的內涵上，並請以輕柔的按摩力度為基礎，期間加入更多的身體末梢的按摩元素為理念，以幫助血液循環以及緩和身體末梢部位為目的的貼心按摩規劃。




停止按摩

定時器功能

1. 操作開始後，按摩將約在15分鐘後自動完成。

- 按摩球自動返回收納位置。
- 椅背和腿部按摩器維持在原位，方便用戶繼續選擇下一個行程。
- 若不繼續選擇行程，按一次  後，椅背和腿部按摩器返回收納位置。

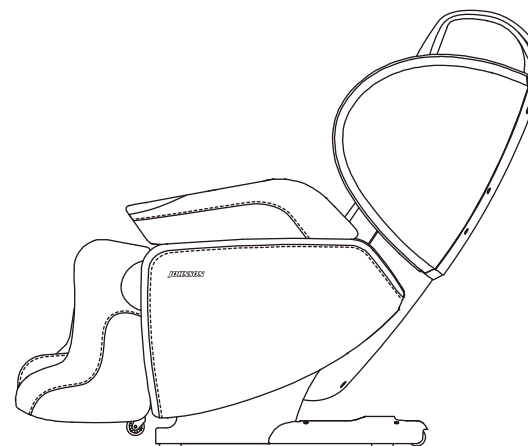

- 靠背不會自動升起。
- 按一次  後，靠背就會升起。

2. 中途停止按摩。


- 按  鍵，靠背、按摩球及腿部按摩器都會返回收納位置。

3. 使用中若遇任何問題。

- 按下  按鈕
- 所有操作將立即自動停止。
- 小心離開本按摩椅，以免本機翻倒。

切斷電源

1. 確認電源切換是設定在“0” (關)的位置。

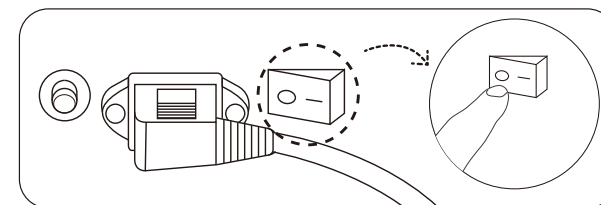

2. 將插頭從插座中拔下。

保養和保管方法

人造皮革區域

保養人造皮革部分時，先用乾布沾濕稀釋過的中性清潔劑並擰乾後擦拭，然後再用乾布擦拭，待其自然乾燥。（清潔劑使用過多有時會損傷椅套）。
保持按摩椅清潔，放置在溫度適宜之場所，避免濕氣和灰塵等不良環境。

- ※ 進行保養時請務必將電源線的電源插頭從電源插座中拔下，並且不要用濕手拔取。以免引起觸電和受傷。
- ※ 不得用汽油、稀釋劑、酒精擦拭，不得噴灑含有藥劑的液體。以免導致觸電和引起火災。

按摩椅

塑料部分、筒管部分之污漬，用乾布沾濕稀釋過的中性清潔劑並擰乾後擦拭，然後用乾布擦拭，去除殘留清潔劑。
※ 塗漆部分用乾布擦拭。
※ 不得用汽油、稀釋劑、酒精、其他溶劑、去污粉等擦拭。以免引起劃痕、變色、開裂。

遙控器

遙控器之污漬，用乾布擦拭。
※ 千萬不要用濕布擦拭。以免引起故障。

背墊、頭枕、座墊以及其他布質部分

髒污時，用乾布沾濕稀釋過的中性清潔劑並擰乾後擦拭，然後再用乾布擦拭，待其自然乾燥。
※ 不要熨燙。以免損壞布料。不得用汽油、稀釋劑、酒精擦拭，不得噴灑含有藥劑的液體。以免損壞衣料。

保管方法

擦拭污漬及灰塵後，放置在濕氣少之場所保管。長期不使用時，請套好防護罩等以防止灰塵附著。
※ 不要長時間放置在日光直射之場所，不得放置在暖氣、火爐附近等高溫之場所。以免引起變色和變質。

故障排除

使用過程中有以下聲響或感覺，均源於結構，並非異常，對使用壽命等均無影響。

- 按摩球上下移動時之聲響。
- 按摩時之齒輪和馬達聲響。
- 按摩球和椅套之摩擦聲響。
- 捶打、捶揉同步按摩時之聲響(尤其是從肩部移向背部時)。
- 揉捏、捶打、捶揉同步按摩時，對按摩球之施力方式不同，按摩速度會變化。
- 增加負荷時之馬達聲。
- 自動行程中，為配合使用者之體型，按摩球自動前後調節時之聲響。
- 氣壓按摩時之氣壓機聲和氣囊排氣聲。
- 氣囊膨脹時發出之聲響。
- 「肩部」按摩時發出聲響。
- 躺放按摩椅時，靠背和座位發出之摩擦聲。
- 座位下的氣泵動作聲

警告 | 千萬不得改裝、自行拆卸分解和修理。以免導致火災、機械動作異常，造成受傷。

現 象	可 能 原 因	處 理 方 法
接通電源後，機器不運作	機器開關是否打開	打開開關
	是否開啟遙控器上  鍵	按下遙控器上  鍵
	沒有選擇按摩功能	選擇按摩功能
	電源插頭與插座是否接觸不良	使電源插頭與插座接觸良好
左右按摩球高度不同	按摩球是相互交替工作的	正常現象，無須作處理
運作時聲音突然變大	是否使用時間過長	切斷電源，讓機器停止工作，休息半小時以後，再次進行操作
機器突然停止	額定時間到	切斷電源，讓機器停止工作，休息半小時以後，再次進行操作
按  鍵 躺椅不自動回復到最初的位置	使用過度	切斷電源，讓機器停止工作，休息半小時以後，再次進行操作
	額定時間到	
打開電源開關，電源指示燈不亮	電源插頭與插座是否接觸不良	使電源插頭與插座接觸良好
	過電流保護器是否彈出	按下過電流保護器。若按下後，仍發生過電流保護器彈開情況，請與本公司服務中心聯繫

注意

- 若經檢查，不是以上原因，請關閉電源開關，從電源插座上拔下電源插頭，並與您購買本產品的經銷商或本公司聯繫，要求維修保養。
- 較長時間未使用後，再次使用前，應先重新仔細閱讀本說明書，然後再確認按摩椅有無異常，以免導致事故或受傷。

故障顯示

在動作過程中發生故障時，會顯示此畫面，並在抬頭處顯示錯誤代碼。您可以根據此畫面做故障排除，或者，根據以下表格來對應處理。



出現部分問題，機器暫停運轉！
錯誤代碼：A1

■ 步驟一
請先行關機後，重新開機操作。看看是否排除障礙。



■ 步驟二
若步驟一操作後，仍然出現此畫面，請關閉電源開關，重新啟動操作。



■ 步驟三
若重新開機後問題仍然無法排除，請聯繫客服人員處理。

故障顯示代碼

故障代碼	內容	處置方法
A0 ~ A2	揉按結構部位出現異常，動作中止。	(1) 按「緊急停止」鈕。 (2) 關閉按摩椅電源開關，重新開啟電源操作。
B0 ~ B8	負荷出現異常，動作中止。	(1) 按「緊急停止」鈕。 (2) 關閉按摩椅電源開關，重新開啟電源操作。
C1	溫熱功能感應異常。	關閉溫熱功能，請與本公司服務中心聯繫。 ※ 其他按摩功能仍可正常使用。
E0 ~ E8	內部訊號系統出現異常。動作中止。	請與本公司服務中心聯繫。
90/OF/F0	遙控器訊號異常	(1) 關閉按摩椅電源開關，重新開啟電源操作。 (2) 重新操作後，故障代碼仍出現時，請與本公司客服中心聯繫。

※ 若依上述處置方法操作後，故障代碼仍出現時，請與購買本產品的經銷商或本公司服務中心聯繫。聯繫時，若能提供故障顯示代碼，能幫助處理作業更順暢。

保修與售後服務

關於修理、使用以及維修方法，請事先洽詢服務門市或銷售商。

- 保證期間
請參閱隨機附帶的保證卡，務請確認內容填寫完整且加蓋公司章或經銷商章，並仔細閱讀其內容。請妥善保管保證卡，維修時請出示保證卡。

委託修理時

按照 29 頁故障排除所述採取相應措施後，仍有異常時，應停止使用，關閉電源開關，從電源插座上拔下電源插頭，務必洽詢服務門市或銷售商。

- 超過保修期間後委託修理時
請事先洽詢服務門市或銷售商。因修理而能維持產品功能時，根據客戶的維修委託進行收費修理。
- 有其他不明問題時
有關售後服務方面及有任何不明問題時，務必洽詢服務門市或銷售商。

規格

品名		按摩椅
型號		MR7000 (繁體) / MC-JMR7000 (簡體)
通用名稱		家用電動按摩器
額定	電源(50 / 60Hz)	AC110V
	額定時間	30分鐘
	耗電量(50 / 60Hz)	150W (無溫熱開啟) / 190W (溫熱開啟)
按摩速度	揉捏速度	6-36次/分鐘
	捶打速度	200-738次/分鐘
	指壓次數	6-12次/分鐘
氣壓按摩之氣壓		45kPa
按摩強度		5檔調節
腳機按摩強度		4檔調節
氣壓按摩強度		3檔調節
自動定時器		約15/30分鐘
椅背起放角度	靠背	約120~165度
	腿部按摩器	角度範圍為2~94度
尺寸(約值)	椅背未躺放時	寬890 x 深1500 x 高1250 公釐 (腿部按摩器於收納位置)
	椅背躺放時	寬890 x 深2000 x 高930公釐 (腿部按摩器抬起至最高位置)
	腳機伸展長度	180 公釐
重量		約108公斤
椅套		PVC人造皮革/ PU人造皮革
產地	中國	